


permobil

ROHO SEATING + POSITIONING

ROHO® AGILITY® Back System Fixed Hardware Operation Manual



In addition to these instructions, refer to the *ROHO AGILITY Back System Operation Manual*.

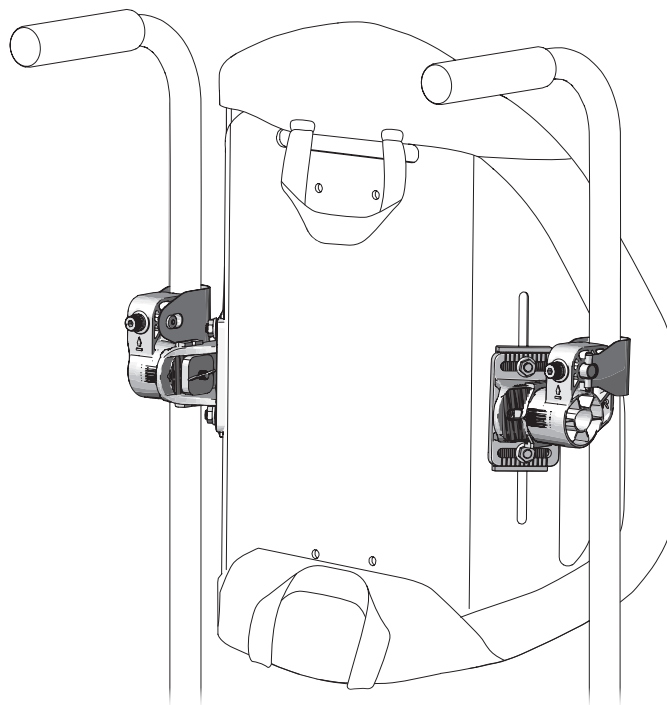

Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y®



ROHO® AGILITY® Ryggssystem fast maskinvare Bruksanvisning



I tillegg til disse instruksjonene, se *ROHO® AGILITY® Ryggssystem Bruksanvisning*.

Leverandør: Denne håndboken skal gis til brukeren av dette produktet.

Bruker (bruker eller terapeut): Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk og oppbevar den for senere bruk.

Innholdsfortegnelse

Tilsiktet bruk	106
Viktig sikkerhetsinformasjon	106-7
Deledetaljer	108
Produktspesifikasjoner	108
Innstallasjon av ryggskallmaskinvare	109
Rullestolkompatibilitet	109-10
Montering av AGILITY	110-12
Høydejustering	112-13
Setedybde og vinkeljustering	114-15
Snu ryggskallet	115
Demontering av AGILITY	116
Problemløsning	116
Vedlikehold	117
Lagring, avhending og resirkulering	
Rengjøring og desinfeksjon	
Begrenset garanti	



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429 U.S.A.

U.S.A.: 800-851-3449 • Faks: 888-551-3449 • Kundeservice: orders.roho@permobil.com

Utenfor USA: 618-277-9150 • Faks: 618-277-6518 • intlorders.roho@permobil.com • permobilus.com

ROHO-produkter kan være dekket av en eller flere amerikanske og utenlandske patenter og varemerker, inkludert ROHO®, AGILITY®, og shape fitting technology®. Zytel® er et registrert varemerke DuPont.

ROHO, Inc. har en politikk for kontinuerlig produktforbedringer og forbeholder oss retten til å endre dette dokumentet. En gjeldende versjon av dette dokumentet er tilgjengelig på permobilus.com.

© 2016, 2018 ROHO, Inc.

Rev. 04/09/2018

Tilsiktet bruk

ROHO® AGILITY® Ryggssystem fast maskinvare (AGILITY fast maskinvare) er ment for å feste kompatibel ROHO AGILITY-ryggssystemer til rullestolens ryggstøt. Kompatible ROHO AGILITY-ryggssystemer inkluderer:

- ROHO® AGILITY Minimum Contour ryggssystem (AGILITY Minimum Contour)
- ROHO® AGILITY Mid Contour ryggssystem (AGILITY Mid Contour)
- ROHO® AGILITY® Max Contour ryggssystem (AGILITY Max Contour)



AGILITY fast maskinvare skal kun brukes med ROHO AGILITY ryggssystemer i høyde 25,5 cm, 33 cm og 40,5 cm.



KONTRAINDIKASJON: AGILITY fast maskinvare er ikke ment å brukes på ROHO AGILITY-ryggssystemer som er større enn 16 tommer (40,5 cm) i høyde.

ROHO, Inc. anbefaler at en terapeut, for eksempel lege eller fysioterapeut med erfaring i sittestillinger og posisjonering, konsulteres for å avgjøre om AGILITY med fast maskinvare er riktig for brukerens sittebehov.

Medisinske produkter fra ROHO er ment til å brukes som en del av et generelt behandlingsregime. ROHO, Inc. anbefaler at en kliniker anbefaler produkter på grunnlag av evaluering av en enkeltpersons medisinske og terapeutiske behov og generelle tilstand.

Viktig sikkerhetsinformasjon



Advarsler:

- IKKE bruk produktet uten først å lese og forstå alle de medfølgende instruksjonene. Hvis du ikke klarer å utføre noen oppgaver i denne bruksanvisningen, søk hjelp ved å kontakte kliniker, utstysleverandøren, distributøren eller ROHO, Inc.
- Følg all(e) instruksjoner og sikkerhetsinformasjon som følger med produktet og er levert av produsenten av rullestolen eller annet tilbehør.
- Skader i hud/bløtvev kan oppstå av flere grunner, som kan variere fra person til person. Kontroller huden jevnlig, minst én gang om dagen, og spesielt områder som dekker benfremspring. Rødhet, blåmerker eller mørkere områder (sammenlignet med normal hud) kan indikere overfladisk eller dypere vevskader som bør bli kontrollert. Dersom hud/bløtvev blir misfarget på noen som helst måte, må ALL BRUK stanses umiddelbart. Kontakt helsepersonell umiddelbart dersom misfargingen ikke forsvinner innen 30 minutter etter avsluttet bruk.
- Produktet bør installeres av din utstysleverandør eller kliniker.
- Profuktet må ha riktige dimensjoner for brukeren og rullestolen.
- Som med alt annet rullestolutstyr, kan produktet påvirke rullestolens stabilitet. Før du bruker produktet, ta kontakt med en kliniker eller utstysleverandør for å finne ut om rullestolen din bør endres.
- IKKE len deg over kanten på AGILITY ryggsystemet. Dette kan forårsake forandring av tyngdepunktet, og rullestolen kan tippe over.
- Vær forsiktig når du monterer, tilpasser eller fjerner maskinvare for å unngå å klemme eller sett fingrene fast i åpningene.
- Kontroller stramheten til skruer, mutre, klemmer og braketter daglig. Etterstram løse skruer ved å følge instruksjonene i denne brukerveiledningen. Kontroller for slitasje og brudd daglig. IKKE fortsett å bruke produktet om deler er ødelagte, eller ikke kan etterstrammes. Produktet bør inspiseres grundig av utstysleverandøren med jevne mellomrom.
- IKKE løft eller presse en rullestol ved hjelp av noen deler av en AGILITY. Delene kan løsne fra rullestolen.
- Tester eller sertifiseringer, inkludert mht. brennbarhet, gjelder ikke lenger for denne enheten når den blir kombinert med andre produkter eller materialer. Kontroller tester og sertifiseringer for alle produkter som blir brukt i kombinasjon med denne enheten.
- Endring av produktet eller bruk av andre maskinvare eller komponenter enn de som er gitt av ROHO og kompatible med produktetmodellen kan føre til skade på produktet eller feil og kan gjøre garantien ugyldig.

Viktig sikkerhetsinformasjon, fortsatt



Forsiktighetsregler:

- Beskytt AGILITY mot slag og støt som kan forårsake skader og/eller ødeleggelser.
- AGILITYs komponenter er ikke beregnet for separat bruk, eller i kombinasjon med andre rullestol-ryggssystemer.
- Metallkomponenter kan bli varme om de utsettes for høye temperaturer, eller kalde om de utsettes for lave temperaturer.
- AGILITY må muligens fjernes for at rullestolen kan slås sammen.



Advarsler - Kjøretøystransport

- Brukeren bør om mulig flyttes fra rullestolen med AGILITY installert til kjøretøyets originale bilsete og bruke kjøretøyets kollisjonstestede sikringsutstyr.
- AGILITY må ALLTID oppbevares trygt under transport for å unngå skader.
- Hvis produktet har vært involvert i en ulykke under transport, se "Vedlikehold" i denne bruksanvisningen.
- Å ikke ta disse advarslene alvorlig kan resultere i alvorlig skade på rullestolbrukeren eller andre personer.
- AGILITY må installeres på rullestolen på en korrekt og sikker måte. Følg alle instruksjonene og advarslene i denne brukerveiledningen.
- AGILITY må installeres på rullestolen slik at brukeren sitter i oppreist stilling, og rullestolen bør stå i kjøreretningen når det transporteres i et kjøretøy. AGILITY har bare blitt kollisjonstestet med rullestolen stående i kjøreretningen, i henhold til testinformasjonen i denne bruksanvisningen.
- AGILITY må kun brukes med rullestoler som oppfyller ytelseskravene til ISO 7176-19 og som installeres, brukes og vedlikeholdes i samsvar med rullestolprodusentens instruksjoner.
- Rullestoler med AGILITY må brukes med et effektivt rullestolforankringssystem og et korrekt plassert, kollisjonstestet 3-punktsbelte for brukeren, eller Wheelchair Tiedown and Occupant Restraint System (WTORS), ved å følge produsentens instruksjoner.
- Den øverste delen på AGILITY bør plasseres så nært øvre del av brukerens skulder som mulig for å gi god støtte under en eventuell kollisjon. Det bør ikke være mer enn 16,5 cm mellom skulderen til brukeren og øverste del av rullestolryggen.

AGILITY med fast maskinvare er dynamisk testet av et tredjepart testanlegg for bruk i bil og oppfyller alle gjeldende kriterier for setesystemer for rullestoler foreslått i paragraf 5.1 av ANSI/RESNA WC-4 2012 paragraf 20 "Setesystemer til rullestol for bruk i motorkjøretøy".

Deledetaljer

Denne håndboken* refererer til følgende pakkeinnhold:


Ryggrørmaskinvare, ryggskallmaskinvare, rørhylser, dobbel skiftenøkkel, bruksanvisning, registreringskort

* For mer produktinformasjon, se **ROHO® AGILITY® Ryggssystem Bruksanvisning**.



Merk: Målebånd eller linjal anbefales, men er ikke inkludert i pakken.

Fast maskinvare (R)

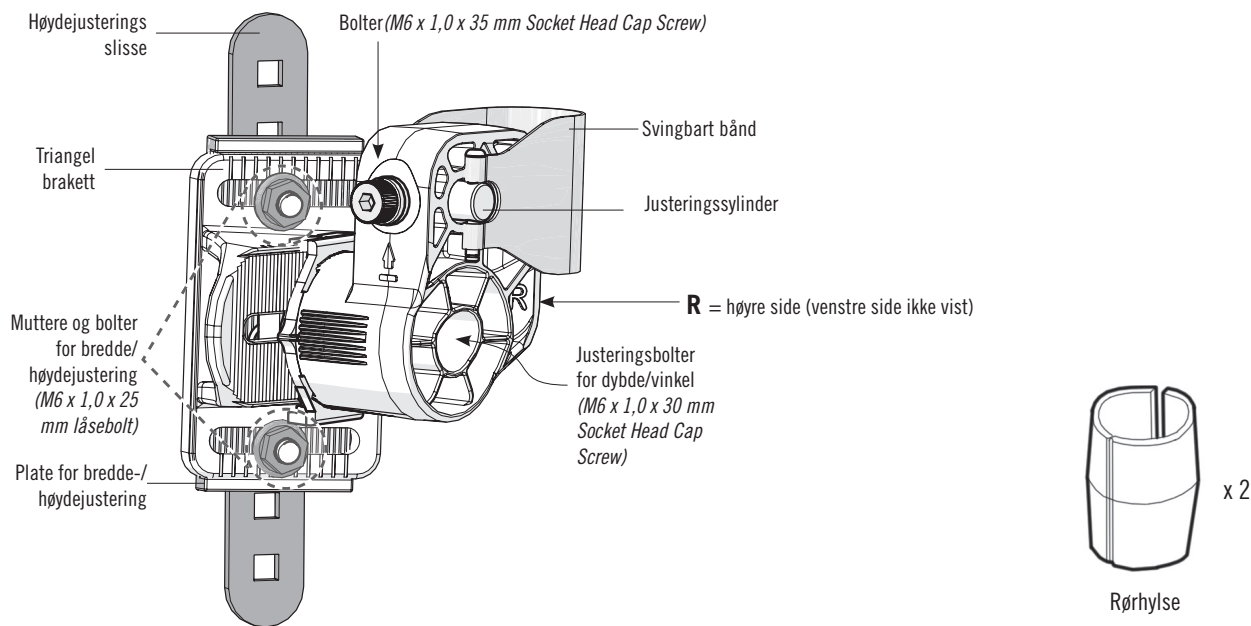


Bruksanvisning



Produktregistreringskort

Dobbel skiftenøkkel

Tas fra hverandre og monteres ved bruk som unbrakonøkkel:

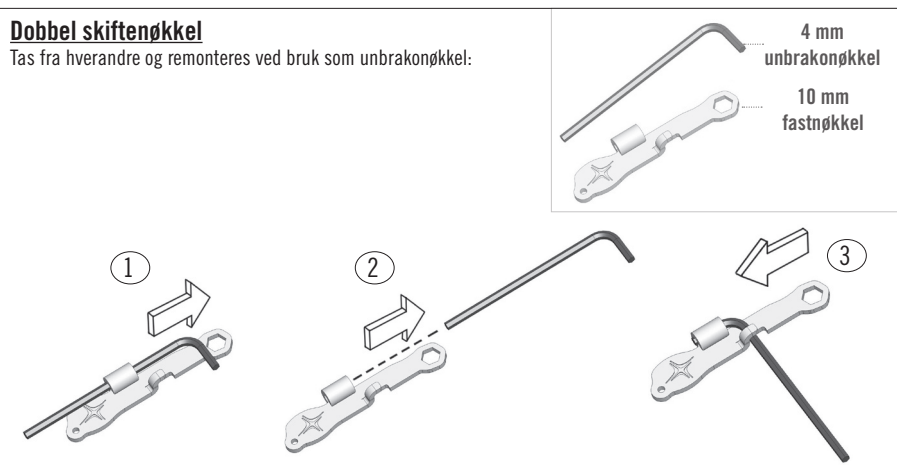

For å bestille reservedeler, kontakt produktleverandøren din eller ROHO, Inc.

Produktspesifikasjoner


Materialer: Fast maskinvare: Zytel®, glassfylt nylon, aluminium og polypropylen

Vekt av AGILITY fast maskinvare: 1,75 lb. (0,8 kg)


Innallasjon av ryggskallmaskinvare

Merk: Hvis AGILITY ble levert uten fast ryggskallmaskinvare montert, kan du følge disse instruksjonene for å installere beslaget.


- 1) Bruk fastnøkkel til å løsne og fjerne bredde-/høydejusteringsmutterene. Repeter på begge sider.

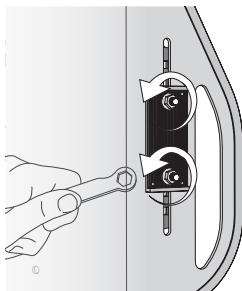


- 2) Plasser venstre (L) og høyre (R) fast maskinvare på venstre (L) og høyre (R) bredde-/høydejusteringsplater.
Høyre ryggskallmaskinvare vises.

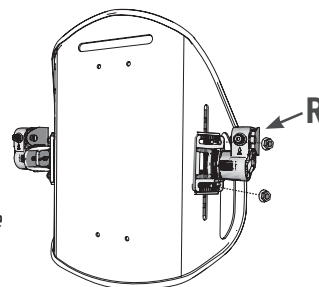

- 3) Bytt ut boltene for bredde-/høydejustering.

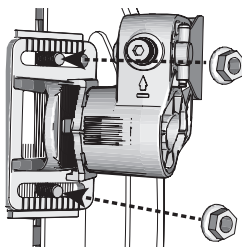


- 4) Stram til mutrene for bredde-/høydejustering.

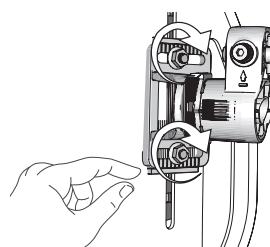

- 5) Trekk til bredde/ høydejusteringsmutrene med fastnøkkel til den sitter + en kvart omdreining. Repeter på begge sider.

Merk: i tilfelle momentnøkke er tilgjengelig, stram til 4,25 +/- 0,25 Newtonmeter.

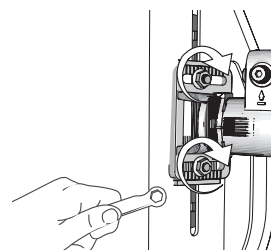

Rullestolkompatibilitet

⚠ Advarsel: AGILITY-maskinvaren er kompatibel med mange rullestoler som kan lenes bakover, tiltes eller har en vinkelregulerbar rygg som kan resultere i en ryggvinkel opp til og inkludert 60 grader. Om 60 grader ryggvinkel overstiges, kan AGILITY-maskinvaren bli ødelagt, løsne fra rullestolen og øke risikoen for fall og alvorlig skade. Hør en kliniker eller utstyrsleverandør for å finne ut om AGILITY-maskinvaren er kompatibel med rullestolen.

Kompatibilitet for rullestolrør: Mål diameteren på ryggrørene.

⚠ Advarsel: AGILITY fast maskinvare er ikke ment å installeres på rørdiameterer over 2,5 cm uten rørhylser. Dette kan resultere i en installasjon som IKKE er sikker. Konsulter med en terapeut eller utstyrsleverandøren for å finne ut om ryggrørene dine er kompatible med AGILITY fast maskinvare.

Sirkulære diameterer for ryggrør (A):

1 tommer til h_less; 1¼ tommer (2,5 cm til h_less; 3,0 cm)	Rørhylser kreves ikke.		
2,0 til 2,5 cm	Rørhylser kreves ikke. Se INSTALLASJON AV RØRHYLSE.		

Rullestolkompatibilitet, fortsettelse

Installasjon av rørhylse (om nødvendig)




Advarsel: Rørhylser kreves for ryggør med diameter på 2,0 til mindre enn 2,5 cm..

Se KOMPATIBILITET FOR RYGGØR i PRODUKTSPEISIFIKASJONER.


Merk: Hvis du må bruke ryggør, utfør følgende instruksjoner etter at AGILITY har blitt plassert på rullestolrørene, men før du strammer boltene.

Spre opp ryggghylsen og plasser den på rullestolrøret. Skyv rørhylsen inn i det svingbare båndet. Repeter på begge sider.

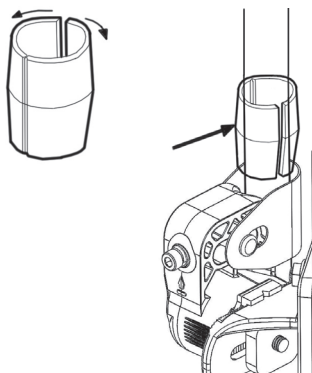


For begge sider, stram boltene med unbrakonøkkelen som anvist i INSTALLASJONSALTERNATIV A eller i INSTALLASJONSALTERNATIV B.

Merk: Det kan være nyttig å plassere åpningen av rørhylsen mot ryggskallet.

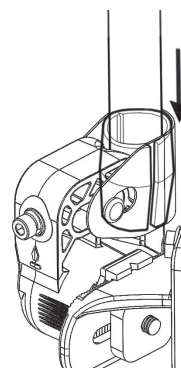

Montering av AGILITY

Stopp: Hvis ryggskallmaskinvaren ennå ikke er montert på AGILITY ryggskallet, se INSTALLASJON AV RYGGSKALLMASKINVARE.

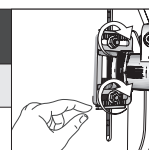

Advarsler:

- IKKE monter eller fjern AGILITY mens brukeren sitter i rullestolen.
- IKKE juster bredden på en AGILITY mens brukeren sitter i rullestolen.
- Når du har installert eller justert en AGILITY, og før brukeren flyttes til rullestolen, kontroller at all maskinvare er strammet til skikkelig. Se de anbefalte dreiemomentspesifikasjonene.

Merknader:

- Trekket må settes på ryggskallet før du installerer en AGILITY. Se ROHO® AGILITY® Ryggssystem Bruksanvisning som fulgte med din AGILITY.
- Under installasjon og fjerning, gi støtte til midten av ryggskallet for å holde venstre (L) og høyre (R) maskinvare jevnt og i flukt med rørene.
- Lås rullestolhjulene før montering.
- En installasjonsvideo for AGILITY er tilgjengelig på permobilus.com.

Installasjonsalternativer:

Følg instruksjonene for INSTALLASJONSALTERNATIV A hvis rullestolrørene har kjørehåndtak eller annet utstyr som kan forstyrre installasjonen.

Hvis ikke, følg instruksjonene for INSTALLASJONSALTERNATIV B.


AGILITY-installasjonstrinn for alternativ A eller alternativ B:

1. Løsne boltene
2. Plasser AGILITY på rullestolen
3. Stram til boltene
4. Komplette festing
5. Høydetilpasning
6. Setedybde og vinkeljustering


Løsne boltene - Alternativ A og alternativ B

- 1) For begge sider: Løsne boltene.

Merk: Enden av boltene skal være i flukt med justeringssylinderen.

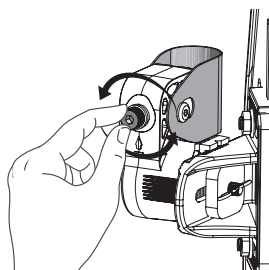

VIKTIG! Boltene skal IKKE løsne fra justeringssylinderen.

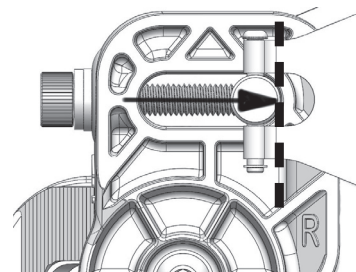


Installasjon av AGILITY, fortsettelse


Plasser AGILITY på rullestolen - Alternativ A eller alternativ B

Installasjonsalternativ A

- 2) Skyv mot boltene med tommelen og lirk det svingbare båndet bort fra justeringssylinderen. Roter det svingbare båndet. Gjenta for den andre siden.

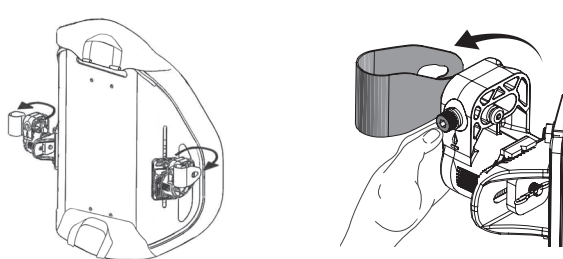


- 3) Plasser de svingbare båndene rundt rullestolrørene. Fest det svingbare båndet med tommelen mot boltene så den smale delen av åpningen er på sporet i justeringssylinderen.

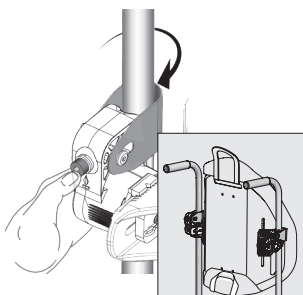


Installasjonsalternativ B

- 2) De svingbare båndene bør forbli festet til justeringssylinderne.

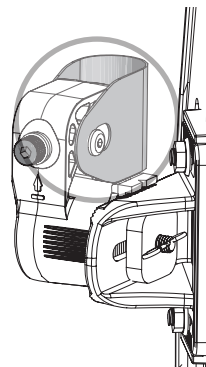

- 3) Skyv svingbåndene på rullestolrørene.

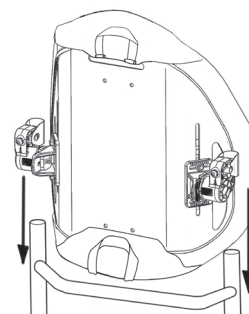




Trekk til boltene - Alternativ A og alternativ B



VIKTIG! Kontroller at festemaskinvaren er i flukt med rullestolrørene.


- 4) For begge sider: Stram boltene med fingrene.

Merk: Når du strammer hver bolt, må du klype eller klemme det svingbare båndet for å hjelpe den smale delen av åpningen med å gripe inn i sporet i justeringssylinderen.

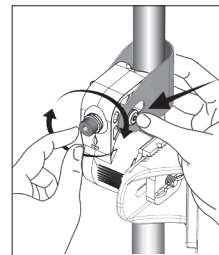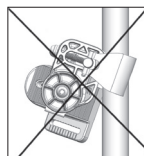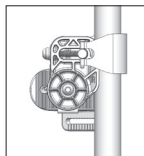


- 5) Hvis du ikke er i stand til å feste maskinvaren eller stramme boltene, må du kanskje justere bredden: Løsne, men ikke fjern, bredde-/høydejusteringsmutrene.


- Skyv trekantbraketten fremover for større bredde.
- Skyv trekantbraketten bakover for smalere bredde.

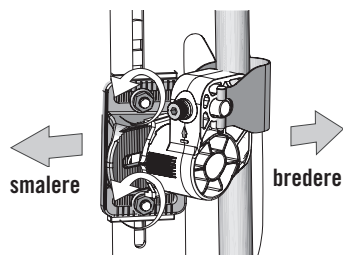

VIKTIG! Bruk referansesporene slik at venstre og høyre trekantbraketter er i samme posisjon på begge sider.

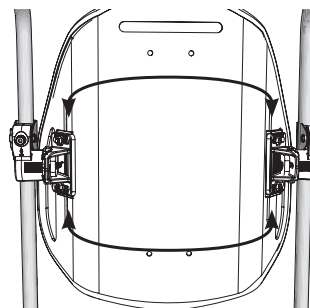


Referansespor

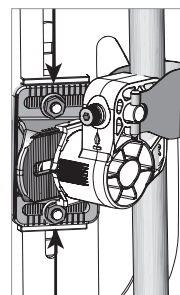

Installasjon av AGILITY, fortsettelse


Fullstendig fastsetting - Alternativ A og alternativ B

6) Stram til mutrene for bredde/høydejustering.

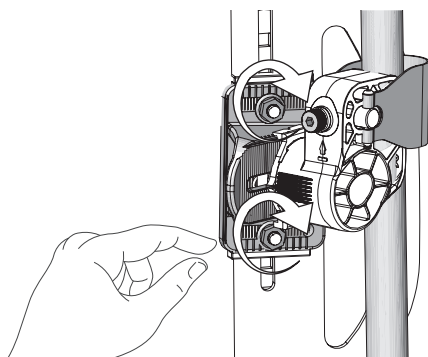

7) Fullstendig fastsetting på begge sider:

- Bruk et målebånd for å sørge for at det svingbare båndet er i samme høyde på rullestolrørene.
- Stram boltene med unbrakonøkkelen til de sitter stramt + en kvart omdreining.
Merk: Hvis en momentnøkkel er tilgjengelig, ikke stram til mer enn 4,5 Newton-meter.
- Se **HØYDEJUSTERING** hvis du må justere høyden.

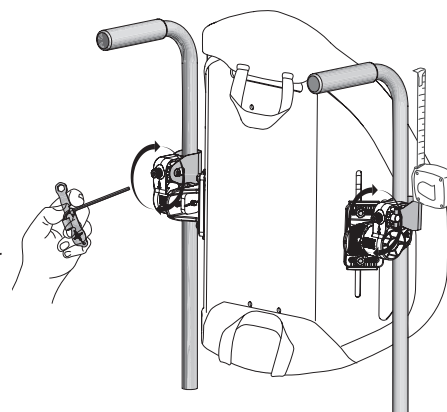

⚠ Advarsel: Når installasjonen og breddejusteringen er fullført, må du kontrollere alle maskinvarer er skikkelig tilskrudd før brukeren setter seg i rullestolen. Se de anbefalte dreiemomentspesifikasjonene.


Høydetilpasning

Advarsler:

- Høydejustering kan gjøres mens brukeren er i rullestolen, så lenge den gjøres riktig og forsiktig. Hvis du føler det er for vanskelig eller utrygt å utføre høydejusteringer mens brukeren er i rullestolen, bør brukeren forflyttes til en annen stol.
- Hvis du velger å justere høyden på en AGILITY mens brukeren sitter i rullestolen, må du først ta følgende forholdsregler:
 - ✓ Kontroller at rullestolhjulene er låste.
 - ✓ Sørg for at alle maskinvarer er skikkelig tilskrudd. Se de anbefalte dreiemomentspesifikasjonene.

Merk: Før du justere høyden på AGILITY, monter AGILITY på rullestolen. Se **INSTALLASJON AV AGILITY**.

⚠ Advarsel: Om AGILITY ikke er plassert i kontakt med SIPS, kan det medføre redusert bekkenstøtte og mindre stabilitet i overkroppen. Kontroller at AGILITY er riktig posisjonert slik at den nederste delen kommer i kontakt med PSIS.


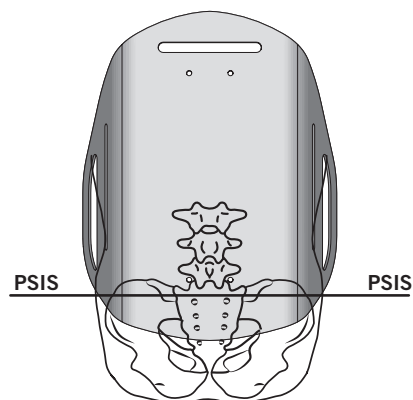


Høydejustering, fortsettelse


- 1) På begge sider: Bruk skiftenøkkelen for å løsne bredd-/høydejusteringsmutterne:

! IKKE fjern bredde-/høydejusteringsmutrene.


Løsne justeringsmutrene for bredde og høyde motsvarende mindre enn to (2) fulle runder fra en stram posisjon. Mutrene bør være akkurat løse nok til at justeringsplaten kan gli opp og ned.

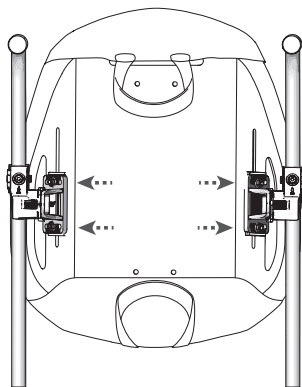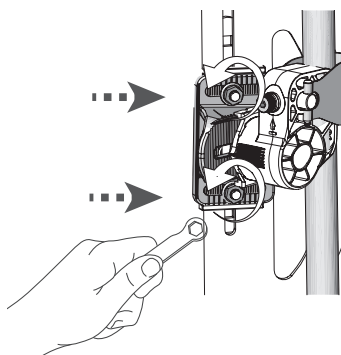

- 2) Skyv ryggskallet opp eller ned i de vertikale sporne til ønsket høyde:


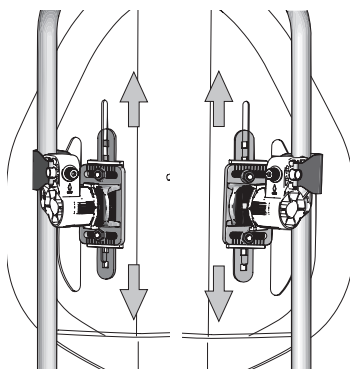


! VIKTIG! Forsikre deg om at ryggskallmaskinvaren er på samme høyde på begge sider: Tell firkantene du kan se gjennom de venstre og høyre vertikale sporne i ryggskallet for å kontrollere at venstre (L) ryggskallmaskinvare og høyre (R) ryggskallmaskinvare er i samme høyde. (Firkantene er en del av den glidende høydejusteringsstangen. Se **DELERDETALJER.**)

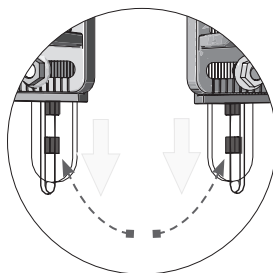

! Advarsel: Når justeringen er ferdig, må alle beslag være skrudd til skikkelig. Henvist til de anbefalte dreiemomentspesifikasjonene.

- 3) Mens du holder ryggskallet på plass, bruk fastnøkkelen til å stramme bredd-/høydejusteringsmutrene på bredd-/høydejusteringsboltene til de sitter stramt + en kvart omdreining. Merk: Ved bruk av momentnøkkel, stram boltene til $4,75 \pm 0,25$ Newton-meter.

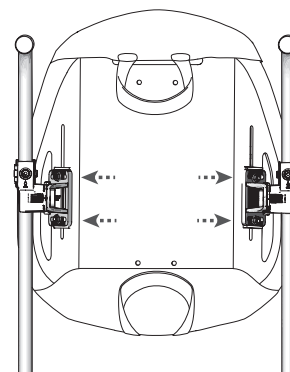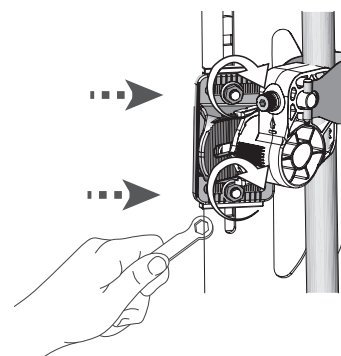

Setedybde og vinkeljustering




Advarsler:

- Dybde- og vinkeljusteringer kan gjøres mens brukeren er i rullestolen, så lenge det gjøres riktig og forsiktig. Hvis du føler det er for vanskelig eller utrygt å utføre dybde- og vinkeljusteringer mens brukeren er i rullestolen, bør brukeren forflyttes til en annen stol.
- Hvis du velger å justere setedybden og -vinkelen på en AGILITY mens brukeren sitter i rullestolen, må du først ta følgende forholdsregler:
 - ✓ Kontroller at rullestolhjulene er låste.
 - ✓ Sørg for at alle maskinvarer er skikkelig tilskrudd. Se de anbefalte dreiemomentspesifikasjonene.

Merk: Før du justerer setedybden og vinklene på AGILITY, installer AGILITY på rullestolen. Se **INSTALLASJON** av **AGILITY**.


Markører for setedybde

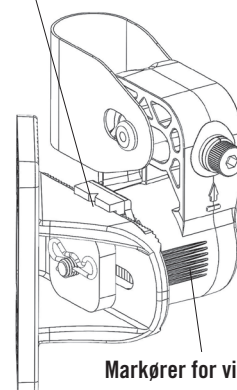


Markører for vinkel

For justere setedybde


- 1) Bruk unbrakonøkkelen til å løsne dybde-/vinkeljusteringsboltene omtrent tre (3) hele ganger rundt.

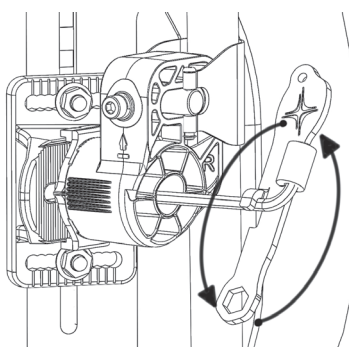

- 2) Skyv ryggskallet frem eller tilbake til ønsket dybde er nådd. Merk: Om trekantbraketten ikke vil skyves, se **FEILSØKING**.

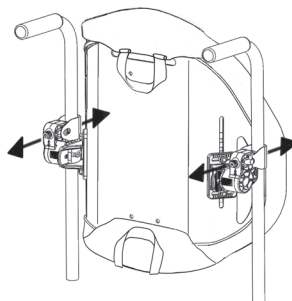


- 3) **VIKTIG!** Pass på at dybdeposisjonene på begge sider er likestilte ved å sammenligne markørene øverst på trekantbrakettene.

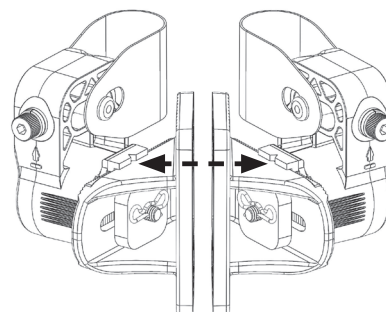

- 4) Hvis AGILITY ennå ikke er justert til ønsket vinkel, går du videre til neste avsnitt, **FØR Å JUSTERE VINKELN**.


- 5) Hvis AGILITY allerede er justert til ønsket vinkel: Bruk unbrakonøkkelen til å stramme til høyre og venstre og dybde-/vinkeljusteringsbolter mens du holder ryggskallet på plass, dreier til de sitter stramt + en kvart omdreining. Merk: Ved bruk av momentnøkler, stram boltene til $7 \pm 0,5$ Newton-meter.

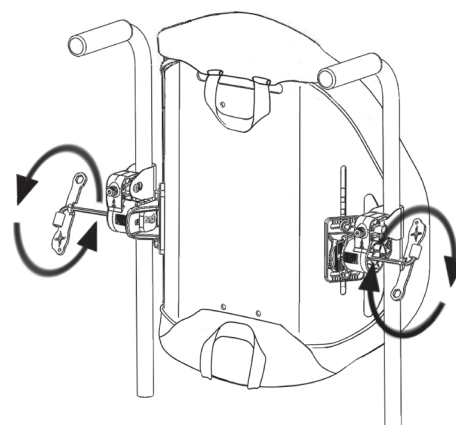


Setedybde- og vinkeljustering, fortsettelse

For å justere vinkelen


- 1) Hvis de ennå ikke er løsnet, bruk unbrakonøkkelen til å løsne dybde-/vinkeljusteringsboltene omtrent tre (3) hele ganger rundt.

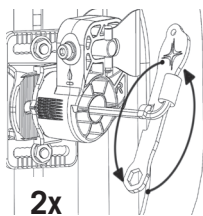


- 2) Dreier ryggskallet.

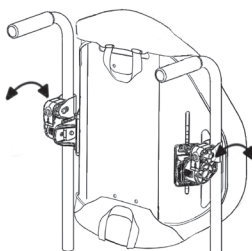

VIKTIG! Sammenlign markørene på forsiden av den fastmonterte maskinvaren for å sikre at begge sider roteres identisk. Notat: 5 grader per mark (15 grader av fremre og bakre vipping).

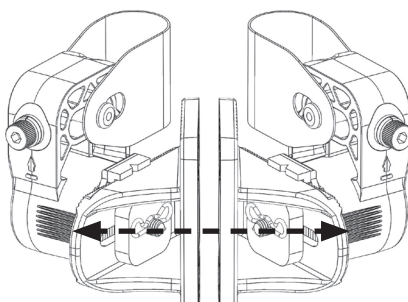



- 3) Bruk unbrakonøkkelen til å stramme til høyre og venstre og dybde-/vinkeljusteringsbolter mens du holder ryggskallet på plass, dreier til de sitter stramt + en kvart omdreining. Merk: Hvis en momentnøkkel er tilgjengelig, stram boltene til $7 \pm 0,5$ Newto-meter

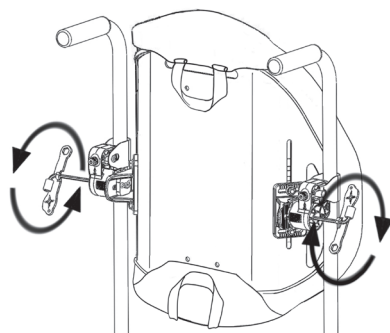




⚠ VIKTIG: Når du er ferdig med installasjon og justering, pass på at all maskinvare er skrudd til ordentlig før du flytter brukeren til rullestolen. For anbefalte spesifikasjoner for dreiemoment, se de respektive delene i brukerveiledningen. Om brukeren sitter i stolen og nye dybde- og vinkeltilpasninger er nødvendig, se ADVARSLER i begynnelsen av dette avsnittet, og foreta så nye tilpasninger. Skru til alle delene på nytt.

Snu ryggskallet

- 1) Fjern AGILITY fra rullestolen. Se **DEMONTERING AV AGILITY**.
2) Fjern ryggskallmaskinvaren:
- Bruk fastnøkkelen til å fjerne bredde-/høydejusteringsmutrene.
 - Fjern trekantbrakettene fra ryggskallet.

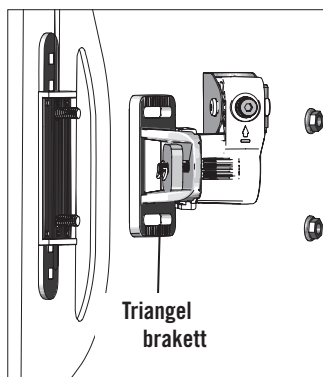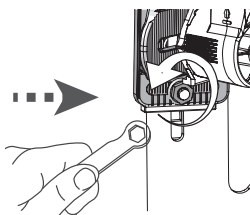

- 3) Roter ryggskallet.
4) Monter og juster AGILITY. Se alle justerings- og installasjonsinstruksjonene som følger med produktet.

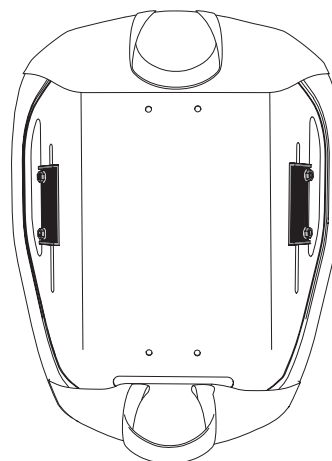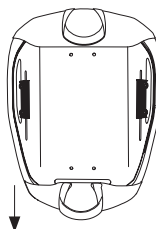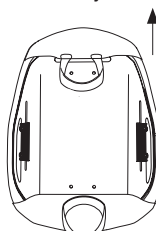

Demontering av AGILITY



Advarsel: IKKE fjern AGILITY mens brukeren sitter i rullestolen.

Alternativ A: Hvis rullestolrørene har kjørehåndtak eller annet utstyr som kan forstyrre installasjonen:

- 1) Bruk unbrakonøkkelen til å løsne bolten på begge sider.
- 2) Hekt av det svingbare båndet fra justeringssylindren.
- 3) Åpne de svingbare båndet.
- 4) Fjern AGILITY fra rullestolrørene.

Merk: Se **INSTALLASJON AV AGILITY** for referansebilder.

Alternativ B: Hvis rullestolrørene ikke har kjørehåndtak eller annet utstyr som kan forstyrre installasjonen:

- 1) Bruk unbrakonøkkelen til å løsne, men ikke fjerne bolten på begge sider.
- 2) Skyv svingbåndene ut av rørene.

Problemløsning

For mer hjelp, kontakt utstyrsleverandøren, distributøren eller ROHO, Inc.

<p>Klarer ikke feste komponenter under INSTALLASJON AV AGILITY.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller at festeanordningen er i flukt med rullestolrørene. - Forsikre deg om at den faste maskinvaren er på samme høyde på begge sider: Bruk et/en målebånd eller linjal, om nødvendig. - Vanligste sted for installasjon av den faste maskinvaren er på baksiden av rygggrørene. Om en avstiverbøyle er i veien for maskinvaren når den er montert på det vanligste stedet, kan maskinvaren installeres på forsiden av rygggrørene. Uansett om maskinvare installeres bak eller foran rygggrørene skal venstre (L) og høyre (R) maskinvare være riktig plassert fra installatørens synsvinkel.
<p>Klarer ikke feste komponenter eller sikre komponenter under INSTALLASJON AV AGILITY.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller at festeanordningen er i flukt med rullestolrørene. - Pass på at bredden er tilpasset korrekt for rullestolen. Avstanden mellom rygggrørene kan variere. Hvis den faste maskinvaren ikke faller på plass og hekker seg i rullestolrørene, kan det være behov for en breddejustering. Tilpass bredden i som beskrevet i INSTALLASJON AV AGILITY. Det kan ta noen forsøk før du finner den rette breddeposisjonen for rullestolen din. - Hvis du ikke er i stand til å den faste maskinvaren på rullestolrørene, må du kanskje bruke rørhylser. (Se KOMPATIBILITET FOR RULLESTOLRØR.)
<p>Klarer ikke feste komponenter riktig under INSTALLASJON AV AGILITY ELLER HØYDEJUSTERING.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Påse at fast maskinvare - (venstre (L) og høyre (R)) - er på riktige sider. - Påse at bredde- og høydejusteringsmutrene er i samme posisjon på trekantbrakettene. Bruk referansesporene under de horisontale sporene på trekantbrakettene som referanse. (Se INSTALLASJON AV Agility.) - Påse at den faste maskinvaren er like høy på begge sider. Tell antall firkantede åpninger som er synlige på hver side i den glidende høydejusteringsstangen (Se HØYDEJUSTERING eller DELETEDALJER.)
<p>Klarer ikke feste komponenter riktig under SETEDYBDE- OG VINKELJUSTERING.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Påse at venstre (L) og høyre (R) dybder er like. Sammenlign markørene øverst på trekantbrakettene. - Påse at de venstre (L) og høyre (R) beslag er rotert i til samme vinkel. Sammenlign markørene foran på beslaget.

Vedlikehold



Advarsel: IKKE fortsett å bruke AGILITY om deler er ødelagt, eller ikke går an å stramme. Produktet bør inspiseres grundig av utstyrsleverandøren med jevne mellomrom.

Sjekk daglig om AGILITY-skruer, -mutre, -klemmer og -braketter er skrudd til ordentlig. Skru til løse skruer ved å følge instruksjonene i denne brukerveiledningen.

Lagring, avhending og resirkulering

Lagring: Rengjør og desinfiser produktet før lagring. Oppbevar produktet i en beholder som beskytter produktet mot fuktighet, forurensning og skader.

Avhending: Produktene i denne bruksanvisningen inneholder ingen kjente miljøskadelige komponenter, når produktet brukes i henhold til tiltenkt bruk og avhendes i samsvar med lokale/regionale forskrifter. Forbrenning må utføres av et kvalifisert, lisensiert anlegg for avfallshåndtering.

Resirkulering: Kontakt det lokale renholdsverket for å få vite alternativer for produktet. For mer informasjon om resirkulering, kontakt ROHO, Inc.

Rengjøring og desinfisering

Rengjøring og desinfisering er to separate prosesser. Rengjøring må komme før desinfisering. Før bruk av en annen person: rengjør, desinfiser og kontroller at produktet fungerer slik det skal.



Forsiktighetsregler:

- Ikke bruk slipemidler slik som stålull eller skuresvamper på komponentene i AGILITY.
- IKKE bruk rengjøringsmidler som inneholder petroleum eller organiske løsemidler [dvs. aceton, toluen, metyletylketon (MEK), nafta, rensedmidler, limfjernere] på komponentene i AGILITY.



= Tørk med fuktig klut

For å rengjøre beslag: Vask for hånd i varmt (40 °C) vann med såpe og svamp. Skyll med rent vann. Tørk med ren klut og la det lufttørke helt.



For å desinfisere maskinvare: Tørk forsiktig av med en klut fuktet med vanlig desinfeksjonsmiddel. Skyll med rent vann. Tørk med ren klut og la det lufttørke helt.



Begrenset garanti

Begrenset garantiperiode fra den opprinnelige kjøpsdatoen for produktet: Ryggskallmaskinvare og rørmaskinvare: 60 måneder. Se også vedlegget Begrenset Garanti som medfølger produktet, eller kontakt kundeservice.



ROHO SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA

Administrative Offices:

100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA

U.S.: 1-800-851-3449 Fax 1-888-551-3449

Outside U.S.: 1-618-277-9150 Fax 1-618-277-6518

permobilus.com



Intertek

The products featured in this document were
manufactured under a Quality Management System
that is certified to ISO 13485:2016.

Item # T20251

Print Date:

Rev. 04/09/2018

Qty



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

