

# Smart Check<sup>®</sup>

by ROHO<sup>®</sup>

## Operation Manual



Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

s h a p e   f i t t i n g   t e c h n o l o g y<sup>®</sup>



# Smart Check® by ROHO®

## Handleiding

Leverancier: Deze handleiding moet aan de gebruiker van dit product overhandigd worden.

Gebruiker (Individu of verzorger): Lees deze instructies alvorens dit product te gebruiken en bewaar deze voor naslag in de toekomst.

## Inhoudsopgave

Beoogd gebruik	62-63
Belangrijke veiligheidsinformatie	
Legende	64
Specificaties	65
Beschrijving van onderdelen	
Overzicht	66
Smart Setup instructies	67-68
Controle 'Check' instructies	69
Optional Setup instructies	70
Hand Check uitleg / gids	
Hard reset instructies	71
Ontkoppelen en opslag	
Probleemoplossing	
Beperkte garantie	
Reinigen en desinfecteren	72
Batterij vervangen	
Verwijderen	



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429 U.S.A.

Verenigde Staten: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449 • Klantenservice: [orders.roho@permobil.com](mailto:orders.roho@permobil.com)

Buiten de Verenigde Staten: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518 • [intlorders.roho@permobil.com](mailto:intlorders.roho@permobil.com)  
[permobilus.com](http://permobilus.com)

ROHO-producten kunnen door een of meerdere Amerikaanse en buitenlandse patenten en handelsmerken worden beschermd, inclusief ROHO®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, Sensor Ready®, shape fitting technology®, Smart Check® by ROHO®, en Smart Check®.

ROHO, Inc. heeft als beleid het voortdurende verbeteren van haar producten en behoudt zich het recht voor om deze handleiding te wijzigen. Een actuele versie van dit document is beschikbaar op [permobilus.com](http://permobilus.com).

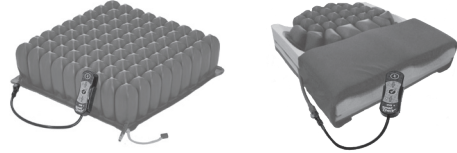
© 2015, 2018 ROHO, Inc.

Rev: 04/06/2018

## Intended Use

Smart Check® by ROHO® (Smart Check) is een feedbacksysteem dat bedoeld is om gebruikers te helpen, door tijdens het instellen van het kussen, een bereik op te slaan. Tijdens de daaropvolgende controles van het luchtniveau in het kussen zal Smart Check aangeven of er aanpassingen nodig zijn om het opgeslagen bereik te handhaven.

Smart Check moet worden aangesloten op een ROHO® Single Compartment Cushion (1-kamer kussen) met Sensor Ready® Technology (Sensor Ready kussen) of ROHO® Hybrid Elite SR™ kussen (Hybrid Elite SR).



## Belangrijke veiligheidsinformatie

- Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door voordat u het product begint te gebruiken.
- ROHO medische producten zijn bedoeld als onderdeel van de algemene verzorging. Een clinicus moet productaanbevelingen doen op basis van een evaluatie van de medische en therapeutische behoeften van het gebruiker en de algehele conditie. Een clinicus moet de gebruiker ook testen op visuele, leesvaardige en cognitieve beperkingen om te bepalen of er assistentie nodig is bij het gebruik van het product, mede om te bepalen of een handleiding met grote leestekens vereist is. Het gebruik van dit product betekent niet dat er geen routine-inspectie van het product en alle normale activiteiten in verband met de bescherming van de huid en zacht weefsel meer moeten worden uitgevoerd (gewichtverschuiving, huid onderzoeken, algemene huidverzorging, enz.)

## Waarschuwing

- **SmartCheck ROHO ontworpen voor gebruik met Sensor Ready ROHO kussens of Hybrid Elite SR. Gebruik van een kussen die niet bestemd is heeft invloed op de SmartCHECK functies. Dit kan verminderen of tenietdoen van de voordelen van het kussen, en het risico voor huid of zacht weefsel. Met behulp van een kussen dat niet geschikt is kan ook schade aan SmartCheck veroorzaken en vervalt de garantie.**
- **Gebruik NIET een te weinig opgeblazen kussen of een te veel opgeblazen kussen omdat de voordelen van het product zullen worden verminderd of geëlimineerd, wat zal leiden tot een hoger risico voor de huid en ander zacht weefsel. Als het kussen leeg loopt, of u kunt het kussen niet opblazen of laten leeglopen, raadpleeg dan “PROBLEMEN OPLOSSEN” in de handleiding die met het kussen werd geleverd. Neem onmiddellijk contact op met uw klinische verzorger, distributeur of ROHO, Inc. als het probleem aanhoudt.**
- **Controleer regelmatig het luchtniveau in het kussen, ten minste eenmaal per dag, met behulp van de Smart Check of een handmatige controle.**
- **Voer Smart Setup of Optional Setup opnieuw uit als een van volgende veranderingen plaatsvinden: 1) een ander persoon gebruikt Smart Check; 2) er wordt een andere stoel of kussen gebruikt; of 3) de persoon ervaart fysiologische veranderingen (bijvoorbeeld gewichtsverlies of gewichtstoename). Voordat u een nieuwe set-up uitvoert, moet u uw Smart Check-instellingen wissen, zie HARD RESET INSTRUCTIES.**
- **HOUDT BATTERIJEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN EN PERSONEN DIE DE NEIGING HEBBEN OM ONEETBAAR VOORWERPEN IN HUN MOND TE STEKEN. Het inslikken van batterijen kan ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben. Zoek ONMIDDELIJK medische hulp.**
- **Wees VOORZICHTIG in de aanwezigheid van kinderen om beknelling te voorkomen. Ontkoppel de Smart Check wanneer deze niet wordt gebruikt en bewaar deze op een veilige en toegankelijke plaats.**

## **Belangrijke veiligheidsinformatie, vervolg**

### **Waarschuwingen, vervolg**

- Accessoires (bijvoorbeeld een pomp of een kussenhoes) die niet door ROHO, Inc. worden verstrekt, kunnen onveilig zijn en kunnen de garantie laten vervallen.
- Breng geen **WIJZIGINGEN** aan de Smart Check of andere onderdelen aan. Dit kan leiden tot schade aan het product en zal de garantie laten vervallen.
- Gebruik het product **NIET** in de nabijheid van ontvlambare anesthesiemiddelen en/of zuurstofrijke omgevingen. Hierdoor kan het risico op brand of een explosie toenemen.
- Als uw kussen instabiel aanvoelt tijdens Smart Setup, voer dan een Hard Reset uit en herhaal de Smart Setup. Als uw kussen nog steeds instabiel aanvoelt, voer dan een Optional Setup uit en vraag advies aan een zorgverlener.
- De maat van het kussen **MOET** goed aangepast zijn aan de gebruiker. **INDIEN NIET**, dan is het mogelijk dat Smart Check niet het juiste vullingsbereik van de persoon vindt tijdens de Smart Setup, waardoor de voordelen van het kussen worden verminderd of teniet worden gedaan en het risico voor de huid en ander zacht weefsel groter wordt.
- Alle aspecten van het gebruik van Smart Check die in deze handleiding worden beschreven, kunnen door het gebruiker zelf of door een verzorger worden uitgevoerd. Als u niet in staat bent om de instructies in deze handleiding uit te voeren, zoek dan assistentie.
- **GEVAAR OP VERBRANDEN:** Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 47 °C (117 °F) zorg er dan voor dat u niet langer dan tien (10) minuten in contact komt met het oppervlak van het product.
- Smart Check **MAG ALLEEN** met een compatibele ROHO-kussenhoes worden gebruikt. Als er een ander kussenhoes wordt gebruikt, dan kan dit de nauwkeurigheid van de Smart Check-functies beïnvloeden.
- Voer **GEEN** onderhoud uit als de Smart Check in gebruik is. Dit kan leiden tot een onjuiste werking.
- Stel uw kussen in, in de gebruikelijke omstandigheden. Voer een controle uit als de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur en hoogte, aanzienlijk veranderen.

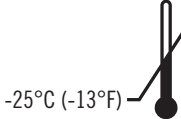

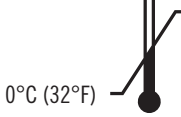


### **Waarschuwingen**

- Dagelijks: Controleer het koppelstuk/snelkoppeling, leidingen en behuizing van de Smart Check op slijtage of breuk en vergewis u van de goede aansluiting van de onderdelen. Blijf de Smart Check **NIET** gebruiken als er een onderdeel is beschadigd of niet veilig kan worden bevestigd. ROHO, Inc. raadt aan om de Smart Check regelmatig door een technicus te laten controleren.
- Dompel de Smart Check **NIET** onder in vloeistoffen, aangezien dit het apparaat zal beschadigen.
- Bescherm de Smart Check tegen schokken die schade of breuken kunnen veroorzaken.
- Stel het product **NIET** bloot aan hoge temperaturen, open vlammen of hete as.
- Gebruik het ventiel, het koppelstuk / snelkoppeling of andere onderdelen van de Smart Check **NIET** als een handvat om het kussen te dragen of er aan te trekken.
- Langdurige blootstelling aan ozon kan de gebruikte materialen aantasten, kan de prestatie van het product beïnvloeden en de garantie teniet doen.
- Langdurige blootstelling aan UV-licht/zonlicht kan ertoe leiden dat productlabels vervagen.

## Legende

Waarschuwing		Temperatuurslimiet	
Raadpleeg de instructies voor gebruik.		Beperking van luchtvochtigheid (relatief, niet-condenserend)	
Locatie van productie		Limiet atmosferische druk	
Droog bewaren.		Verstikkingsgevaar	
Met de hand schoonvegen.		Niet samen met huishoudelijk afval weggooien.	 
In de lucht laten drogen.		Gebruikersidentificatie	
Niet bleken.		IEC 60601-1: Type BF toegepast onderdeel	
Batterij bijna leeg: oranje lampje			

## Specificaties

<p>Opslagomstandigheden</p>  <p>-25°C (-13°F) — +70°C (158°F)</p>	 <p>0-5% — 93%</p>
<p>Gebruiksvoorwaarden</p>  <p>0°C (32°F) — 48°C (118°F)</p>  <p>700 hPa — 1060 hPa</p>	 <p>0-5% — 93%</p> <p>Hoogtebeperking (boven de zeespiegel); Onderlimiet -410 m (-1350 ft.) Bovenlimiet 3185 m (10450 ft.)</p>

- Smart Check: polycarbonaat met polyester knoppenpaneel
- Opberghoes: polystyreen
- Tubes / leiding: polyurethaan
- Koppelstuk / snelkoppeling: acetaal
- Dit product voldoet aan RoHS2.
- Smart Check is een type BF toegepast onderdeel. Smart Check werd getest en voldoet aan IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, en IEC 60601-1-11; gecertificeerd volgens CAN/CSA norm C22.2 nr. 60601-1. Elektromagnetische interferentie wordt niet veroorzaakt door Smart Check en interfereert niet met Smart Check.
- Verwachte levensduur: 5 jaar
- Batterijen: één (1) jaar bij normaal gebruik
- Smart Check is een IP54-geklasseerd apparaat (beschermd tegen stof en spatwater).

## Beschrijving van onderdelen

Inhoud verpakking: Smart Check® by ROHO®, Smart Check instructies, registratiekaart, opberghoes.

Productregistratie: Stuur het bijgevoegde productregistratie op of registreer uw product op [ROHO.com](http://ROHO.com).



Voor informatie over uw kussen, raadpleeg de *ROHO® 1-kamer kussen (Single Compartment Cushion) met Sensor Ready® Technology Handleiding* of *ROHO® Hybrid Elite® kussen Gebruiksaanwijzing*.



Handleiding



Product registratiekaart



Smart Check knoppenpaneel

*Raadpleeg de instructies voor meer informatie over het knoppenpaneel.*

Slang / tube

Koppelstuk / snelkoppeling



Opberghoes

## Overzicht

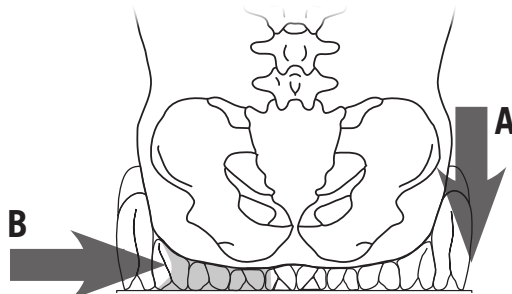
Op deze pagina krijgt u meer informatie over het gebruik van de Smart Check zodat u uw juiste kusseninstelling kunt vinden, opslaan en controleren.

Lees deze instructies voor het gebruik van de Smart Check.

### Smart Setup en controleren:

1. Volg de SMART SETUP INSTRUCTIES. Smart Check zal de juiste instelling vinden en opslaan.
2. Volg de CONTROLE 'CHECK' INSTRUCTIES. Wanneer u op de Check knop drukt, zal de Smart Check u laten weten of u uw kussen moet aanpassen.

Een correcte instelling voor het kussen: **A**) zink in het kussen en **B**) "zweef" boven de onderzijde van het kussen.



### Optional Setup is een alternatief voor Smart Setup.

Optional Setup kan in de volgende situaties worden gebruikt:

- Een gekwalificeerde zitspecialist heeft een alternatieve mate van inzinking en omhulling voor de gebruiker bepaald.
- De gebruiker heeft behoeften (zoals een ernstige asymmetrische houding) die zich buiten de instelling voor inzinking en omhulling bevinden, dan deze die tijdens de Smart Setup door Smart Check werden gevonden.
- Het kussen wordt gebruikt op een gepolsterd oppervlak (zoals een "Captain's Seat").



#### Waarschuwing:

- Het wordt aanbevolen om een gekwalificeerde specialist te raadplegen om uw voorkeurstellingen op te slaan met behulp van de Optionele Setup.
- De Optional Setup mag niet worden gebruikt als de gebruiker minder dan 40 kg weegt.

### Optional Setup (en controleren 'Check')

1. Vind uw favoriete instelling voor het kussen zonder gebruik te maken van Smart Check. (Raadpleeg de ROHO® 1-kamer kussen (Single Compartment Cushion met Sensor Ready® Technology Handleiding of ROHO® Hybrid Elite® kussen Gebruiksaanwijzing.)
2. Volg de OPTIONAL SETUP INSTRUCTIES, om uw opblaasinstelling op te slaan met behulp van Smart Check.
3. Volg de CONTROLE 'CHECK' INSTRUCTIES. Wanneer u op de knop Check drukt, zal de Smart Check u laten weten of u uw kussen moet aanpassen.



### BELANGRIJK!

- Voer de set-up uit (Smart Setup of Optional Setup) als u de Smart Check voor de eerste keer gebruikt.
- Voer Smart Setup of Optional Setup opnieuw uit als een van volgende veranderingen plaatsvinden: 1) een ander persoon gebruikt Smart Check; 2) er wordt een andere stoel of kussen gebruikt; of 3) de persoon ervaart fysiologische veranderingen (bijvoorbeeld gewichtsverlies of gewichtstoename). Voordat u een nieuwe set-up uitvoert, moet u uw Smart Check-instellingen wissen, zie HARD RESET INSTRUCTIES.
- Controleer het kussen regelmatig, ten minste een keer per dag!



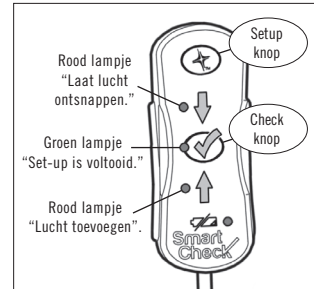
## Smart Setup instructies

Smart Check zal de juiste kusseninstelling vinden en opslaan, op uw kussen, in uw stoel. **OPMERKING.** De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het lichaamstype.




- Voer de volgende stappen uit in de gebruikelijke omstandigheden.
- Het kussen **MOET** hard zijn opgepompt om Smart Setup te starten. Dit kan tijdelijk instabiel aanvoelen; zo ja, ga dan verder met de nodige voorzichtigheid.
- Het individu **MOET** gaan zitten op het kussen in de stoel voordat Smart Check wordt gestart.

### Symbolen en lampjes voor Smart Setup





1. Plaats het kussen in de stoel. Plaats het mondstuk van de pomp over het ventiel.

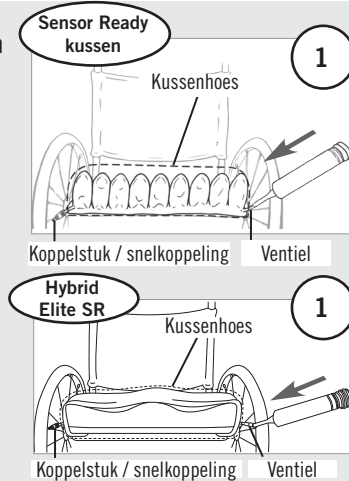
*Als er een kussenhoes wordt gebruikt, plaatst u de hoes om het kussen voor het opblazen.*



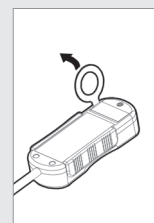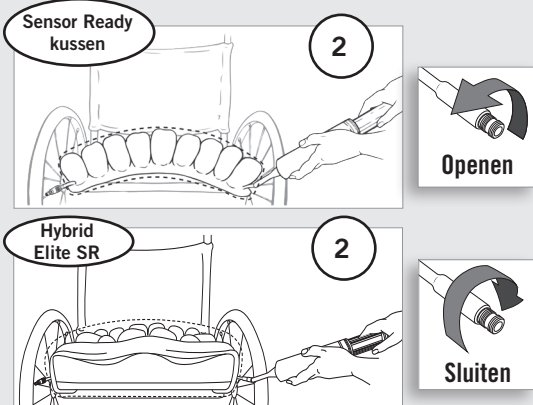2. Open het ventiel. Blaas het kussen op totdat het opbolt.  
Sluit het ventiel. Verwijder de pomp.



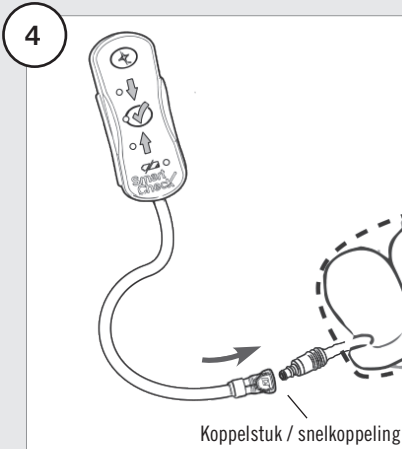
3. Zit in de stoel, in uw gebruikelijke positie.  
Verwijder het label (*alleen bij het eerste gebruik*).



4. Zorg ervoor dat het ventiel is gesloten. Bevestig de Smart Check aan het kussen. U zult een "klik" horen wanneer de aansluiting goed vast zit.


## Smart Setup instructies, vervolg

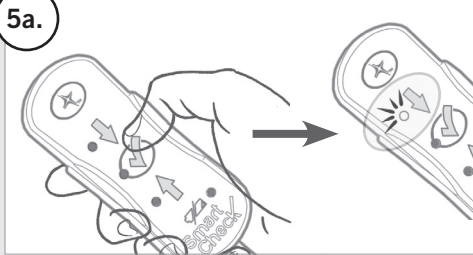5a.




**5a.** Druk op de Check ✓ knop. Wanneer u de rode pijl naar beneden ↓ ziet, ga dan naar stap 5b.

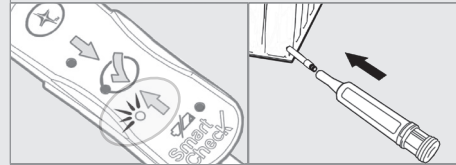**OPMERKING:** Als u de rode pijl omhoog ↑ ziet wanneer u op de knop Check drukt: 1) Zorg ervoor dat het koppelstuk/snelkoppeling goed is aangesloten, en 2) Open het ventiel, voeg meer lucht toe, sluit het ventiel, en druk nogmaals op de knop Check ✓. *Herhaal dit totdat u de rode pijl naar beneden ziet.*





5b.

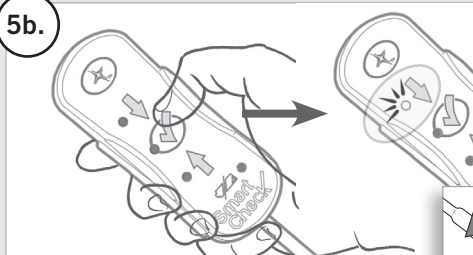

**5b.** Druk kort (niet ingedrukt houden) op de knop Setup. De rode pijl naar beneden ↓ **knippert** nu. Open het ventiel, laat lucht ontsnappen (ongeveer 30 tot 60 seconden)\*, en wacht tot groene lampje knippert.

Als de rode pijl naar beneden ↓ stopt met knipperen voordat u het ventiel geopend hebt, ga terug naar 5a.

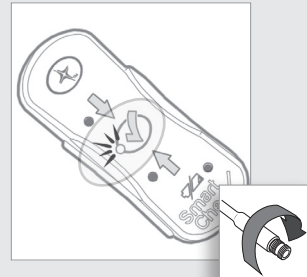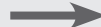**\*Om een nauwkeurige meting te waarborgen:** Blijf stil zitten en voorkom dat de luchtstroom wordt beperkt, terwijl u lucht uit het kussen laat.



Als het lampje groen knippert, sluit het ventiel. Het groene lampje betekent dat de set-up is voltooid.

**Uw kussen is nu ingesteld.**  
(Volgende: zie **CONTROLE 'CHECK' INSTRUCTIES**)



**Bewaar de Smart Check op een veilige en goed bereikbare locatie. Raadpleeg de instructies ONTKOPPELEN EN OPSLAG.**

## Controle 'Check' instructies

Voer een controle uit na het voltooien van de set-up (Smart Setup of Optional Setup).

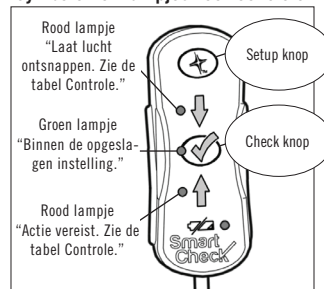
### Een controle uitvoeren:

1. Neem een normale zithouding aan.
2. Druk op de knop Check.
3. Raadpleeg onderstaande tabel.



- Controleer regelmatig, ten minste een keer per dag!
- Als er tijdens het instellen van het kussen een hoes werd gebruikt, moet hoes kan tijdens de controle worden gebruikt.
- Voer een controle uit als er een significante verandering in de hoogte is.

### Symbolen en lampjes voor controle



## De tabel Controle

**OPMERKING.** Na het uitvoeren van een controle kunt u een hand check uitvoeren om vertrouwd te raken met uw vullingsbereik. Zie de **HAND CHECK UITLEG / GIDS**.

**OPMERKING.** U mag een beetje lucht toevoegen of verwijderen en nog steeds binnen de instelling van uw kussen zijn. Smart Check slaat de instelling van uw kussen op, met enige ruimte voor aanpassing.

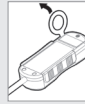
Lampje	Status	Actie
	Het kussen is binnen de opgeslagen instelling.	Er is geen verdere actie vereist.
Lampje	Mogelijke oorzaken	Actie
	Uw gewicht is misschien ongelijk verdeeld.	Verdeel uw gewicht om de lucht in het kussen te laten circuleren, druk op de knop Check om een nieuwe waarde te krijgen.
	De Smart Sensor is niet goed bevestigd aan het kussen.	Zorg ervoor dat de (snel) koppeling goed is, druk dan op de knop Check om een nieuwe waarde te krijgen. Raadpleeg PROBLEEMOPLOSSING in deze handleiding.
	Het kussen heeft meer lucht nodig.	Open het ventiel en voeg meer lucht aan het kussen toe (6 tot 10 keer pompen). Sluit het ventiel. Druk op de knop Check om een nieuwe waarde te krijgen. Herhaal indien nodig. <b>Als u niet in staat bent om zelf aanpassingen te maken, maak dan geen gebruik meer van het kussen totdat er hulp beschikbaar is.</b>
	Het kussen of het koppelstuk van het kussen loopt langzaam leeg.	Raadpleeg PROBLEEMOPLOSSING in de <i>ROHO® 1-kamer kussen (Single Compartment Cushion) met Sensor Ready® Technology Handleiding</i> , <i>ROHO® Hybrid Elite® kussen Gebruiksaanwijzing</i> of neem contact op met uw dealer.
Lampje	Oorzaak	Actie
	Het kussen bevat te veel lucht.	Open het ventiel en laat de lucht uit het kussen ontsnappen tot het groene lampje begint te branden. Sluit het ventiel. <b>Als u niet in staat bent om deze stap uit te voeren zijn, zoek dan hulp.</b>

## Optional Setup instructies


Optional Setup is een alternatief voor Smart Setup die uw voorkeur van vulling van het kussen registreert. Zie **OVERZICHT** voor meer informatie.

### Deel één: Uw kussen aanpassen zonder Smart Check

1. Voer een hard reset uit. Zie **HARD RESET INSTRUCTIES**.
2. Blaas het kussen op en plaats het in de stoel. Ga op het kussen zitten, in uw gebruikelijke houding. Pas het kussen aan door de instructies te volgen in de **ROHO® 1-kamer kussen (Single Compartment Cushion) met Sensor Ready® Technology Handleiding** of **ROHO® Hybrid Elite® kussen Gebruiksaanwijzing**.
3. Controleer met de hand de inzinking en omhulling. (Raadpleeg **HAND CHECK UITLEG / GIDS** in deze handleiding.)






### Symbolen en lampjes voor Optional Setup

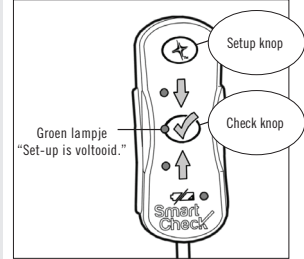

### Deel twee: Sla uw instellingen op met Smart Check



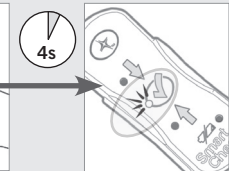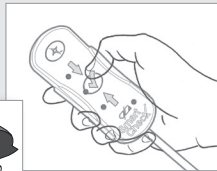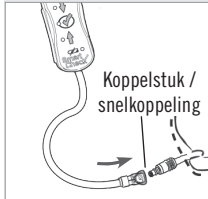- Het wordt aanbevolen om een gekwalificeerde specialist te raadplegen om uw voorkeurstellingen op te slaan met behulp van de Optionele Setup.
- Voer de volgende stappen uit in de gebruikelijke omstandigheden.



4. Zorg ervoor dat de Smart Check op uw kussen is aangesloten. U zult een "klik" horen wanneer de koppeling goed vast zit.
5. Zorg ervoor dat het ventiel is gesloten. Druk op de knop ✓ Check om de Smart Check te activeren. U ziet een rode ↑ of ↓. Voeg geen lucht toe en laat geen lucht ontsnappen.
6. Houd de knop Setup vier (4) seconden ingedrukt totdat een groen lampje gaat branden. Het groene licht betekent dat de vulling van uw kussen volgens uw voorkeur is opgeslagen. Het groene licht **DUIDT NIET** op een juiste instelling van het kussen. Zie **OVERZICHT** voor bijzonderheden.



Bewaar de Smart Check op een veilige en goed bereikbare locatie. Raadpleeg de instructies **ONTKOPPELEN EN OPSLAG**.


**Uw kussen is nu ingesteld.**  
(Volgende: zie **CONTROLE 'CHECK' INSTRUCTIES**)

## Hand Check uitleg / gids

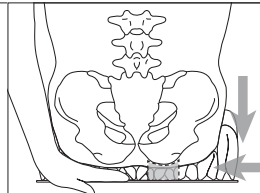
Gebruik deze uitleg om uw kussen aan te passen tijdens de **Optional Setup**. Een controle met de hand wordt ook aanbevolen na het uitvoeren van een **Smart Setup** zodat u een referentiepunt hebt als u uw kussen zonder **Smart Check** moet aanpassen (bijvoorbeeld als u de **Smart Check** even niet kunt vinden).



**Voordat u een handcontrole uitvoert, zie BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEINFORMATIE en lees de waarschuwing over het gebruik van een te zacht of te hard opgeblazen kussen.**



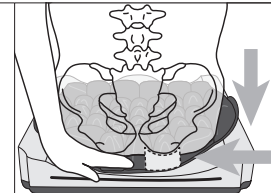Zorg ervoor dat er ten minste ½ in. (1,5 cm) luchtondersteuning is voor botuitsteeksels van de gebruiker.




1. Plaats uw hand tussen uzelf en het kussen. Zoek naar het laagste botuitsteeksel. U moet in staat zijn om uw vingers een beetje te bewegen.
2. Als het kussen te veel of te weinig lucht bevat, pas het dan aan en raadpleeg **CONTROLE 'CHECK' INSTRUCTIES** en **OVERZICHT**.

## Hard Reset instructies

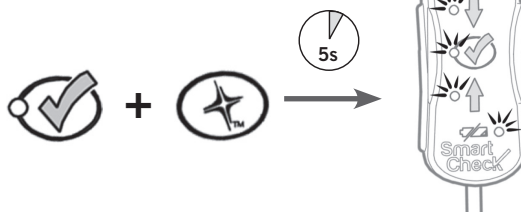Voordat u een nieuwe set-up wilt uitvoeren, moet u de instellingen op Smart Check wissen door een hard reset uit te voeren. **OPMERKING:** Smart Check mag tijdens een hard reset zijn aangesloten of ontkoppeld.


1. Zorg dat er geen lampjes branden of knipperen.
2. Houd de Check knop EN de Setup knop gedurende vijf (5) seconden ingedrukt. Elk lampje zal één keer knipperen, wat aangeeft dat uw eerdere instellingen zijn verwijderd.
3. Na een harde reset alle installatie-instructies aangegeven in deze gebruikershandleiding uitvoeren.



## Ontkoppelen en opslag

**De Smart Check ontkoppelen van het kussen:** Druk op de grijze vergrendeling, vervolgens trekt u voorzichtig de slang van het koppelstuk.

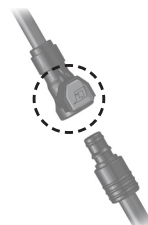**Smart Check opruimen:** U mag Smart Check losmaken en opslaan op een veilige, toegankelijke plaats als u deze niet gebruikt (bijvoorbeeld, in de opberghoes die werd meegeleverd.)



**Controleer of de Smart Check of het koppelstuk niet uw lichaam raakt.**

Probleemoplossing	
Probleem	Actie
Er gaan geen lampjes op de Smart Check branden als u op de knop Check drukt.	Zorg ervoor dat het lipje is verwijderd uit het batterijcompartiment. Controleer het type batterij en de plaatsing. Vervang de batterijen indien nodig. Neem contact op met uw dealer als het probleem zich blijft voortdoen.
Smart Setup: Nadat u op de knop Check hebt gedrukt, blijft het rode ↑ lampje “lucht toevoegen” branden, maar het kussen is te veel opgeblazen en de snelkoppeling zit goed vast.	Controleer de O-ring van de snelkoppeling van het kussen op slijtage of beschadiging. Als deze is beschadigd, neemt u contact op met uw dealer.  Inspecteer het kussen op een kleine lek. Raadpleeg PROBLEEMOPLOSSING in de <i>ROHO® 1-kamer kussen (Single Compartment Cushion) met Sensor Ready® Technology Handleiding of ROHO® Hybrid Elite® kussen Gebruiksaanwijzing</i> .
Optional Setup: Er gaat geen groen lampje branden nadat u de knop Setup gedurende vier (4) seconden ingedrukt houdt.	Herhaal deel 2 van de OPTIONAL SETUP INSTRUCTIES. Als het groene lampje nog steeds niet gaat branden, dan is het mogelijk dat Optional Setup niet compatibel is met uw lichamelijke behoeften of voorkeuren. Raadpleeg OVERZICHT EN SMART SETUP INSTRUCTIES, of neem contact op met uw arts of uw dealer.
U hebt hulp nodig bij het gebruik of onderhoud van Smart Check of er zijn onverwachte problemen opgetreden	Neem contact op met uw dealer.

## Beperkte garantie

**Beperkte Garantie Termijn:** 24 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Bekijk ook de garantievoorwaarden van die bij uw product geleverd zijn of neem contact op met de klantenservice.

## Reinigen en desinfecteren



- Reinigen en desinfecteren zijn twee afzonderlijke processen. Eerst reinigen, dan ontsmetten.
- Bij gebruik door dezelfde persoon, moet er zo vaak als nodig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Voordat u het product door iemand anders laat gebruiken, moet u het product reinigen, desinfecteren en de goede werking controleren.



- Houd u aan de veiligheidsvoorschriften die op de verpakking van het reiniging- en desinfectiemiddel worden vermeld.
- Smart Check mag niet worden gereinigd met aceton, MEK, tolueen of lijmverwijderaars.
- Dompel Smart Check NIET onder in vloeistof.

**Reinigen:** Veeg Smart Check schoon met een zachte zeep en een schone, zachte doek of spons. In de lucht laten drogen.



**Desinfecteren:** Veeg Smart Check schoon met een desinfecterend doekje, bleekmiddelvrij. In de lucht laten drogen.



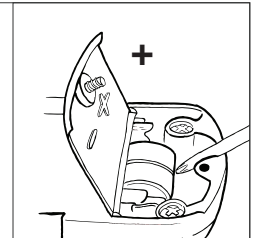
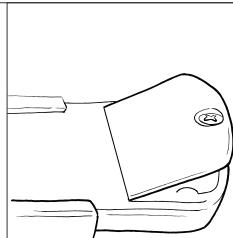
**Sterilisatie:** Smart Check wordt niet in een steriele omgeving verpakt noch is deze bedoeld of is het vereist om deze voor gebruik te steriliseren. Hoge temperaturen verhogen het verouderen en kunnen schade veroorzaken aan het product.

## Batterij vervangen

Het lampje Batterij bijna leeg laat u weten dat de batterijen moeten worden vervangen.



- Smart Check zal uw opgeslagen instellingen onthouden na het vervangen van de batterij.
- Om de levensduur van de batterijen te sparen, gaat Smart Check automatisch naar de "slaapstand" als deze niet wordt gebruikt.
- De verwachte levensduur van de batterij bedraagt één (1) jaar.



1. Maak de Smart Check van het kussen los met behulp van het koppelstuk.
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier met een niet-geleidend handvat om de schroef los te maken en de batterijdeur te openen.
3. Gebruik de schroevendraaier om de batterij los te maken.
4. Let op de "+" en plaats twee (2) nieuwe 1,5 volt alkaline knoopcelbatterijen (LR44, A76, AG13 of gelijkwaardig).
5. Sluit de batterijdeur.
6. Draai de schroef vast. **OPMERKING:** Als de schroef niet volledig wordt aangedraaid, kan de batterij worden blootgesteld aan vocht, wat leidt tot schade aan het product.



**HOUD BATTERIJEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN EN PERSONEN DIE DE NEIGING HEBBEN OM ONEETBAAR VOORWERPEN IN HUN MOND TE STEKEN.** Het inslikken van batterijen kan ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg hebben. Zoek ONMIDDELIJK medische hulp.



## Verwijderen

Verwijder het product en/of zijn onderdelen in navolging met de wetten van kracht in uw rechtsgebied (inclusief de wetten inzake verwijdering van elektronisch afval). **NIET VERBRANDEN.**





# permobil

ROHO SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

[permobilus.com](http://permobilus.com)



**Intertek**



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



**Intertek**

The products featured in this document were  
manufactured under a Quality Management System  
that is certified to ISO 13485:2016.