

Smart Check[®]

by ROHO[®]

Operation Manual



Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y[®]

Smart Check® by ROHO®

Gebrauchsanleitung

Händler: Diese Gebrauchsanleitung muss dem Benutzer dieses Produktes ausgehändigt werden

Benutzer: (Patient oder Pflegeperson) Bitte vor Ingebrauchnahme des Produkts diese Anleitung durchlesen und gut aufbewahren.

Inhaltsverzeichnis

Verwendungszweck	38-39
Wichtige Sicherheitsinformationen	
Legende	40
Produktspezifikationen	41
Lieferungsumfang	
Überblick	42
Smart Setup Anleitung	43-44
Kontroll-Anleitung	45
Optional Setup Anleitung	46
Hand Check Anleitung	
Anleitungen Neustart (Hard Reset)	47
Entfernen und Lagern	
Problembehebung	
Eingeschränkte Garantie	
Reinigung und Desinfektion	48
Batteriewechsel	
Entsorgung	



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429 U.S.A.

USA.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449 • Kundendienst: orders.roho@permobil.com

Außerhalb der USA: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518 • intlorders.roho@permobil.com
permobilus.com

ROHO-Produkte können durch mehrere US- und ausländische Patente und Handelsmarken geschützt sein, darunter ROHO®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, Sensor Ready®, shape fitting technology®, Smart Check® by ROHO®, und Smart Check®.

ROHO, Inc. arbeitet stets an der Verbesserung ihrer Produkte und behält sich das Recht vor, dieses Dokument jederzeit zu ändern. Die aktuelle Version dieses Dokuments steht auf der Website permobilus.com zur Verfügung.


© 2015, 2018 ROHO, Inc.

Rev: 04/06/2018

Verwendungszweck

Smart Check® by ROHO® (Smart Check) ist eine Kissen Feedback System, dass dazu bestimmt ist den Benutzer durch Speichern des im Set up Prozess erreichten Inflationskorridors zu unterstützen. In den darauf folgenden Überprüfungen des Inflationskorridors ist es dann Aufgabe des Smart Checks, anzuzeigen, ob Anpassungen des Kissens notwendig sind.

Smart Check muss mit einem ROHO® Single Compartment Cushion with Sensor Ready® Technology (Sensor Ready Cushion) verbunden werden oder ROHO® Hybrid Elite SR™ Kissen (Hybrid Elite SR).

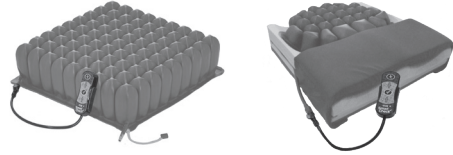

! Wichtige Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt einsetzen.
- ROHO Medizin-Produkte sind als Teil einer komplexen Betreuung gedacht. Ein Arzt sollte entsprechende Produktempfehlungen daher auf Grundlage der Einschätzung des Bedarfs jeder Einzelperson an medizinischer und therapeutischer Betreuung sowie dem insgesamten Krankheitsbild machen. Ein Arzt sollte zudem beurteilen, ob Probleme beim Sehen oder Lesen bzw. kognitive Probleme bestehen, um bestimmen zu können, ob die Pflegeperson Hilfe bei der Produktverwendung benötigt, unter anderem durch Bereitstellung einer Gebrauchsanleitung in großer Druckschrift. Verwendung dieses Produktes hebt nicht die Notwendigkeit für regelmässige Inspektionen des Kissens auf, noch kann sie die normalen Aktivitäten zum Schutz von Haut und Weichgewebe ersetzen (z.B. Gewichtsverlagerungen, Druckentlastungen, allgemeine Hautpflege usw.).

Warnhinweise

- **Der Smart Check von ROHO wurde für die Verwendung mit ROHO Sensor Ready-Kissen entwickelt und Hybrid Elite SR. Die Verwendung eines anderen Kissens wirkt sich auf die Smart Check-Funktionen aus, reduziert oder beseitigt die Vorteile des Kissens und es erhöht die Gefahr für Haut und anderes Weichgewebe. Die Verwendung eines anderen Kissens kann zu Schäden am Smart Check führen und führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.**
- **Verwenden Sie KEIN ungenügend aufgeblasenes oder zu stark aufgeblasenes Kissen, weil dadurch die Wirkung des Produkts beeinträchtigt oder aufgehoben werden kann, was eine erhöhte Gefahr für Haut und andere Weichgewebe bedeuten kann. Wenn aus dem Kissen offensichtlich Luft entweicht oder Sie das Kissen nicht aufpumpen bzw. die Luft daraus ablassen können, siehe Abschnitt PROBLEMBEHEBUNG im Handbuch, das mit dem Kissen mitgeliefert wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren medizinischen Betreuer, Händler oder ROHO, Inc.**
- **Prüfen Sie die Befüllung regelmässig – mindestens aber einmal am Tag, sei es durch Einsatz des Smart Checks oder einen Hand-Check**
- **Führen Sie Smart Setup oder Optional Setup nochmals durch, wenn folgende Veränderungen eintreten: 1) eine andere Person benutzt den Smart Check; 2) ein anderes Kissen oder ein anderer Rollstuhl wird benutzt; 3) es finden körperliche Veränderungen des Benutzers statt, z.B Gewichtsverlust oder -zunahme. Bevor Sie einen neuen Set up durchführen, müssen Sie die Einstellungen zurücksetzen. Siehe ANLEITUNGEN NEUSTART (HARD RESET).**
- **HALTEN SIE DIE BATTERIEN FERN VON KINDERN UND PERSON, DIE DIE NEIGUNG HABEN, NICHT ESSBARE GEGENSTÄNDE IN DEN MUND ZU NEHME. Schlucken oder Einatmen kann zu gravierenden Verletzungen oder Tod führen. Suchen Sie SOFORT einen Arzt auf.**
- **VORSICHT im Beisein von Kindern. Es besteht die Gefahr des Strangulierens. Bei Nichtgebrauch Smart Check entfernen und an einem sicheren Ort aufbewahren.**

Wichtige Sicherheitsinformationen, Fortsetzung

Warnhinweise, Fortsetzung

- Der Einsatz fremden Zubehörs kann Risiken bergen und zum Erlöschen der Garantie.
- Führen Sie KEINE Veränderungen an Smart Check oder seinen Bestandteilen vor. Dies kann sonst zu Schäden am Produkt führen und zur Erlöschung der Garantie.
- NICHT zu benutzen in Gegenwart entflammbarer Betäubungsmittel und/oder in sauerstoffreichen Umgebungen. Dies erhöht das Risiko von Feuer oder Explosion.
- Fühlt sich das Kissen während des Smart Set instabil an, nehmen Sie einen Neustart (Hard Reset) und wiederholen Sie den Smart Set Vorgang. Sollten Sie weiterhin instabil sitzen, führen Sie einen Optimal Setup durch und fragen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten.
- Die Kissenmaße MÜSSEN zum Körpermaß des Benutzer passen. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte Smart Check während des Setups nicht den richtige Füllvolumenkorridor finden. Dies führt zu Reduzierung oder Wegfall der Vorteile des Kissens und erhöht das Risiko für Haut und Weichteile.
- Alle in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Aspekte des Gebrauchs von Smart Check können vom Benutzer oder seinem pflegerischen Umfeld durchgeführt werden. Sollten Sie NICHT in der Lage sein dies durchzuführen, fordern Sie Unterstützung an.
- **VERBRENNUNGSGEFAHR:** Wenn die Umgebungstemperatur 47 Grad Celsius übersteigt, bleiben Sie NICHT mehr als 10 Minuten in Kontakt mit der Produktoberfläche.
- Smart Check MUSS ausschließlich mit dem kompatiblen ROHO Kissenbezug benutzt werden. Nutzung eines anderen Bezuges kann die Genauigkeit des Smart Check negativ beeinflussen.
- Führen Sie keine Wartungsarbeiten am Smart Check durch, solange dieser im Einsatz ist. Dies kann zu Falschmeldungen führen.
- Stellen Sie Ihr Kissen unter normalen Umweltbedingungen ein. Führen Sie eine Kontrolle durch, wenn sich ihre Umwelteinflüsse, z.B. Temperatur, oder Höhe stark verändert haben.


Vorsichtsmaßnahmen

- Täglich: Untersuchen Sie die Smart Check Schnellkupplung, die Schläuche, und die äussere Hülle auf Bruchstellen oder andere Beschädigungen. Stellen Sie sicher, daß alle Bestandteile korrekt miteinander verbunden sind. Verwenden Sie Smart Check NICHT WEITER, wenn Bestandteile beschädigt sind oder nicht korrekt verbunden werden können. ROHO, Inc. empfiehlt regelmäßige Überprüfungen durch einen qualifizierten Techniker.
- Tauchen Sie den Smart Check NICHT in Flüssigkeiten ein oder unter, da dies zur Beschädigung führen kann.
- Schützen Sie Smart Check vor Stößen und Schlägen, da dies zu Schäden oder Brüchen führen kann.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen durch große Hitze, offenem Feuer oder heißer Asche aus.
- Benutzen Sie weder das Ventil des Kissens, Schnellkupplung noch jegliche Bestandteile des Smart Checks als Tragegriff oder zum Ziehen des Kissens.
- Längere Ozonbelastung kann das bei der Herstellung des Produkts verwendete Material zersetzen und damit die Leistung des Produkts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Länger andauernde Einwirkung von UV-Licht kann die Produktkennzeichnung verblassen lassen.

Legende

Warnung		Temperaturbegrenzung	
Gebrauchsanweisung konsultieren.		Feuchtigkeitsbegrenzung (relative, nicht kondensierend)	
Herstellungsort		Einschränkung atmosphärischer Druck	
Trocken lagern.		Verschluckungsgefahr	
Per Hand abwischen.		Nicht im Hausmüll entsorgen.	 
An der Luft trocknen.		Anwenderidentifikation	
Keine Bleiche verwenden.		IEC 60601-1: Anwendungsteil Typ BF	
Niedriger Batteriestand: gelbes Licht			

Produktspezifikationen

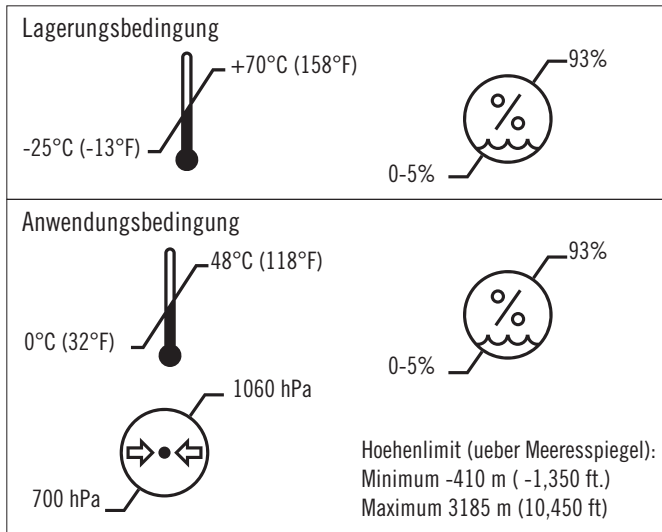

- Smart Check: Polycarbonat mit Polyester Frontseite
- Etui zur Aufbewahrung: Polystyrol
- Schlauch: Polyurethan
- Schnellkupplung: Acetal
- Dieses Produkt erfüllt die RoHS2-Richtlinien.
- Smart Check ist ein Anwendungsteil Typ BF. Smart Check ist getestet und erfüllt die Richtlinien nach IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, and IEC 60601-1-11; zertifiziert nach CAN/CSA Standard C22.2 No. 60601-1. Elektrotechnische Interferenzen werden nicht durch Smart Check verursacht und stören Smart Check nicht.
- Erwartete Lebensdauer: 5 Jahre
- Batterien: Betriebsdauer ca. 1 Jahr bei Alkaline Batterien
- Smart Check ist ein IP54-bewertetes Device (vor Staub und Spritzwasser geschützt).

Lieferungsumfang

Inhalt: Smart Check® by ROHO®, Smart Check Gebrauchsanweisung, Registrierung, Aufbewahrungsbehälter

Produkt-Registrierung: Senden Sie die beigefügte Produktregistrierung oder registrieren Sie ihr Produkt unter ROHO.com.



Für Informationen bezüglich Ihres Kissens, lesen Sie bitte die *ROHO®-Einkammerkissen mit Sensor Ready®-Technologie Gebrauchsanleitung* oder *ROHO® Hybrid Elite® Kissen Bedienungsanleitung*.



Gebrauchsanweisung



Registrierungskarte



Smart Check Frontseite:

Erklärungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Schlauch

Schnellkupplung



Aufbewahrungsbox

Übersicht

Auf dieser Seite finden Sie Anleitungen, um mit dem SC das Füllvolumen Ihres Kissens zu bestimmen, abzuspeichern, und zu kontrollieren.


Bitte lesen Sie dies, bevor Sie Smart Check benutzen.

“Smart Setup” und Kontrolle:

1. Befolgen Sie die SMART SETUP ANLEITUNG. Smart Check wird Ihre Füllmenge des Kissens finden und abspeichern.
2. Befolgen Sie die KONTROLL-ANLEITUNGEN. Wenn Sie den Check-Knopf drücken, wird Smart Check Ihnen mitteilen, ob Sie das Füllvolumen des Kissens anpassen müssen.

Richtige Einstellung der Füllmenge des Kissens

A) Einsinken in des Kissens und **B)** Schweben über dem Kissensboden.

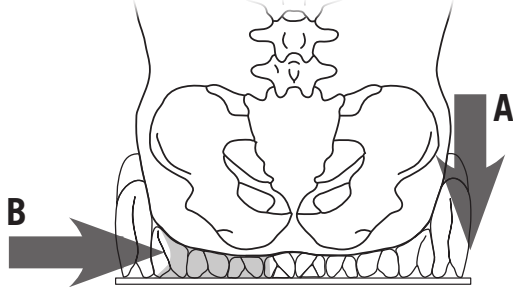

“Optional Setup” ist eine Alternative zum “Smart Setup”.

“Optional Setup” könnte in den folgenden Situationen bevorzugt werden:

- Einsinktiefe und Ummantelung sind durch Arzt oder Therapeut für Sie spezifisch vorgegeben worden.
- Erhebliche Asymmetrien oder andere prioritäre Positionierungsbedürfnisse.
- Das Kissen wird auf einem gepolsterten Untergrund verwendet z.B. Recaro Sitz.



Warnhinweise:

- Es wird empfohlen, sich an einen qualifizierten Experten mit Erfahrung in Sitzen und Positionieren zu wenden, wenn Sie mithilfe des “Optional Setups” ein individuell bevorzugtes Füllvolumen des Kissens speichern möchten.
- Dieses Optionale Set up ist nicht geeignet für Benutzer unter 40 kg Körpergewicht.

“Optional Setup” (und Kontrolle)

1. Stellen Sie das ROHO Kissen ohne Smart Check auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein. (Siehe die *ROHO®-Einkammerkissen mit Sensor Ready®-Technologie Gebrauchsanleitung* oder *ROHO® Hybrid Elite® Kissen Bedienungsanleitung*.)
2. Befolgen Sie die OPTIONAL SETUP ANLEITUNG, um mit dem Smart Check Ihr Individuelles Füllvolumen abzuspeichern.
3. Befolgen Sie die KONTROLL-ANLEITUNG. Drücken Sie den Check Knopf, Smart Check wird Ihnen mitteilen, ob das Füllvolumen des Kissens angepasst werden muss.



Wichtig!

- Einstellung (entweder Smart Setup oder Optional Setup) muss bei erstmaligem Einsatz durchgeführt werden.
- Führen Sie Smart Setup oder Optional Setup nochmals durch, wenn folgende Veränderungen eintreten: 1) eine andere Person benutzt den Smart Check; 2) ein anderes Kissen oder ein anderer Rollstuhl wird benutzt; 3) es finden körperliche Veränderungen des Benutzers statt, z.B. Gewichtsverlust oder -zunahme. Bevor Sie einen neuen Set up durchführen, müssen Sie die Einstellungen zurücksetzen. Siehe ANLEITUNGEN NEUSTART (HARD RESET).
- Aktivieren Sie die Kontrollfunktion des Smart Checks regelmäßig, mindestens einmal pro Tag!


Smart Setup Anleitung

Smart Check findet und speichert den Inflationskorridor für ihr Kissen in ihrem Rollstuhl. **Hinweis:** Endergebnisse können je nach Körpertyp variieren.





- Führen Sie die folgenden Schritte unter normalen Umweltbedingungen durch.
- Das Kissen MUSS prall aufgepumpt sein, um den Smart Setup zu starten. Das überfüllte Kissen kann sich anfangs instabil anfühlen. Vorsicht ist geboten.
- Der Benutzer MUSS mit Beginn der Anpassung auf dem Kissen sitzen.

Symbole und Kontrolllichter Smart Setup



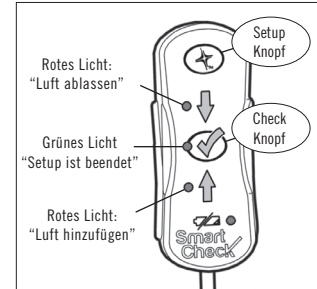


1. Legen Sie das Kissen in den Rollstuhl. Setzen Sie die Pumpe auf das Ventil auf.


Sollten Sie den Kissenbezug nutzen, ziehen Sie diesen vorher über das Kissen.

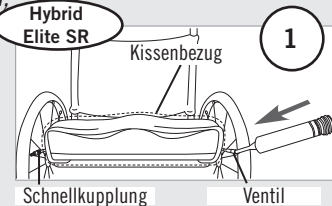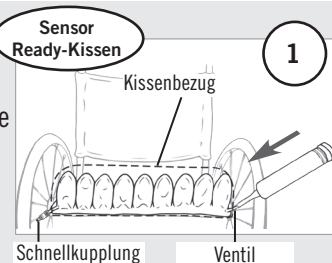

2. Öffnen Sie das Ventil. Pumpen Sie das Kissen auf, bis es sich wölbt. Schliessen Sie das Ventil und entfernen Sie die Pumpe.

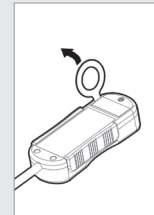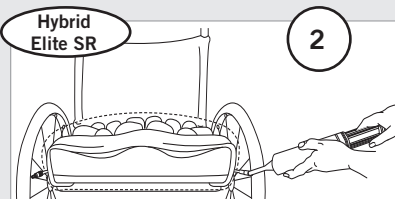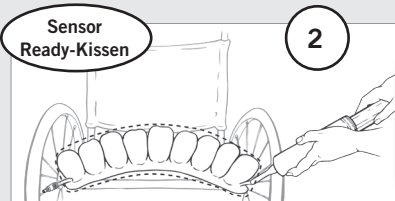


3. Setzen Sie sich auf das Kissen. Nehmen Sie ihre normale Sitzposition ein. Bei Ersteinsatz entfernen Sie die Schutzlasche vom Smart Check Batteriefach.

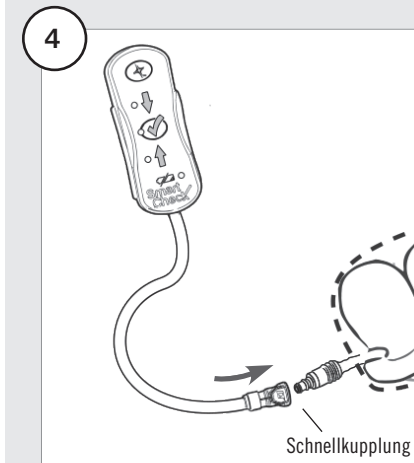

4. Vergewissern Sie sich, dass das Ventil verschlossen ist. Verbinden Sie den Smart Check mit dem Kissen. Sie hören ein „Klick“, wenn der Smart Check korrekt verbunden ist.


Smart Setup Anleitung, Fortsetzung

5a.

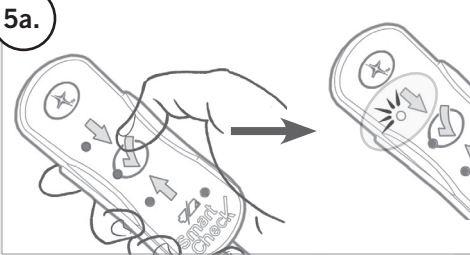


5a. Drücken Sie den Check ✓ Knopf.
Wenn der rote Nachuntenpfeil ↓ aufleuchtet,
schreiten Sie zu Schritt 5b fort.

Hinweise: Sollte der rote Nachobenpfeil ↑ aufleuchten, überprüfen sie bitte 1) dass der Smart Check korrekt mit dem Kissen verbunden ist, 2) öffnen Sie das Ventil, fügen Sie Luft hinzu, schließen Sie das Ventil, und überprüfen Sie die Befüllung durch drücken des Check ✓ Knopfes. *Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der rote Nachuntenpfeil aufleuchtet.*

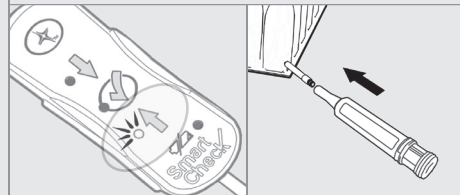

5b.

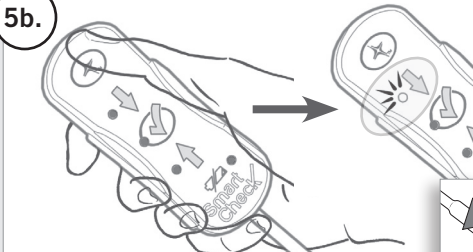

5b. Drücken Sie den Setup Knopf (nicht festhalten).
Der rote Nachuntenpfeil ↓ **blinkt** jetzt.
Öffnen Sie das Ventil, lassen Sie Luft ab (ca 30-60 Sekunden*)
und warten Sie auf ein Blinken des grünen Lichts.

Sollte der rote Runterpfeil ↓ vor Öffnen des Ventils aufhören zu blinken, gehen Sie zurück zu Schritt 5a.

***Zur Sicherstellung einer korrekten Einstellung:** Bleiben Sie still sitzen und vermeiden Sie die Behinderung der Luftzirkulation im Kissen.



Wenn das grüne Licht blinkt,
schließen Sie das Ventil. Das grüne Licht bedeutet, daß der Setup abgeschlossen ist.

Ihr Kissen ist jetzt eingestellt.
(Weiter zu KONTROLL-ANLEITUNG.)



Bewahren Sie Smart Check an einem sicheren und zugänglichen Ort auf (Siehe ENTFERNEN UND LAGERN.)

Kontrollanleitung

Nach Abschluss der Einstellung führen Sie eine Kontrolle durch.


Kontrolle durchführen:

1. Setzen Sie sich in Ihre normale Sitzposition.
2. Drücken Sie den Kontroll-Knopf.
3. Anzeigeninformation siehe Tabelle unten.



- Führen Sie regelmäßig die Kontrollfunktion durch, mindestens einmal täglich!
- Wurde ein Bezug während des Setups verwendet, muss dieser weiterhin verwendet werden.
- Bei erheblicher Änderung der Höhe über dem Meeresspiegel führen Sie eine Kontrolle durch (Check).

Symbole und Kontrolllichter Kontrolle

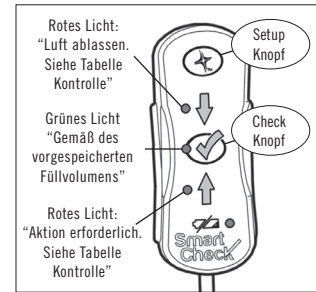


Kontrolle		
Beachte: Nachdem Sie eine Kontrolle mit dem Smart Check durchgeführt haben, sollten Sie zusätzlich einen HandCheck durchführen, um sich mit dem Füllvolumen Ihres Kissens vertraut zu machen. See HAND CHECK ANLEITUNG. Beachte: Wahrscheinlich können Sie etwas mehr oder weniger Luft im Kissen haben, und immer noch im korrekten Luftvolumenkorridor liegen. Smart Check speichert Ihr Kissen-Luftvolumen mit der Toleranz für Abweichung ab.		
Licht	Status	Aktion
	Das Kissen entspricht der Einstellung.	Keine Handlung notwendig.
Licht	Mögliche Ursachen	Aktion
	Ihr Körpergewicht könnte ungleichmässig verteilt sein.	Führen Sie eine Drückentlastung durch, um die Luftzirkulation im Kissen zu ermöglichen. Dann drücken Sie den Kontrollknopf erneut um das neue Messergebniss angezeigt zu bekommen.
	Die Schnellkupplung ist nicht korrekt am Kissen angebracht.	Stellen Sie sicher, dass die Schnellkupplung korrekt mit dem Kissen verbunden ist. Dann drücken Sie den Kontrollknopf erneut um das neue Messergebniss angezeigt zu bekommen. Siehe PROBLEMBEHEBUNG.
	Das Kissen braucht mehr Luft.	Öffnen Sie das Ventil und fügen Sie Luft hinzu(6 bis 10 mal pumpen). Schliessen Sie das Ventil. Drücken Sie den Kontroll-Knopf um das neue Messergebniss angezeigt zu bekommen. Bei Bedarf wiederholen Sie diesen Vorgang. Sollten Sie diese Anpassung nicht allein durchführen können,unterbrechen Sie den Vorgang und fordern Sie Unterstützung an.
	Das Kissen oder die Schnellkupplung am Kissen weist eine undichte Stelle auf.	Siehe PROBLEMBEHEBUNG in <i>ROHO®-Einkammerkissen mit Sensor Ready®-Technologie Gebrauchsanleitung, ROHO® Hybrid Elite® Kissen Bedienungsanleitung</i> oder kontaktieren Sie den Kundendienst.
Licht	Ursache	Aktion
	Das Kissen hat zu viel Luft.	Öffnen Sie das Ventil und lassen Sie Luft ab, bis das grüne Licht blinkt. Schliessen Sie das Ventil. Wenn Sie nicht in der Lage sind diesen Vorgang durchzuführen, fordern Sie Unterstützung an.

Optional Setup Anleitung


Der Optional Setup ist eine Alternative zum Smart Setup die Ihr bevorzugtes Füllvolumen. Siehe ÜBERSICHT für mehr Informationen.

Teil 1: Einstellung des Kissens ohne Smart Check

1. Führen Sie einen Neustart (Hard Reset) durch. Siehe ANLEITUNGEN NEUSTART (HARD RESET) **Beachte:** Bei Erstanwendung entfernen Sie die Plastikschutzlasche der Batterie.
2. Pumpen Sie das Kissen auf und legen es auf den Stuhl. Sitzen Sie sich in Ihrer normalen Sitzposition auf das Kissen. Stellen Sie das Kissen entsprechend der Gebrauchsanweisung **ROHO®-Einkammerkissen mit Sensor Ready®-Technologie Gebrauchsanleitung** ein oder **ROHO® Hybrid Elite® Kissen Bedienungsanleitung**.
3. Führen Sie den Hand Check durch, um sicherzustellen, dass Ummantelung und Immersion korrekt sind. (Siehe HAND CHECK ANLEITUNG in dieser Bedienungsanleitung.)

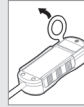

Symbole und Kontrolllichter Optional Setup

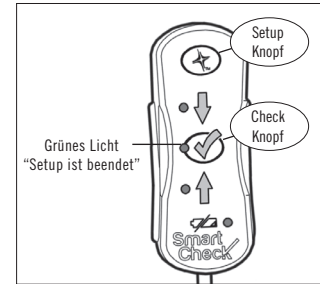

Teil 2: Speichern Sie Ihre Einstellung mit Smart Check



- Es wird empfohlen, sich an einen qualifizierten Experten mit Erfahrung in Sitzen und Positionieren zu wenden, wenn Sie mithilfe des "Optional Setups" ein individuell bevorzugtes Füllvolumen des Kissens speichern möchten.
- Führen Sie die folgenden Schritte in Ihrer normalen Umgebung durch.



4. Verbinden Sie den Smart Check mit dem Kissen. Sie hören ein „klick“ wenn der Smart Check korrekt verbunden ist.



5. Vergewissern Sie sich, dass das Ventil verschlossen ist. Drücken Sie den Kontroll ✓ Knopf, um Smart Check zu aktivieren. Sie sehen entweder ein rotes ↑ oder ein rotes ↓ Licht. Ändern Sie **NICHT** das Füllvolumen.



6. Drücken und Halten Sie den Setup Knopf für vier Sekunden, bis das grüne Licht blinkt. Das grüne Licht bedeutet, dass Ihr bevorzugtes Füllvolumen gespeichert wurde. Das grüne Licht bedeutet **NICHT**, dass das Kissen über den richtigen Fülldruck verfügt. Siehe ÜBERSICHT für weitere Informationen.



Bewahren Sie Smart Check an einem sicheren und zugänglichen Ort auf (Siehe ENTFERNEN UND LAGERN.)


Ihr Kissen ist jetzt eingestellt.
(Weiter zu KONTROLL-ANLEITUNG.)

Hand Check Anleitung


Benutzen Sie diese Anleitung für den Optinal Setup. Der Hand Check ist nach dem abgeschlossenen Smart Setup empfohlen, damit Sie einen Referenzpunkt erhalten, wenn Sie Ihr Kissen ohne Smart Check einstellen müssen. (z.B. bei Verlust des Smart Checks)



Bevor Sie den Kissendruck per Hand überprüfen, lesen Sie die WICHTIGEN SICHERHEITSMITTEILUNGEN sowie die Warnhinweise in Bezug auf die Verwendung eines zu wenig bzw. zu stark aufgepumpten Kissens.

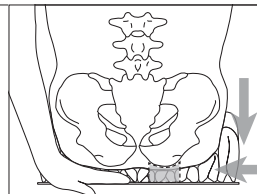

Sorgen Sie dafür, dass zwischen der Kissenunterseite und den Knochenvorsprüngen des Patienten mindestens 1,5 cm Abstand ist.

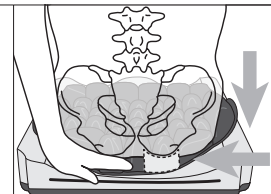


1. Führen Sie Ihre Hand zwischen Ihr Gesäß und das Kissen. Erstarben Sie die niedrigste knöchrige Prominenz. Sie sollten in der Lage sein, Ihre Finger leicht bewegen zu können.
2. Wenn das Kissen sich nach zu wenig oder zuviel Luft anfühlt, bessern Sie nach und sehen bei **KONTROLL-ANLEITUNG** und **ÜBERSICHT** nach.

Anleitungen Neustart (Hard Reset)

Bevor Sie einen neuen Setup durchführen, müssen Sie die Einstellung des Smart Check zurücksetzen, indem Sie den Neustart (Hard Reset) durchführen. **Beachte:** Für den Neustart (Hard Reset) können Sie den Smart Check angeschlossen lassen oder entfernen.

1. Stellen Sie sicher, daß keines der Lichter blinkt oder leuchtet.
2. Drücken und halten Sie gleichzeitig den Kontroll-Knopf und den Setup-Knopf für fünf Sekunden. Jedes einzelne Licht leuchtet einmal kurz auf, um anzuzeigen, daß die Einstellung zurückgesetzt wurde.
3. Nach dem Hard Reset (Hard Reset) folgen Sie den angegebenen Setup-Anweisungen in diesem Handbuch.

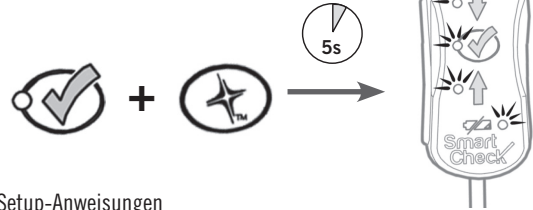


Entfernen und Lagern

Smart Check vom Kissen entfernen: Drücken Sie den grauen Schnappverschluss und trennen Sie die Schnellkupplung.

Aufbewahrung Smart Check: Lagern Sie das Smart Check an einem sicheren und erreichbaren Ort, am besten in der mitgelieferten Box.



Stellen Sie sich, daß Smart Check nicht gegen Ihren Körper drückt.

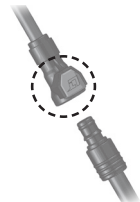

Problembehebung

Problem	Aktion
Kein Licht auf dem Display nachdem der Kontroll-Knopf (Check Knopf) gedrückt wurde.	Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitslasche der Batterie entfernt wurde. Prüfen Sie den Batterietyp und seine Ausrichtung. Ersetzen Sie, wenn nötig, die Batterien. Bei Anhalten des Problems, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
Smart Setup: Nachdem Sie den Kontroll-Knopf (Check Knopf) gedrückt haben, zeigt das Display immer noch das Licht neben dem roten Nachobenpfeil ↑, obwohl Sie das Kissen prall aufgepumpt haben und die Schnellkupplung sachgemäß befestigt ist.	Überprüfen Sie den Dichtungsring der Schnellkupplung des Kissens auf eventuelle Schäden. Sollte eine Beschädigung vorliegen, kontaktieren Sie den Kundendienst. Untersuchen Sie das Kissen auf undichte Stellen. Siehe PROBLEMBEHEBUNG: <i>ROHO®-Einkammerkissen mit Sensor Ready®-Technologie Gebrauchsanleitung</i> oder <i>ROHO® Hybrid Elite® Kissen Bedienungsanleitung</i> .
Optional Setup: Sie sehen kein grünes Licht nach Drücken und Halten des Setup Knopfs nach vier Sekunden.	Wiederholen Sie Teil 2 der OPTIONAL SETUP ANLEITUNG. Wenn noch immer kein grünes Licht zu sehen ist, ist zu vermuten, daß Optional Setup nicht mit Ihren körperlichen Bedürfnissen in Einklang zu bringen ist. Lesen Sie den ÜBERBLICK oder die SMART SETUP ANLEITUNGEN, oder kontaktieren Sie einen Experten oder unseren Kundendienst.
Sie benötigen Unterstützung mit dem Gebrauch oder der Wartung des Smart Check oder es treten unerwartete Probleme auf.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.

Beschränkte Garantie

Laufzeit beschränkte Garantie: 24 Monate ab Originalkaufdatum. Lesen Sie auch die Beilage „Eingeschränkte Garantie“, die dem Produkt beiliegt, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Reinigung und Desinfektion



- Reinigung und Desinfektion müssen separat erfolgen. Die Reinigung muss vor der Desinfektion erfolgen.
- Bei Benutzung durch die gleiche Person: Säubern und desinfizieren Sie das Produkt nach Bedarf. Vor der Verwendung durch eine andere Person: Reinigen, desinfizieren und prüfen Sie das Produkt auf einwandfreie Funktion.



- Zur Reinigung und Desinfektion folgen Sie den Sicherheitshinweisen des Produktlabels.
- Smart Check sollte nicht unter Verwendung von Aceton, MEK, Methylbenzol oder Lösungsmittel gereinigt werden.
- Smart Check NICHT in Flüssigkeit eintauchen.

Reinigung: Wischen Sie Smart Check mit einem milden Reinigungsmittel ab. Setzen Sie dazu eine weiches Tuch oder Schwamm ein. An der Luft trocknen.



Desinfektion: Wischen Sie Smart Check mit einem Bleichfreien Mittel Desinfektionswischtuch ab. An der Luft trocknen.




Sterilisation: Smart Check wurde nicht unter sterilen Bedingungen verpackt, auch ist es nicht beabsichtigt oder notwendig vor Einsatz zu sterilisieren. Hohe Temperaturen beschleunigen das Altern und können das Produkt beschädigen.

Batteriewechsel

Aufleuchten der Batteriekontrollleuchte bedeutet dass die Batterie gewechselt werden muss.



- Smart Check sichert die Voreinstellung bei Batteriewechsel
- Um Energie zu sparen geht Smart Check automatisch in den Stand By Modus bei Nichtgebrauch
- Betriebsdauer ca. 1 Jahr bei Alkaline Batterien.

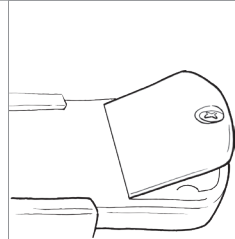

1. Entkoppeln Sie Smart Check mit der Schnellkupplung vom Kissen.
2. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher mit nichtleitendem Griff um die Schraube zu lösen und den Batteriedeckel zu öffnen.
3. Benutzen Sie einen Schraubenzieher um die Batterien herauszunehmen.
4. Beachten sie "+" und fügen Sie zwei 1.5 volt Alkaline Knopfzellen-Batterien ein (LR44, A76, AG13 oder Ähnliche).
5. Schließen Sie den Batteriedeckel.
6. Drehen Sie die Schraube zu. **BEACHT:** Wenn die Schraube nicht fest angezogen ist, kann die Batterie Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Das führt zu Produktschäden.



HALTEN SIE DIE BATTERIEN FERN VON PERSONEN, DIE DIE NEIGUNG HABEN, NICHT ESSBARE GEGENSTÄNDE IN DEN MUND ZU NEHME. Schlucken oder Einatmen kann zu gravierenden Verletzungen oder Tod führen. Suchen Sie SOFORT einen Arzt auf.



Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt und/oder seine Bestandteile gemäß geltendem Recht in Ihrem Rechtsbereich, (einschliesslich Abfallrecht hinsichtlich elektrischer und elektronischer Geräte). **NICHT VERBRENNEN.**



permobil

ROHO SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

permobilus.com



Intertek



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Intertek

The products featured in this document were
manufactured under a Quality Management System
that is certified to ISO 13485:2016.