

Smart Check[®]

by ROHO[®]

Operation Manual



Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y[®]

Smart Check® by ROHO®

Manuel d'utilisation

Fournisseur : ce manuel doit être remis à l'utilisateur de ce produit.

Utilisateur (une personne quelconque ou une personne soignante) : avant d'utiliser ce produit, lisez les instructions et conservez-les pour pouvoir y faire référence dans le futur.

Table des matières

Utilisation prévue	26-27
Informations importantes sur la sécurité	
Légende	28
Spécifications	29
Détails des pièces	
Aperçu général	30
Instructions pour le réglage intelligent (Smart Setup)	31-32
Instructions pour la vérification	33
Instructions pour Configuration Optionnelle	34
Guide de vérification à la main	
Instructions pour la réinitialisation complète (Hard Reset)	35
Débranchement et rangement	
Dépannage	
Garantie limitée	
Nettoyage et Désinfection	36
Remplacement des piles	
Élimination	



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429 U.S.A.

USA.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449 • Service à la clientèle : orders.roho@permobil.com

Außerhalb der USA: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518 • intlorders.roho@permobil.com
permobilus.com

Les produits ROHO peuvent être couverts par un ou plusieurs brevets et marques de commerce des États-Unis ou d'autres pays, incluant ROHO®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, Sensor Ready®, shape fitting technology®, Smart Check® by ROHO®, et Smart Check®.

ROHO, Inc. a pour politique l'amélioration continue des produits et se réserve le droit de modifier ce document. La dernière version de ce document est disponible sur permobilus.com.

© 2015, 2018 ROHO, Inc.

Rev: 04/06/2018

Utilisation prévue

Smart Check® by ROHO® (Smart Check) est un système asservi de contrôle du coussin qui est destiné à aider l'utilisateur en enregistrant une plage de pressions de gonflage pendant le réglage du coussin. Pendant les vérifications ultérieures du niveau de gonflage, Smart Check est destiné à indiquer si des réglages sont nécessaires pour que le gonflage du coussin reste dans la plage de pressions enregistrée.

Smart Check doit être connecté à un coussin à compartiment unique ROHO® faisant appel à la technologie Sensor Ready® (coussin Sensor Ready) ou coussin ROHO® Hybrid Elite SR™ (Hybrid Elite SR).



⚠ Informations importantes sur la sécurité

- Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement et complètement ce manuel d'instructions.
- Les produits médicaux de ROHO ont l'intention de faire partie d'un régime de soins. Un clinicien devrait faire des recommandations de produits basées sur une évaluation des besoins médicaux et thérapeutiques, et l'état général de l'individu. Un clinicien devrait aussi évaluer toute déficience visuelle, de lecture, ou cognitive afin de déterminer le besoin d'assistance quant à l'utilisation du produit, incluant de fournir un guide à gros caractères. L'utilisation de cet appareil n'empêche pas d'inspecter de façon routinière le produit et de pratiquer toutes les activités normales associées à la protection de la peau et des parties molles (déplacements du poids, inspection de la peau, soins généraux de la peau, etc.)

Avertissements

- **Smart Check de ROHO a été conçu pour être utilisé uniquement avec le coussin Sensor Ready de Roho et Hybrid Elite SR. Utiliser un coussin non compatible affectera les fonctionnalités de Smart Check en plus de réduire ou éliminer les avantages du coussin, et augmentera les risques de blessures pour la peau et autres tissus mous. Utiliser un coussin non compatible pourra aussi endommager Smart Check et annulera la garantie.**
- **NE PAS utiliser un coussin sous-gonflé ou un coussin surgonflé car les avantages du produit seront réduits ou éliminés, entraînant un risque accru pour la peau et autres parties molles. Si le coussin ne semble pas retenir l'air, ou si vous ne pouvez pas gonfler ou dégonfler le coussin, voir la section DÉPANNAGE du guide qui a été fournie avec le coussin. Si le problème persiste, veuillez communiquer immédiatement avec un soignant, un distributeur ou ROHO, inc.**
- **Vérifier fréquemment la pression de gonflage, au moins une fois par jour, en utilisant le Smart Check ou en vérifiant à la main.**
- **Effectuez à nouveau un réglage Smart Setup ou un réglage Configuration Optionnelle si les changements suivants se produisent : 1) une personne différente utilise le Smart Check, 2) un fauteuil différent ou un coussin différent est utilisé, ou 3) des changements d'ordre physiologique (par exemple, perte de poids ou prise de poids) affectent la personne. Avant d'effectuer un nouveau réglage, vous devez effacer le réglage de votre Smart Check; voir INSTRUCTIONS POUR LA RÉINITIALISATION COMPLÈTE (HARD RESET).**
- **GARDER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DE TOUTES LES PERSONNES AYANT TENDANCE À PLACER DES OBJETS NON COMESTIBLES DANS LEUR BOUCHE.** Les avaler ou les respirer peut entraîner des blessures graves, voire même fatales. Exiger IMMÉDIATEMENT des soins médicaux d'urgence.
- **Pour éviter tout risque de strangulation, FAIRE PREUVE DE PRUDENCE si des enfants sont présents. Détacher le Smart Check quand il n'est pas utilisé et le ranger dans un endroit sécuritaire et accessible.**

Informations importantes sur la sécurité (suite)

Avertissements (suite)

- L'utilisation d'un accessoire (par exemple, une pompe ou une housse de coussin) autre que ceux proposés par ROHO, Inc. peut être dangereuse et pourrait annuler la garantie du produit.
- NE PAS modifier le Smart Check ou l'un quelconque de ses composants. À défaut de respecter cette consigne, le produit pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.
- NE PAS utiliser en présence d'anesthésiques inflammables ou dans un milieu riche en oxygène. À défaut de respecter cette consigne, le risque d'incendie ou d'explosion augmenterait.
- Si le coussin donne l'impression d'être instable pendant le réglage Smart Setup, effectuer une réinitialisation totale (Hard Reset) et répéter ensuite le réglage Smart Setup. Si cette impression d'instabilité du coussin persiste, effectuer le réglage Configuration Optionnelle et consulter un fournisseur de soins de santé.
- Le coussin DOIT être correctement dimensionné pour l'utilisateur. SI CE N'EST PAS LE CAS, il se peut que le Smart Check, pendant le réglage Smart Setup, ne trouve pas la plage de pressions de gonflage pour la personne, réduisant ou éliminant ainsi les bienfaits du coussin et augmentant ainsi les risques pour la peau ou les parties molles.
- Tout ce qui concerne l'utilisation du Smart Check et qui est décrit dans ce manuel peut être effectué par une personne quelconque ou par une personne soignante. Si vous êtes incapable d'effectuer la moindre tâche décrite dans ce manuel, veuillez demander de l'aide.
- RISQUE DE BRÛLURE : si la température ambiante est supérieure à 47 °C (117 °F), NE PAS rester en contact avec la surface du produit pendant plus de dix (10) minutes.
- La vérification Smart Check DOIT être utilisée UNIQUEMENT avec une housse de coussin ROHO compatible. L'utilisation d'une housse différente peut interférer avec la précision des fonctions du Smart Check.
- NE PAS effectuer l'entretien du Smart Check quand il est en cours d'utilisation. À défaut de respecter cette consigne, le système pourrait mal fonctionner.
- Configurer le coussin dans les conditions environnementales habituelles. Effectuer des vérifications Smart Check quand les conditions environnementales, notamment la température et l'altitude, changent de façon significative.


Mises en garde

- Quotidiennement : inspecter le raccord rapide Smart Check, le petit tuyau et le boîtier de l'appareil pour vérifier que rien n'est usé ou cassé et pour s'assurer que les composants de liaison sont bien attachés. NE PAS continuer à utiliser le Smart Check si l'une quelconque des pièces est endommagée ou ne peut pas bien s'attacher. ROHO, Inc. recommande que le Smart Check soit inspecté périodiquement par un technicien qualifié.
- NE PAS plonger le Smart Check dans un liquide, ceci pouvant endommager l'appareil.
- Protéger le Smart Check contre les chocs violents pouvant endommager ou casser l'appareil.
- NE PAS exposer l'appareil à des températures élevées, une flamme nue ou des cendres chaudes.
- NE PAS utiliser la valve de chambre à air, Raccord Rapide ou l'un quelconque des composants du Smart Check comme poignée pour transporter ou tirer le coussin.
- Toute exposition prolongée à l'ozone peut dégrader certains des matériaux utilisés pour la fabrication de ce produit, affecter le rendement de ce produit et en annuler la garantie.
- Toute exposition prolongée à la lumière ultraviolette ou aux rayons du soleil peut effacer les étiquettes du produit.

Légende

Avertissement		Limite de température	
Se référer aux instructions d'utilisation.		Limite d'humidité (relative, sans condensation)	
Site de fabrication		Limite de pression atmosphérique	
Garder au sec.		Risque de suffocation	
Essuyer à la main.		Ne pas jeter avec déchets ménagers.	 les
Sécher à l'air.		Identification de l'utilisateur	
Ne pas utiliser d'eau de Javel.		IEC 60601-1 : pièce appliquée sur la partie de type BF	
Piles faibles : lumière orange			

Spécifications

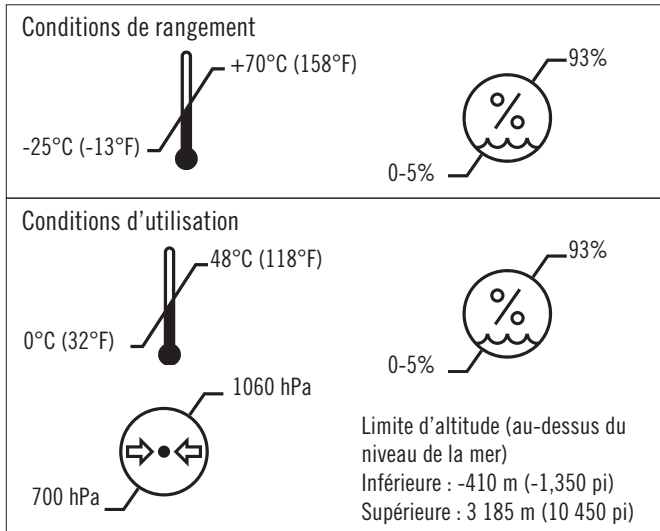

- Smart Check : polycarbonate avec plaque de support en polyester
- Étui de rangement : polystyrène
- Petit tuyau : polyuréthane
- Raccord rapide : acétal
- Ce produit est conforme à la norme RoHS2.
- Le Smart Check est une pièce appliquée sur la partie de type BF. Le Smart Check a été testé et il est conforme aux normes IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 et IEC 60601-1-11; certifié pour la norme CAN/CSA C22.2 N° 60601-1. Le Smart Check ne produit aucune interférence électromagnétique et n'est affecté par aucune interférence magnétique.
- Durée de vie prévue : 5 ans
- Piles : durée d'utilisation d'un (1) an en général
- Le Smart Check est un appareil homologué IP54 (protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau).

Détails des pièces

Contenu de l'emballage : Smart Check® by ROHO®, instructions Smart Check, carte d'enregistrement, étui de rangement

Enregistrement du produit: Postez la carte d'enregistrement du produit qui est jointe ou enregistrez votre produit sur le site ROHO.com.



Pour de plus amples informations sur votre coussin, référez-vous au *manuel d'utilisation du coussin à compartiment unique ROHO® faisant appel à la technologie Sensor Ready®* Manuel d'utilisation ou le *Coussin ROHO® Hybrid Elite®* Manuel d'instructions.



Manuel d'utilisation



Carte d'enregistrement du produit



Plaque de support Smart Check:

Pour le détail de la plaque de support, se référer aux instructions.

Petit tuyau

Raccord rapide



Étui de rangement

Aperçu général


Cette page explique comment utiliser le Smart Check pour rechercher, enregistrer et vérifier le réglage du gonflage de votre coussin. Veuillez lire avant d'utiliser le Smart Check.

Réglage Smart Setup et vérification:

1. Suivez les INSTRUCTIONS POUR LE RÉGLAGE SMART SETUP. Smart Check recherchera et enregistrera le réglage de gonflage de votre coussin.
2. Suivez les INSTRUCTIONS POUR LA VÉRIFICATION. Quand vous appuyez sur la touche Check Button, le Smart Check vous indiquera si vous devez régler le coussin.

Réglage approprié du gonflage de coussin :

A) se caler dans le coussin et **B)** « flotter » au-dessus du support du coussin.

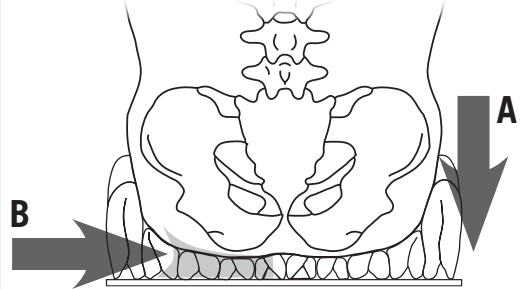

Le réglage Configuration Optionnelle est un réglage différent du réglage "Smart Setup".

On peut préférer le réglage Configuration Optionnelle dans les situations suivantes :

- Un spécialiste qualifié en matière d'assise a déterminé un niveau différent d'immersion et d'enveloppement pour la personne.
- La personne doit tenir compte des besoins (par exemple, une posture asymétrique prononcée) correspondant à un réglage d'immersion et d'enveloppement que le Smart Check ne peut pas rechercher pendant son réglage.
- Le coussin est utilisé sur une surface rembourrée (par exemple, siège de commandant).



Avertissements:

- Il est recommandé qu'un spécialiste qualifié de l'assise soit consulté lors de la sauvegarde d'un réglage d'inflation préféré avec la configuration optionnelle.
- Le réglage Configuration Optionnelle ne doit pas être utilisé si la personne pèse moins de 40 kg (90 lb).

Réglage Configuration Optionnelle (et vérification)

1. Recherchez votre réglage de gonflage préféré sans utiliser le Smart Check (référez-vous au *ROHO® faisant appel à la technologie Sensor Ready® Manuel d'utilisation* ou le *Coussin ROHO® Hybrid Elite® Manuel d'instructions*).
2. Suivez les INSTRUCTIONS POUR LE RÉGLAGE CONFIGURATION OPTIONNELLE, en utilisant le Smart Check pour enregistrer votre réglage de gonflage.
3. Suivez les INSTRUCTIONS POUR LA VÉRIFICATION. Quand vous appuyez sur la touche Check Button, le Smart Check vous indiquera si vous devez régler le coussin.



IMPORTANT!

- Effectuez un réglage (que ce soit un réglage Smart Setup ou un réglage Configuration Optionnelle) lorsque vous utilisez le Smart Check pour la première fois.
- Effectuez à nouveau un réglage Smart Setup ou un réglage Configuration Optionnelle si les changements suivants se produisent : 1) une personne différente utilise le Smart Check, 2) un fauteuil différent ou un coussin différent est utilisé, ou 3) des changements d'ordre physiologique (par exemple, perte de poids ou prise de poids) affectent la personne. Avant d'effectuer un nouveau réglage, vous devez effacer le réglage de votre Smart Check; voir INSTRUCTIONS POUR LA RÉINITIALISATION COMPLÈTE (HARD RESET).
- Effectuez fréquemment une vérification, au moins une fois par jour!


Instructions pour le réglage Smart Setup

Le Smart Check recherchera et enregistrera pour vous le réglage de gonflage de votre coussin, dans votre fauteuil. **REMARQUE** : les résultats peuvent varier en fonction de la morphologie.




- Effectuez les étapes suivantes dans les conditions environnementales habituelles.
- Pour démarrer le réglage Smart Setup, le coussin **DOIT** être surgonflé. Il se peut que vous vous sentiez temporairement instable; si c'est le cas, procédez avec prudence.
- Avant d'utiliser le Smart Check, la personne **DOIT** être assise sur le coussin dans le fauteuil.

Symboles et lumières pour le réglage Smart Setup



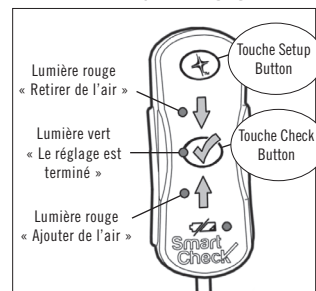


1. Placez le coussin dans le fauteuil. Placez l'embout de la pompe sur la valve de chambre à air.


Si une housse de coussin est utilisée, placez la housse sur le coussin avant de gonfler.

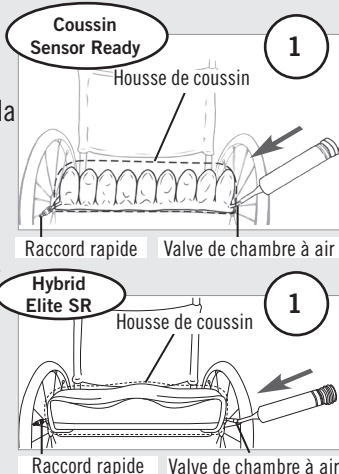

2. Ouvrez la valve de chambre à air. Surgonflez le coussin jusqu'à ce qu'il soit bombé. Fermez la valve de chambre à air. Retirez la pompe.

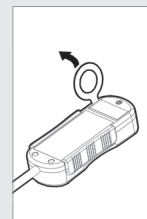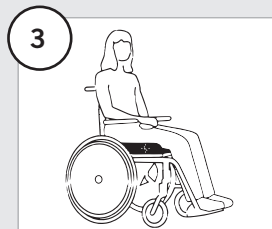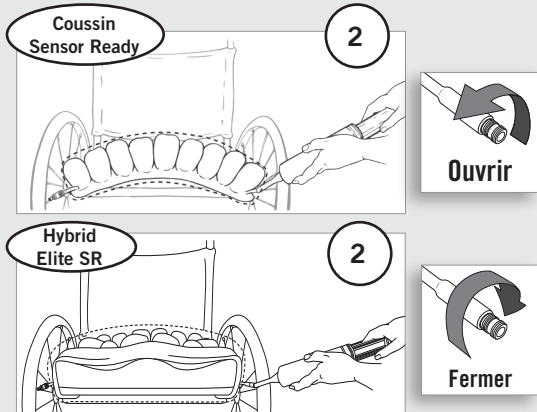


3. Asseyez-vous dans le fauteuil comme vous le faites habituellement. Tirez sur l'étiquette pour la retirer (*uniquement lors de la première utilisation*).

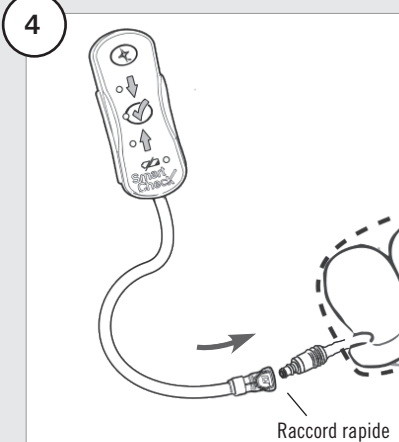

4. Assurez-vous que la valve de chambre à air est fermée. Attachez le Smart Check au coussin. Vous devez entendre un « clic » indiquant qu'il est bien attaché.

Instructions pour le réglage Smart Setup (suite)


5a.

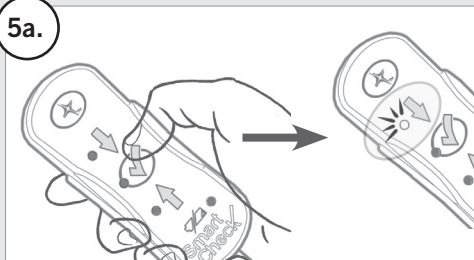


5a. Appuyez sur la touche Check ✓ Button. Dès que vous voyez la flèche rouge ↓ pointant vers le bas s'allumer, passez à l'étape 5 b.

REMARQUE : si vous voyez la flèche rouge ↑ pointant vers le haut s'allumer quand vous appuyez sur la touche Check Button :

1) assurez-vous que le raccord rapide est bien attaché et 2) ouvrez la valve de chambre à air, ajoutez de l'air, fermez la valve de chambre à air et appuyez à nouveau sur la touche Check ✓ Button. *Répétez jusqu'à ce que vous voyiez la flèche rouge pointant vers le bas s'allumer.*

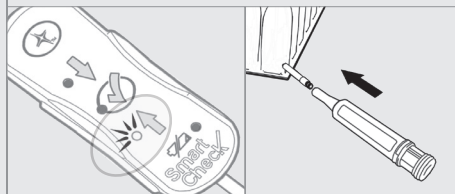

5b.

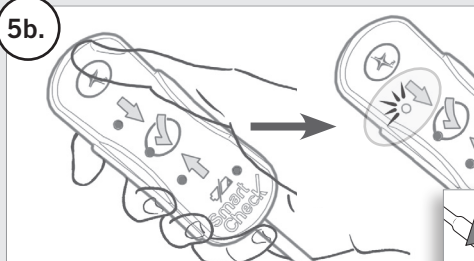

5b. Appuyez sur la touche Setup Button (sans le maintenir enfoncé). La flèche rouge ↓ pointant vers le bas va maintenant **clignoter**. Ouvrez la valve de chambre à air, relâchez de l'air (pendant environ 30 à 60 secondes)* et attendez jusqu'à ce que la lumière verte clignote.

Si la flèche rouge ↓ pointant vers le bas arrête de clignoter avant que vous ouvriez la valve, retournez à l'étape 5a.

***Pour vous assurer que la lecture est précise :** restez immobile et évitez de restreindre le débit d'air quand vous relâchez l'air du coussin.

Dès que vous voyez la lumière verte clignoter, fermez la valve de chambre à air. La lumière verte indique que le réglage est terminé.

Votre coussin est maintenant réglé.

(ensuite, voir INSTRUCTIONS POUR LA VÉRIFICATION).



Rangez le Smart Check dans un endroit sécuritaire et accessible. Voir les instructions DÉBRANCHEMENT ET RANGEMENT.

Instructions pour la vérification

Effectuez une vérification (que ce soit un réglage Smart Setup ou un réglage Configuration Optionnelle) dès qu'un réglage est terminé.

Comment effectuer une vérification :

1. Vous devez être assis dans le fauteuil comme vous le faites habituellement.
2. Appuyez sur la touche Check Button.
3. Référez-vous au tableau ci-dessous.



- Effectuez fréquemment une vérification, au moins une fois par jour!
- Si le coussin était dans une housse pendant le réglage, le coussin doit être dans la même housse pendant la vérification.
- Effectuez une vérification quand il y a un changement important d'altitude.

Symboles et lumières pour la vérification

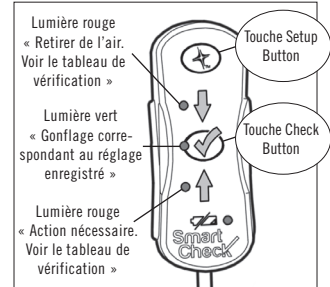


Tableau de vérification

REMARQUE : Une fois que vous avez effectué une vérification, vous pouvez choisir d'effectuer une vérification à la main pour vous familiariser avec votre plage de gonflage. Voir le GUIDE DE VÉRIFICATION À LA MAIN.

REMARQUE : Il se peut que vous puissiez ajouter ou retirer une petite quantité d'air et toujours avoir un réglage de gonflage correspondant à votre coussin. Le Smart Check enregistre le réglage de gonflage de votre coussin en vous laissant une certaine marge de réglage.

Lumière	Statut:	Action
	Le gonflage du coussin correspond au réglage enregistré.	Aucune autre action n'est nécessaire.
Lumière	Causes possibles:	Action
	Il se peut que votre poids soit mal réparti.	Effectuez un déplacement du poids pour faire circuler l'air dans le coussin, puis appuyez sur la touche Check Button pour obtenir une nouvelle lecture.
	Le raccord rapide n'est pas attaché au coussin.	Assurez-vous que le raccord est bien attaché, puis appuyez sur la touche Check Button pour obtenir une nouvelle lecture. Voir DÉPANNAGE dans ce manuel.
	Le coussin demande davantage d'air.	Ouvrez la valve et ajoutez de l'air dans le coussin (entre 6 et 10 coups de pompe). Fermez la valve. Appuyez sur la touche Check Button pour obtenir une nouvelle lecture. Au besoin, répétez.
	Le coussin ou le raccord rapide sur le coussin présente une légère fuite.	Si vous ne pouvez pas effectuer vous-même les réglages, arrêtez d'utiliser l'appareil tant que vous n'avez pas d'aide. Consultez la section DÉPANNAGE dans le ROHO® faisant appel à la technologie Sensor Ready® Manuel d'utilisation, Coussin ROHO® Hybrid Elite® Manuel d'instructions ou communiquez avec le service à la clientèle.
Lumière	Ursache:	Aktion
	Le coussin a trop d'air.	Ouvrez la valve et retirez l'air du coussin jusqu'à ce que la lumière verte s'allume. Fermez la valve. Si vous êtes incapable d'effectuer cette tâche, veuillez demander de l'aide.

Instructions pour le réglage Configuration Optionnelle


Le réglage Configuration Optionnelle est un réglage différent du réglage Smart Setup qui enregistre votre réglage d'inflation préféré. Pour de plus amples informations, voir APERÇU GÉNÉRAL.

Première partie : Réglez votre coussin sans le Smart Check


1. Effectuez une réinitialisation complète (Hard Reset). Voir INSTRUCTIONS DE RÉINITIALISATION COMPLÈTE (HARD RESET).

REMARQUE : Dans le cas d'une première utilisation, retirez l'étiquette de la pile en tirant dessus.

2. Gonflez le coussin et placez-le dans le fauteuil. Asseyez-vous dans le fauteuil comme vous le faites habituellement. Réglez le coussin en suivant les instructions de réglage de coussin dans le *ROHO® faisant appel à la technologie Sensor Ready® Manuel d'utilisation* ou le *Coussin ROHO® Hybrid Elite® Manuel d'instructions*.
3. Effectuez une vérification à la main pour confirmer l'immersion et l'enveloppement (voir le GUIDE DE VÉRIFICATION À LA MAIN dans ce manuel).

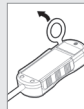


Symboles et lumières pour le réglage Configuration Optionnelle

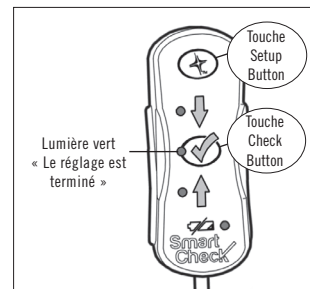


Deuxième partie : Enregistrez votre réglage à l'aide du Smart Check


- Il est recommandé qu'un spécialiste qualifié de l'assise soit consulté lors de la sauvegarde d'un réglage d'inflation préféré avec la configuration optionnelle.
- Effectuez les étapes suivantes dans les conditions environnementales habituelles.

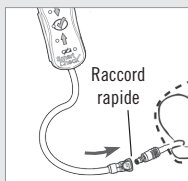

4. Assurez-vous que le Smart Check est bien attaché à votre coussin. Vous devez entendre un « clic » indiquant qu'il est bien attaché.

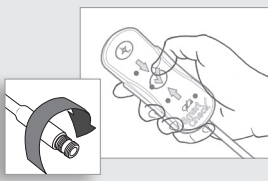

5. Assurez-vous que la valve de chambre à air est fermée. Appuyez sur la touche Check Button pour activer le Smart Check. Vous verrez alors une ↑ ou une ↓ s'allumer en rouge. **NE PAS** ajouter ou retirer de l'air.

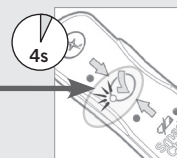

6. Appuyez sur la touche Setup Button en la maintenant enfoncée pendant quatre (4) secondes jusqu'à ce que vous voyiez une lumière verte. Le voyant vert signifie que votre réglage d'inflation préféré a été sauvegardé. Le voyant vert N'INDIQUE PAS un RÉGLAGE D'INFLATION APPROPRIÉ. Voir APERÇU GÉNÉRAL pour plus d'information.



Rangez le Smart Check dans un endroit sécuritaire et accessible. Voir les instructions DÉBRANCHEMENT ET RANGEMENT.

Votre coussin est maintenant réglé.
(ensuite, voir INSTRUCTIONS POUR LA VÉRIFICATION).

Guide de vérification à la main

Utilisez ce guide pour régler votre coussin en faisant appel à un réglage Configuration Optionnelle. Il est également recommandé d'effectuer un réglage Smart Setup pour que vous ayez un point de référence si vous devez régler votre coussin sans le Smart Check (par exemple, si le coussin a été mal placé).

Avant d'effectuer une vérification manuelle, référez-vous aux INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et lisez la mise en garde pour l'utilisation d'un coussin sous-gonflé ou surgonflé.

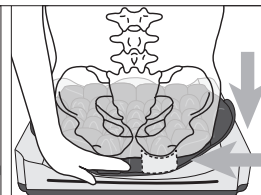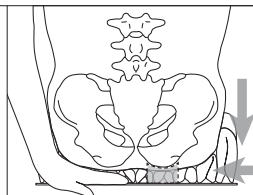


Assurez-vous qu'il y ait au moins ½ po (1,5 cm) d'air soutenant les saillances osseuses de l'individu.

1. Placez la main entre vous-même et le coussin. Recherchez les parties osseuses saillantes les plus basses. Vous devez pouvoir remuer légèrement le bout des doigts.
2. Si vous sentez que le coussin a trop d'air ou pas assez d'air, réglez au besoin et consultez les sections INSTRUCTIONS POUR LA VÉRIFICATION et APERÇU GÉNÉRAL.

Instructions pour la réinitialisation complète (Hard Reset)

Avant d'effectuer un nouveau réglage, vous devez effacer le réglage sur le Smart Check en effectuant une réinitialisation complète (Hard Reset). **REMARQUE** : le Smart Check peut être attaché ou détaché quand on effectue une réinitialisation complète. Stellen Sie sicher, daß keines der Lichter blinkt oder leuchtet.

1. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune lumière allumée ou clignotante.
2. Appuyez simultanément sur la touche Check Button ET sur la touche Setup Button, les maintenant enfoncées pendant cinq (5) secondes. Chacune des lumières clignotera une fois, indiquant ainsi que le réglage précédent a été effacé.
3. Une fois la Réinitialisation Complète (Hard Reset) terminée, suivre toutes les instructions de réglage tel qu'indiqué dans le présent manuel.

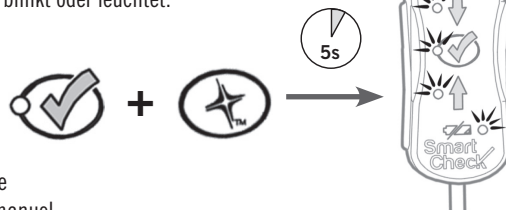

Débranchement et rangement

Pour débrancher le Smart Check du coussin : Enfoncez le loquet gris, puis détachez l'appareil.

Pour ranger le Smart Check : Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez débrancher et ranger le Smart Check dans un endroit sécuritaire et accessible (par exemple, l'étui fourni avec le Smart Check).



Confirmez que le Smart Check ne s'appuie pas contre votre corps.



Dépannage	
Problème	Action
Aucune lumière ne s'allume ou ne clignote sur le Smart Check après avoir appuyé sur la touche Check Button.	Assurez-vous que l'étiquette a été retirée du compartiment à piles. Confirmez le type de piles et le sens dans lequel elles ont été insérées. Au besoin, remplacez les piles. Si le problème persiste, communiquez avec le service à la clientèle.
Réglage Smart Setup : Une fois que vous avez appuyé sur la touche Check Button, la lumière rouge ↑ « Ajouter de l'air » reste allumée, mais vous avez confirmé que le coussin est surgonflé et que le raccord rapide est bien attaché.	Inspectez le joint torique sur le raccord rapide du coussin pour vérifier s'il est usé ou endommagé. S'il est endommagé, communiquez avec le service à la clientèle. Inspectez le coussin pour vérifier s'il ne présente pas une petite fuite. Consultez la section DÉPANNAGE dans le Réglez le coussin en suivant les instructions de réglage de coussin dans le <i>Coussin à compartiment unique ROHO® faisant appel à la technologie Sensor Ready® Manuel d'utilisation</i> ou le <i>Coussin ROHO® Hybrid Elite® Manuel d'instructions</i> .
Réglage Configuration Optionnelle : Vous ne voyez aucune lumière verte s'allumer après avoir appuyé sur la touche Setup Button en la maintenant enfoncée pendant quatre (4) secondes.	Répétez la deuxième partie des INSTRUCTIONS POUR LE RÉGLAGE CONFIGURATION OPTIONNELLE. Si vous ne voyez toujours pas de lumière verte s'allumer, notez qu'il se peut que le réglage Configuration Optionnelle ne soit pas compatible avec vos besoins physiques ou vos préférences. Référez-vous aux sections APERÇU GÉNÉRAL et INSTRUCTIONS POUR LE RÉGLAGE SMART SETUP ou communiquez avec votre clinicien ou le service à la clientèle.
Vous avez besoin d'aide pour utiliser ou entretenir le Smart Check, ou vous avez rencontré des problèmes inattendus.	Communiquez avec le service à la clientèle.

Garantie limitée

Durée de la garantie limitée : 24 mois à partir de la date originale d'achat du produit. Se référer aussi au supplément à propos de la garantie limitée fourni avec votre produit, ou contactez le service à la clientèle.

Nettoyage et désinfection



- Le nettoyage et la désinfection sont deux opérations distinctes. Le nettoyage doit précéder la désinfection.
- Quand le produit est utilisé par la même personne, il faut le nettoyer et le désinfecter aussi souvent que possible. Avant qu'il soit utilisé par une personne différente, le produit doit être nettoyé, désinfecté et son bon fonctionnement vérifié.



- Suivez les consignes de sécurité sur les étiquettes des produits de nettoyage et de désinfection.
- Le Smart Check ne doit pas être nettoyé en utilisant de l'acétone, de la MEK, du toluène ou des dissolvants d'adhésif.
- **NE PAS plonger le Smart Check dans un liquide.**

Pour nettoyer : Essuyez le Smart Check à l'aide d'un détergent doux et d'un chiffon doux ou d'une éponge propre. Séchez à l'air.



Pour désinfecter : Essuyez le Smart Check à l'aide d'une serviette désinfectante sans eau de Javel. Séchez à l'air.



Stérilisation : Le Smart Check n'est ni emballé sous atmosphère stérile ni destiné à être stérilisé avant utilisation et il n'est pas nécessaire de le stériliser. Les températures élevées accélèrent l'usure du produit et peuvent endommager l'ensemble du produit.


Remplacement des piles

La lumière de faiblesse des piles indique que les piles doivent être remplacées.



- Après le remplacement des piles, le Smart Check se souviendra du réglage enregistré.
- Pour prolonger la durée de vie des piles, le Smart Check passe automatiquement en mode « Veille » quand on ne l'utilise pas.
- Durée de vie prévue des piles : un (1) an.

1. Détachez le Smart Check du coussin au niveau du raccord rapide.
2. Pour desserrer la vis et ouvrir le couvercle du compartiment des piles, utilisez un tournevis à pointe cruciforme ayant une manche non conducteur.
3. Utilisez le tournevis pour libérer les piles.
4. Repérez le « + » et insérez deux (2) piles neuves alcalines type bouton de 1,5 V (LR44, A76, AG13 ou équivalent).
5. Fermez le couvercle du compartiment des piles.
6. Resserrez la vis. **REMARQUE :** Si la vis n'est pas complètement serrée, les piles peuvent être exposées à l'humidité, ce qui endommagerait le produit.

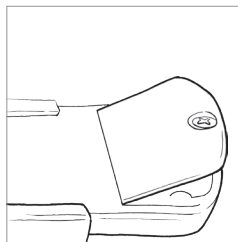

GARDER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DE TOUTES LES PERSONNES AYANT TENDANCE À PLACER DES OBJETS NON COMESTIBLES DANS LEUR BOUCHE. Les avaler ou les respirer peut entraîner des blessures graves, voire même fatales. Exiger **IMMÉDIATEMENT** des soins médicaux d'urgence.



Élimination

Éliminez le produit ou ses composants conformément aux réglementations en vigueur localement (y compris l'élimination des déchets électroniques). **NE PAS INCINÉRER.**



permobil

ROHO SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

permobilus.com



Intertek



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Intertek

The products featured in this document were
manufactured under a Quality Management System
that is certified to ISO 13485:2016.