

Smart Check[®]

by ROHO[®]

Operation Manual



Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y[®]

Smart Check® by ROHO®

Brugerhåndbog

Leverandør: Denne håndbog skal udleveres til brugeren af dette produkt.

Bruger (individ eller plejepersonale): Læs vejledningen grundigt inden produktet tages i brug og opbevar den til senere brug.

Indholdsfortegnelse

Anvendelsesformål	74-75
Vigtige sikkerhedsoplysninger	
Forklaring	76
Specifikationer	77
Billeder af de enkelte dele	
Oversigt	78
Smart Indstilling - vejledning	79-80
Check - vejledning	81
Vejledning i Valgfri Indstilling	82
Håndtjeck - vejledning	
Grundig Nulstilling - vejledning	82
Frakobling og opbevaring	
Fejlfinding	
Begrænset garanti	
Rengøring og desinficering	84
Udskiftning af batteri	
Bortskaffelse	



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429 U.S.A.

USA: 800-851-3449 • Fax: 001 888 551 3449 • Kundeservice: orders.roho@permobil.com

Udenfor USA: 001 618 277 9150 • Fax: 001 618 277 6518 • intlorders.roho@permobil.com
permobilus.com

ROHO-produkterne kan være dækket af en eller flere amerikanske og udenlandske patenter og varemærker, herunder ROHO®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, Sensor Ready®, shape fitting technology®, Smart Check® by ROHO®, og Smart Check®.

ROHO, Inc. tilstræber hele tiden at forbedre produkterne og forbeholder sig retten til at ændre dette dokument. Den nyeste version af dette dokument findes på permobilus.com.


© 2015, 2018 ROHO, Inc.

Rev: 04/06/2018

Anvendelsesformål

Smart Check® fra ROHO® (Smart Check) er et pude feedback system, som er beregnet til at hjælpe brugeren, ved at gemme et oppumpningsområde under indstilling af puden. Under efterfølgende tjek af oppumpningen, er Smart Check beregnet til at indikere, om der er behov for justeringer for at forblive i det gemte område.

Smart Check skal tilkobles en ROHO® 1-kammer pude med Sensor Ready®-teknologi (Sensor Ready-pude) eller ROHO® Hybrid Elite-puden SR™ (Hybrid Elite SR).

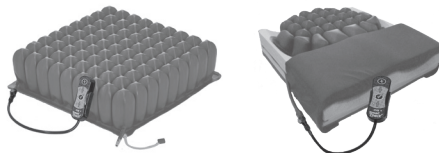

⚠️ Vigtige sikkerhedsoplysninger

- Læs hele denne vejledningshåndbog omhyggeligt, før du bruger produktet.
- ROHO medicinske produkter er beregnet til at være en del af en behandling som helhed. Klinikerer foretager produktanbefalinger baseret på en vurdering af den individuelle medicinske og terapeutiske behov samt generelle helbred. En kliniker bør endvidere evaluere for nedsatte funktioner hvad angår visuelle og kognitive evner samt forringet læsevne for at bestemme behovet for plejepersonalets bistand med brug af produktet, heriblandt sørge for en manual med store bogstaver. Brugen af denne enhed eliminerer ikke rutinemæssig eftersyn af produktet og alle normale aktiviteter forbundet med beskyttelse af huden og blødt væv (vægtændringer, eftersyn af huden, generel hudpleje, osv.)

Advarsler

- Smart Check fra ROHO er designet kun til brug sammen med ROHO Sensor Ready-puden eller Hybrid Elite SR. Hvis der bruges en pude, som ikke er kompatibel, vil det påvirke Smart Check-funktionerne, reducere eller eliminere fordelene ved puden, og øge risikoen i forhold til huden og andet blødt væv. Hvis der bruges en pude, som ikke er kompatibel, kan det også resultere i beskadigelse af Smart Check, og det vil ugyldiggøre garantien.
- Anvend IKKE en pude, der indeholder for lidt eller for meget luft, da produktets fordele mindskes eller fjernes helt, hvilket fører til en øget risiko for huden og andet blødt væv. Hvis puden ikke ser ud til at kunne holde på luften, eller hvis du ikke kan fylde luft i eller lukke luften ud af puden, skal du se afsnittet FEJLFINDING i denne håndbog, som blev leveret med puden. Kontakt straks det kliniske plejepersonale, forhandleren eller ROHO, Inc., hvis problemet fortsætter.
- Kontrollér hyppigt luften i puden, mindst én gang dagligt, ved hjælp af Smart Check eller et håndtjek.
- Udfør Smart Indstilling eller Valgfri Indstilling igen, hvis der sker følgende ændringer: 1) En anden bruger anvender Smart Check; 2) en anden stol eller en anden pude anvendes; eller 3) brugeren oplever fysiologiske ændringer (for eksempel, vægttab eller vægtforøgelse). Før der udføres en ny indstilling, skal du slette din Smart Check-indstilling; se GRUNDIG NULSTILLING-VEJLEDNING.
- SØRG FOR, AT BATTERIERNE ER UTILGÆNGELIGE FOR BØRN OG ALLE PERSONER, SOM HAR TENDENS TIL AT ANBRINGE USPISELIGE GENSTANDE I MUNDEN. Indtagelse eller indånding kan medføre alvorlig skade eller død. Søg STRAKS akut lægehjælp.
- VÆR FORSIGTIG, når der er børn til stede, for at undgå kvælningsfare. Frakobl Smart Check, når den ikke er i brug, og opbevar den et sikkert og tilgængeligt sted.

Vigtige sikkerhedsoplysninger (fortsat)

Advarsler, fortsat

- Brug af andet tilbehør (for eksempel, en pumpe eller et pudebetræk) end det, som medfølger fra ROHO, Inc., kan være farligt og kan gøre garantien ugyldig.
- Du må IKKE modificere Smart Check eller nogen af komponenterne. Dette kan forårsage skader på produktet, og dette ugyldiggør garantien.
- Må IKKE bruges under tilstedeværelsen af brændbare bedøvelsesmidler og/eller i et ilt-rigt miljø. Dette øger risikoen for brand eller eksplosion.
- Hvis din pude føles ustabil under Smart Indstilling, så skal du udføre en Grundig Nulstilling og derefter gentage Smart Indstilling. Hvis du stadig føler dig ustabil, så skal du udføre en Valgfri Indstilling og rådføre dig med en sundhedsekspert.
- Pudens SKAL have den korrekte størrelse i forhold til brugeren. Hvis den IKKE har det, kan Smart Check muligvis ikke finde brugerens oppustningsområde under Smart Indstilling, hvilket reducerer eller eliminerer fordelene ved pudens og øger risikoen i forhold til huden og andet blødt væv.
- Alle aspekter ved brugen af Smart Check, der er beskrevet i denne håndbog, kan udføres af brugeren eller af plejepersonalet. Er du ikke selv i stand til at udføre de handlinger, der er beskrevet i denne håndbog, bør du få en til at hjælpe dig.
- **FORBRÆNDINGSFARE:** Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 47°C, må du IKKE fortsat være i kontakt med produktets overflade i mere end ti (10) minutter.
- Smart Check må KUN bruges sammen med et kompatibelt ROHO-pudebetræk. Anvendelse af et andet betræk kan forstyrre nøjagtigheden af Smart Check-funktionerne.
- Udfør IKKE vedligeholdelse på Smart Check, mens den er i brug. Dette kan resultere i forkert funktion.
- Indstil din pude under de sædvanlige miljømæssige forhold. Udfør et Check, når de miljømæssige forhold, herunder temperatur og højde, ændrer sig væsentligt.

Forholdsregler

- Dagligt: Efterse Smart Check hurtig frakobling, rør og enhedens boks for slid eller brud, og for at sikre, at komponenterne er forbundet til hinanden. Du må IKKE fortsætte med at bruge Smart Check, hvis en af delene er beskadiget eller ikke kan fastgøres forsvarligt. ROHO, Inc. anbefaler, at Smart Check efterses regelmæssigt af en kvalificeret tekniker.
- Smart Check må IKKE nedsænkes i væske, da det vil beskadige enheden.
- Beskyt Smart Check mod stød fra stumpe genstande og gulv, der kan forårsage skade og/eller brud.
- DU MÅ IKKE udsætte produktet for stærk varme, åben ild eller varm aske.
- Brug IKKE oppumpningsventilen, Hurtig frakobling eller nogen af Smart Check-delene som håndtag til at bære eller trække pudens med.
- Hvis produktet eksponeres for ozon over længere tid, kan det nedbryde nogle af de materialer, der bruges til at fremstille dette produkt, påvirke produktets ydeevne og gøre garantien ugyldig.
- Hvis produktet eksponeres for UV lys / sollys over længere tid, kan det forårsage, at produktets etiketter falmer.

Forklaring

Advarsel



Se brugsvejledning



Produktionssted



Opbevares tørt.



Tør af i hånden.



Lufttørres.



Brug ikke blegemiddel.



Lavt batteriniveau: Gult lys



Temperaturgrænse



Luftfugtighedsgrænser
(relativ, ikke-kondenserende)



Atmosfærisk tryk, grænser



Kvælningsfare



Må ikke smides i
husholdningsaffaldet.




Brugeridentifikation



IEC 60601-1: Type BF
anvendt del



Specifikationer

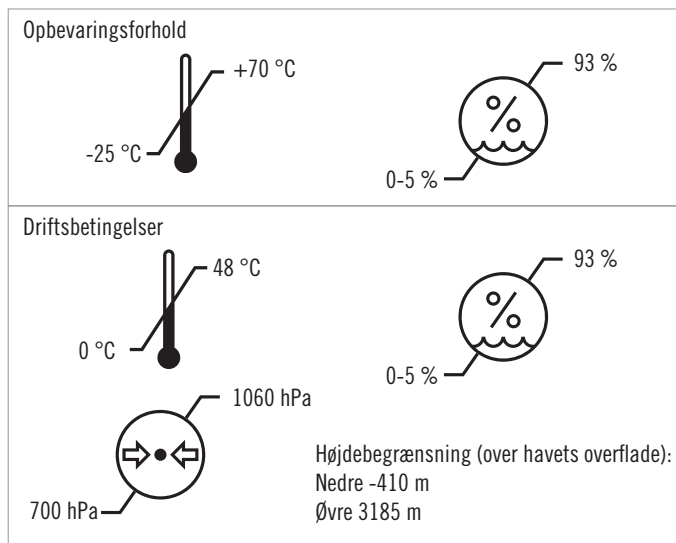

- Smart Check: Polykarbonat med polyester-frontplade
- Opbevaringskasse: Polystyren
- Rør: Polyurethan
- Hurtig frakobling: Acetal
- Dette produkt overholder RoHS2.
- Smart Check er en type BF anvendt del. Smart Check er blevet testet og overholder IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 og IEC 60601-1-11; certificeret til CAN/CSA standard C22.2 nr. 60601-1. Smart Check forårsager ikke elektromagnetisk interferens, og den forstyrrer ikke Smart Check.
- Forventet levetid: 5 år
- Batterier: Typisk ét (1) års driftstid
- Smart Check er en IP54-klassificeret enhed (beskyttet mod støv og vandsprøjt).

Billeder af de enkelte dele

Pakkens indhold: Smart Check® fra ROHO®, Smart Check-vejledning, registreringskort, opbevaringskasse

Produktregistrering: Send den vedlagte produktregistrering, eller registrér dit produkt på ROHO.com.




For oplysninger om din pude, henvises du til *brugerhåndbogen for ROHO® 1-kammer pude med Sensor Ready®-teknologi* eller *ROHO® Hybrid Elite®-puden Brugerhåndbog*.



Brugerhåndbog



Produktregistreringskort

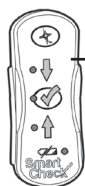

Smart Check-frontplade

Se vejledningen for oplysninger om frontpladen.



Rør



Hurtig frakobling



Opbevaringskasse


Øversigt

Denne side forklarer, hvordan Smart Check bruges til at finde, gemme og tjekke din oppumpning af puden. Læs venligst før brugen af Smart Check.

Smart Indstilling og Check:

1. Følg vejledningen i SMART INDSTILLING. Smart Check vil finde og gemme din oppumpning af puden for dig.
2. Følg CHECK-VEJLEDNING. Når du trykker på Check-knappen, vil Smart Check fortælle dig, om du skal justere din pude.

Indstilling af korrekt oppumpning af puden: A) Synk ned i puden og B) "flyd" over pudens bund.

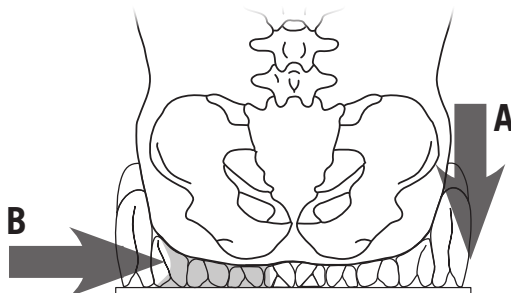

Valgfri Indstilling er et alternativ til Smart Indstilling.

Valgfri Indstilling kan være foretrukken i følgende situationer:

- En kvalificeret siddespecialist har fastsat et alternativt niveau for nedsenkning og indhyldning for brugeren.
- Brugeren skal have opfyldt behov (såsom en meget asymmetrisk kropsholdning), der ligger udenfor den indstilling af nedsenkning og indhyldning, som blev fundet af Smart Check under Smart Indstilling.
- Puden bruges på en polstret overflade (såsom et kaptajnsæde).



Advarsler:

- Det anbefales, at du rådfører dig med en kvalificeret siddespecialist, når der skal gemmes en foretrukken oppumpning af puden med Valgfri Indstilling.
- Valgfri Indstilling bør ikke bruges, hvis brugeren vejer mindre end 40 kg.

Valgfri Indstilling (og Check)

1. Find din foretrukne oppumpning af puden uden at bruge Smart Check. (Følg *brugerhåndbogen for ROHO® 1-kammer pude med Sensor Ready®-teknologi* eller *ROHO® Hybrid Elite®-puden Brugerhåndbog*.)
2. Følg vejledningen i VALGFRI INDSTILLING, og brug Smart Check til at gemme din oppumpningsindstilling.
3. Følg CHECK-VEJLEDNING. Når du trykker på Check-knappen, vil Smart Check fortælle dig, om du skal justere din pude.



VIGTIGT!

- Udfør en Indstilling (enten Smart Indstilling eller Valgfri Indstilling) når du bruger Smart Check for første gang.
- Udfør Smart Indstilling eller Valgfri Indstilling igen, hvis der sker følgende ændringer: 1) En anden bruger anvender Smart Check; 2) en anden stol eller en anden pude anvendes; eller 3) brugeren oplever fysiologiske ændringer (for eksempel, vægttab eller vægtforøgelse). Før der udføres en ny indstilling, skal du slette din Smart Check-indstilling; se GRUNDIG NULSTILLING-VEJLEDNING.
- Udfør jævnligt et tjek, mindst én gang om dagen!


Smart Indstilling - vejledning

Smart Check vil finde og gemme oppumpningsindstillingen for dig, på din pude, i din stol. **Bemærk:** Resultaterne kan variere alt efter kropstype.





- Udfør de følgende trin under de sædvanlige miljømæssige forhold.
- Puden SKAL indeholde for meget luft, for at Smart Indstilling kan startes. Du kan muligvis føle dig ustabil midlertidigt; hvis det er tilfældet, skal du være forsigtig, når du går videre.
- Brugeren SKAL sidde på puden i stolen, før Smart Check bruges.

Symboler og lys for Smart Indstilling




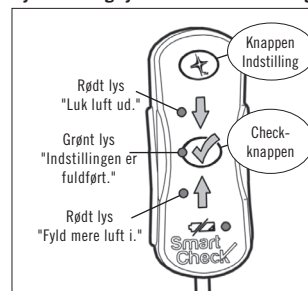


1. Placer puden i stolen. Træk pumpens studs ind over oppumpningsventilen.


Hvis der anvendes et pudebetræk, så skal puden lægges i betrækket, før der fyldes luft i.

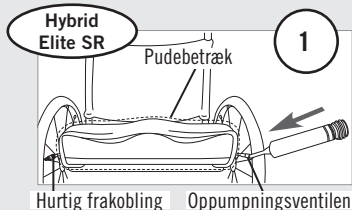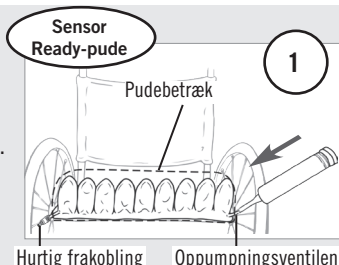

2. Åbn oppumpningsventilen. Pump puden for meget op, indtil den buler ud. Luk oppumpningsventilen. Fjern pumpen.

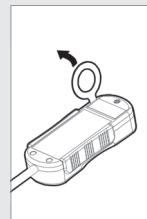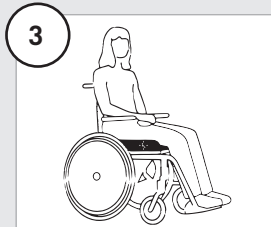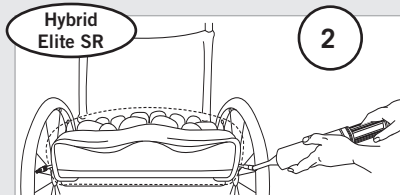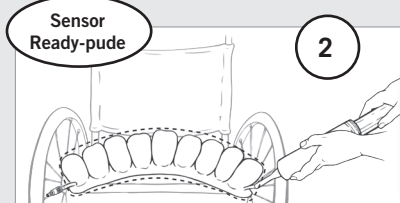


3. Sid i stolen i din normale position. Træk for at fjerne beskyttelsesmateriale (kun første gang den bruges).

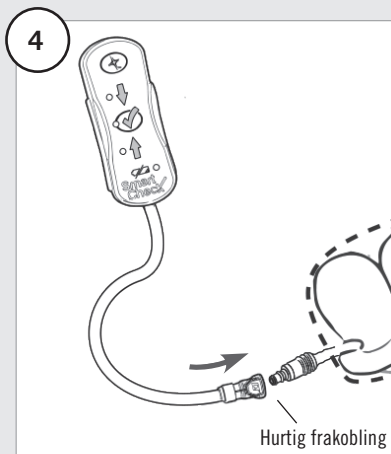

4. Sørg for, at oppumpningsventilen er lukket. Forbind Smart Check til puden. Du vil høre et "klik", når forbindelsen er fastgjort.


Vejledning i Smart Indstilling, fortsat

5a.

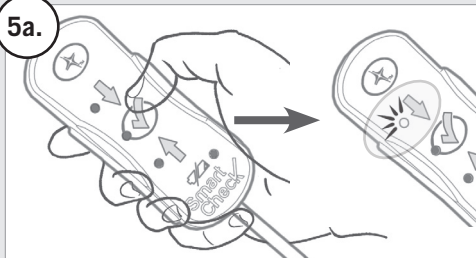


5a. Tryk på knappen Check ✓. Når du ser det røde lys i pil ned ↓, skal du fortsætte til trin 5b.

Bemærk: Hvis du ser en rød pil op ↑ lyse, når du trykker på Check-knappen: 1) Sørg for, at hurtig frakobling er forsvarligt fastgjort, og 2) åbn oppumpningsventilen, tilføj mere luft, luk oppumpningsventilen og tryk på knappen Check ✓ igen. *Gentag, indtil du ser den røde pil ned lyse.*

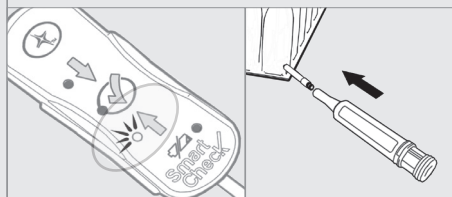



5b.

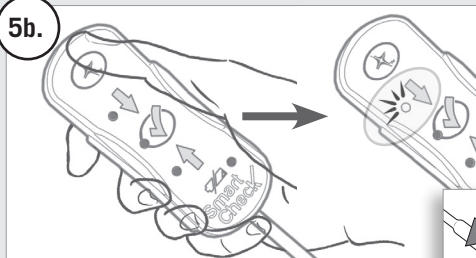

5b. Tryk på knappen Indstilling (men hold den ikke nede). Det røde lys i pil ned ↓ vil nu blinke. Åbn oppumpningsventilen, luk luft ud (cirka 30 til 60 sekunder)* og vent på det blinkende grønne lys.

Hvis det røde lys i pil ned ↓ holder op med at blinke, før du har åbnet ventilen, skal du gå tilbage til 5a.

* **For at sikre en nøjagtig aflæsning:** Bliv siddende stille og undgå at begrænse luftstrømmen, mens du lukker luft ud af puden.

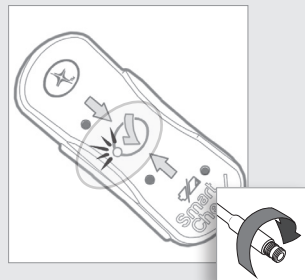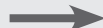

Når du ser det grønne lys blinke, skal du lukke oppumpningsventilen. Det grønne lys betyder, at indstillingen er fuldført.

Din pude er nu indstillet.
(Næste: Se CHECK-VEJLEDNINGEN.)



Opbevar Smart Check et sikkert og tilgængeligt sted. Se vejledning i FRAKOBLING OG OPBEVARING.

Check - vejledning

Udfør et Check efter indstillingen er fuldført (Smart Indstilling eller Valgfri Indstilling).


Sådan udføres et Check:

1. Du bør være i din normale siddestilling.
2. Tryk på Check-knappen.
3. Se tabellen nedenunder.



- Udfør jævnligt et tjek, mindst én gang om dagen!
- Hvis der blev brugt et betræk, mens puden blev indstillet, så skal det samme betræk bruges under Check.
- Udfør et Check, når højden ændres væsentligt.

Symboler og lys for Check

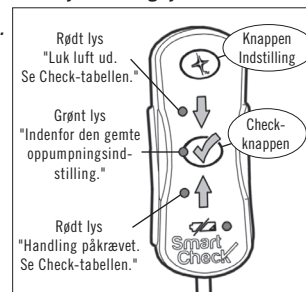

Check tabel

Bemærk: Når du har udført et Check, kan du vælge at udføre et Hånd Check for at blive fortrolig med dit oppumpningsområde. Se HÅND CHECK - VEJLEDNING.

Bemærk: Du kan muligvis tilføje eller fjerne en lille mængde luft og stadig ligge indenfor din indstilling af oppumpningen af puden. Smart Check gemmer din oppumpning af puden, med en vis plads til justeringer.

Lys	Status	Handling
	Puden ligger indenfor den gemte oppumpningsindstilling.	Ingen yderligere handling er påkrævet.
Lys	Mulige årsager	Handling
	Din vægt er muligvis ujævnt fordelt.	Udfør et skift af vægten for at cirkulere luften i puden, og tryk derefter på Check-knappen for at få en ny aflæsning.
	Den hurtige frakobling er ikke forsvarligt fastgjort til puden.	Kontrollér, at forbindelsen er fastgjort, og tryk derefter på Check-knappen for at få en ny aflæsning. Se FEJLFINDING i denne håndbog.
	Der skal mere luft i puden.	Åbn ventilen og fyld mere luft i puden (6 til 10 pumpninger). Luk ventilen. Tryk på Check-knappen for at få en ny aflæsning. Gentag efter behov. Hvis du ikke selv er i stand til at foretage justeringer, skal du stoppe brugen, indtil der er en, der kan hjælpe.
	Puden eller den hurtige frakobling på puden har en langsom lækage.	Se FEJLFINDING i <i>brugerhåndbogen for ROHO® 1-kammer pude med Sensor Ready®-teknologi, ROHO® Hybrid Elite®-puden</i> Brugerhåndbog eller kontakt kundeservice.
Lys	Årsag	Handling
	Der er for meget luft i puden.	Åbn ventilen og luk luft ud af puden, indtil du ser det grønne lys. Luk ventilen. Hvis du ikke er i stand til at udføre denne handling, skal du få en til at hjælpe dig.

Vejledning i Valgfri Indstilling


Valgfri Indstilling er et alternativ til Smart Indstilling, der registrerer din foretrukne oppumpning af puden. Se **OVERSIGT** for flere oplysninger.

Del et: Justér din pude uden Smart Check

1. Udfør en Grundig Nulstilling. Se **GRUNDIG NULSTILLING-VEJLEDNING**.
Bemærk: Ved brug første gang, skal beskyttelsesmateriale på batterierne fjernes.
2. Pump puden op og anbring den i stolen. Sid på puden i din normale position. Justér puden ved at følge vejledningen i Justering af puden i *brugerhåndbogen for ROHO® 1-kammer pude med Sensor Ready®-teknologi* eller *ROHO® Hybrid Elite®-puden Brugerhåndbog*.
3. Udfør et håndtjek for at bekræfte nedsækning og indhyldning. (Se **HÅND CHECK-VEJLEDNINGEN** i denne håndbog.)




Symboler og lys for Valgfri Indstilling

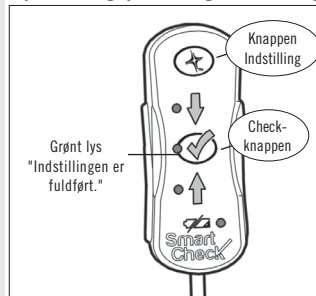

Del to: Gem din indstilling med Smart Check




- Det anbefales, at du rådfører dig med en kvalificeret siddespecialist, når der skal gemmes en foretrukket oppumpning af puden med Valgfri Indstilling.
- Udfør de følgende trin under de sædvanlige miljømæssige forhold.

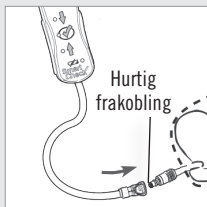

4. Kontrollér, at Smart Check er forbundet til din pude. Du vil høre et "klik", når forbindelsen er fastgjort.



5. Sørg for, at oppumpningsventilen er lukket. Tryk på knappen Check [x] for at aktivere Smart Check. Du vil se enten en ↑ eller en ↓ lyse rødt. **Du må IKKE** fylde mere luft i eller lukke luft ud.

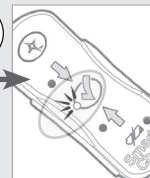

6. Tryk på knappen Indstilling og hold den nede i fire (4) sekunder, indtil du ser et grønt lys. Det grønne lys betyder, at din foretrukne oppumpning af puden er blevet gemt. Det grønne lys indikerer IKKE en korrekt oppumpning af puden. Se **OVERSIGT** for flere oplysninger.



Opbevar Smart Check et sikkert og tilgængeligt sted. Se vejledning i **FRAKOBLING OG OPBEVARING**.


Din pude er nu indstillet. (Næste: Se **CHECK-VEJLEDNINGEN**.)

Hånd Check - vejledning

Brug denne vejledning, når du skal justere din pude under Valgfri Indstilling. Der anbefales også et håndtjek efter udførelsen af Smart Indstilling, så du har et referencepunkt, hvis du skal justere din pude uden Smart Check (for eksempel, hvis enheden er blevet forlagt).



Før du udfører et håndtjek, skal du se **VIGTIGE SIKKERHEDSOPPLYSNINGER** og læse advarslen, der gælder for brugen af en pude, som indeholder for lidt luft, eller en pude, som indeholder for meget luft.

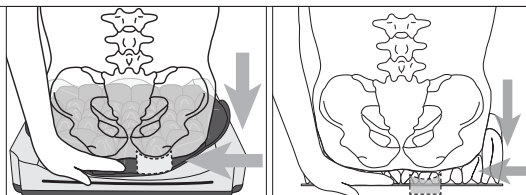

Sørg for, at der findes mindst 1,5 cm med luft til understøttelse af brugerens knoglefremspring.

1. Placer din hånd mellem dig selv og puden. Føl efter det laveste knoglefremspring. Du bør knap nok kunne bevæge dine fingerspidser.
2. Hvis det føles som om, at puden indeholder for meget eller for lidt luft, skal du justere efter behov og se **CHECK-VEJLEDNINGEN** og **OVERSIGT**.

Grundig Nulstilling - vejledning

Før du udfører en ny indstilling, skal du slette indstillingen i Smart Check ved at udføre en Grundig Nulstilling. **Bemærk:** Smart Check kan være forbundet eller frakoblet, når Grundig Nulstilling udføres.

1. Kontrollér, at der ikke er nogen lamper, der lyser konstant eller blinker.
2. Tryk på Check-knappen OG knappen Indstilling samtidigt, og hold dem nede i fem (5) sekunder. Hver lampe vil blinke én gang, hvilket indikerer, at din tidligere indstilling er blevet fjernet.
3. Når hård nulstilling er fuldført, skal du følge alle opsætningsinstruktionerne i denne vejledning.



Frakobling og opbevaring

Sådan frakobles Smart Check fra puden: Tryk den grå lås ned, og adskil derefter.

Sådan opbevares Smart Check: Du kan frakoble Smart Check, og opbevare den et sikkert og tilgængeligt sted, når den ikke er i brug (for eksempel, i opbevaringskassen, der leveres sammen med Smart Check).



Kontrollér, at Smart Check ikke presser mod din krop.

Fejlfinding	
Problem	Handling
Der er ingen lamper, der lyser på Smart Check, når du trykker på Check-knappen.	Kontrollér, at beskyttelsesmateriale er blevet fjernet fra batterirummet. Kontrollér batteritypen, og at batterierne vender rigtigt. Udskift batterierne, hvis det er nødvendigt. Kontakt kundeservice, hvis problemet fortsætter.
Smart Indstilling: Når du trykker på Check-knappen, så viser Smart Check stadig det røde lys "fyld mere luft i" ↑, men du har kontrolleret, at der er for meget luft i puden, og at hurtig frakobling er forsvarligt fastgjort.	Efterse O-ringen på pudens hurtige frakobling for slitage eller beskadigelse. Hvis der opdages beskadigelser, skal du kontakte kundeservice. <i>Efterse puden for en langsom lækage.</i> Se FEJLFINDING i brugerhåndbogen for ROHO® 1-kammer pude med Sensor Ready®-teknologi eller ROHO® Hybrid Elite®-puden Brugerhåndbog.
Valgfri Indstilling: Du ser ikke noget grønt lys, efter du har trykket på knappen Indstilling og holdt den nede i fire (4) sekunder.	Gentag del 2 af VEJLEDNINGEN I VALGFRI INDSTILLING. Hvis du stadig ikke ser noget grønt lys, skal du være opmærksom på, at Valgfri Indstilling muligvis ikke er kompatibel med dine fysiske behov eller præferencer. Se OVERSIGT OG SMART INDSTILLING - VEJLEDNING, eller kontakt dit sundhedspersonale såsom læge eller hjemmepleje, eller kundeservice.
Du har brug for hjælp til brugen eller vedligeholdelsen af Smart Check, eller du støder på uventede problemer.	Kontakt kundeservice.

Begrænset garanti

Begrænset garantitem: 24 måneder fra den dato, hvor produktet oprindeligt er blevet købt. Der henvises til indlægssedlen med begrænset garanti, der følger med produktet, eller kontakt kundeservice.

Rengøring og desinficering



- Rengøring og desinficering er separate procedurer. Rengøringen skal foregå inden desinficeringen.
- Når produktet anvendes af den samme bruger, skal produktet rengøres og desinficeres så ofte, det er nødvendigt. Før det anvendes af en anden bruger, skal produktet rengøres, desinficeres og kontrolleres for hensigtsmæssig funktion.



- Følg sikkerhedsvejledningerne på rengørings- og desinficeringsprodukternes etiketter.
- Smart Check bør ikke rengøres med acetone, butanen (MEK), toluen eller klæbemiddelfjernere.
- Smart Check må IKKE nedsænkes i væske.

Rengøring: Tør Smart Check af med en mild sæbeopløsning og en ren, blød klud eller en svamp. Lad lufttørre.



Desinficering: Tør Smart Check af med desinficerende vådservietter uden blegemiddel. Lad lufttørre.





Sterilisering: Smart Check bliver ikke pakket i steril tilstand, og det er ikke tilsigtet eller påkrævet, at den steriliseres inden brug. Høje temperaturer fremskynder ældning og skader produktets helhed.

Udskiftning af batteri

Lysen for lavt batteriniveau betyder, at batterierne bør udskiftes.



- Smart Check vil huske din gemte indstilling efter udskiftning af batterierne.
- For at spare på batteriernes levetid, går Smart Check automatisk i "dvale"-tilstand, når den ikke er i brug.
- Forventet levetid for batterierne: Ét (1) år.

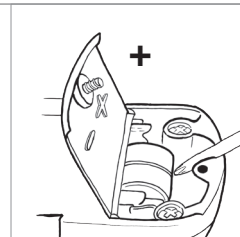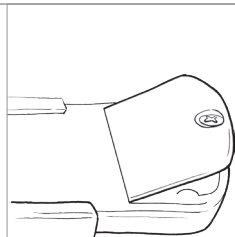

1. Frakobl Smart Check fra puden ved den hurtige frakobling.
2. Brug en stjerneskrueetrækker med et ikke-ledende skaft til at løsne skruen og åbne batteridækslet.
3. Brug skruetrækkeren til at frigøre batterierne med.
4. Læg mærke til "+" og indsæt to (2) nye 1,5 volt alkaliske knapcellebatterier (LR44, A76, AG13 eller tilsvarende).
5. Luk batteridækslet.
6. Stram skruen. **Bemærk:** Hvis skruen ikke strammes helt, kan batterierne blive udsat for fugt, hvilket resulterer i beskadigelse af produktet.



SØRG FOR, AT BATTERIERNE ER UTILGÆNGELIGE FOR BØRN OG ALLE PERSONER, SOM HAR TENDENS TIL AT ANBRINGE USPISELIGE GENSTANDE I MUNDEN. Indtagelse eller indånding kan medføre alvorlig skade eller død. Søg STRAKS akut lægehjælp.



Bortskaffelse

Bortskaf produktet og/eller komponenterne i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i dit område, (herunder bortskaffelse af elektronisk affald). **MÅ IKKE AFBRÆNDES.**



permobil

ROHO SEATING + POSITIONING

Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

permobilus.com



Intertek



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Intertek

The products featured in this document were
manufactured under a Quality Management System
that is certified to ISO 13485:2016.