

# Smart Check<sup>®</sup>

by ROHO<sup>®</sup>

## Operation Manual



Supplier: This manual must be given to the user of this product.

Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read instructions and save for future reference.

s h a p e   f i t t i n g   t e c h n o l o g y<sup>®</sup>



# Smart Check® by ROHO®

## Manual de Operações

Fornecedor: Este manual deve ser dado para o usuário deste produto.

Operador (Indivíduo ou Cuidador): Antes de utilizar este produto, leia as instruções e guarde-as para referência futura.

### Índice

Uso Pretendido	122-123
Informações importantes sobre segurança	
Legendas	124
Especificações	125
Detalhes das Partes	
Visão geral	126
Instruções para Smart Setup	127-128
Instruções de Verificação (Check)	129
Instruções de configuração opcional (Optional Setup)	130
Guia de Verificação Manual (Hand Check)	
Instruções de Restauração (Hard Reset)	131
Desconexão e Armazenamento	
Resolução de problemas	
Garantia Limitada	
Limpeza e desinfecção	132
Substituição das baterias	
Descarte	



ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429 U.S.A.

EUA: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449 • Atendimento ao Cliente: [orders.roho@permobil.com](mailto:orders.roho@permobil.com)

Fora dos EUA: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518 • [intlorders.roho@permobil.com](mailto:intlorders.roho@permobil.com)  
[permobilus.com](http://permobilus.com)

Os produtos ROHO podem ser cobertos por uma ou mais patentes e marcas comerciais dos EUA e estrangeiras, incluindo ROHO®, Hybrid Elite®, Hybrid Elite SR™, Sensor Ready®, shape fitting technology®, Smart Check® by ROHO®, e Smart Check®.

A ROHO, Inc. possui uma política de melhoria contínua dos produtos e se reserva o direito de alterar este documento. A versão atual deste documento está disponível em [permobilus.com](http://permobilus.com).


© 2015, 2018 ROHO, Inc.

Rev: 04/06/2018

## Uso Pretendido

Smart Check® by ROHO® (Smart Check) é um sistema de feedback de almofada destinado a auxiliar o usuário salvando parâmetros de enchimento durante a configuração da almofada. Durante as verificações subsequentes do nível de enchimento, o Smart Check deve indicar se ajustes são necessários para permanecer dentro dos parâmetros salvados.

O Smart Check deve estar conectado a um ROHO® Single Compartment Cushion (Almofada de compartimento único) com tecnologia Sensor Ready® Technology (Almofada Sensor Ready) ou Almofada ROHO® Hybrid Elite SR (Hybrid Elite SR).

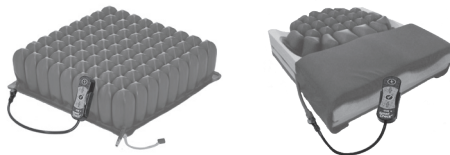

## ⚠ Informações importantes sobre segurança

- Leia estas instruções de forma completa e cuidadosa antes de utilizar este produto.
- Produtos médicos da ROHO têm a intenção de fazer parte de um regime de assistência integral. Um médico deve fazer recomendações de produto com base em uma avaliação das necessidades médicas e terapêuticas e condição geral da pessoa. Um médico também deve avaliar deficiência visual, de leitura e cognitiva para determinar a necessidade de assistência de cuidador com o uso do produto, incluindo fornecer um manual com letras grandes. O uso deste dispositivo não elimina inspeções de rotina do produto e todas as atividades normais associadas com a proteção da pele e tecidos macios (trocas de pesos, inspeção da pele, cuidado da pele em geral, etc.)

## Avisos

- O Smart Check by ROHO foi concebido para uso somente com a almofada ROHO Sensor Ready Cushion e Hybrid Elite SR. Usar uma almofada que não seja irá afetar compatível as funções do Smart Check, reduzir ou eliminar os benefícios da almofada e aumentar os riscos à pele e outros tecidos moles. Usar uma almofada que não seja compatível também pode resultar em danos ao Smart Check e irá anular a garantia.
- NÃO utilize uma almofada sub-inflada ou super-inflada, porque os benefícios do produto serão reduzidos ou eliminados, resultando em um aumento do risco para a pele e outros tecidos moles. Se a almofada não parece estar retendo o ar, ou se você não consegue encher ou esvaziar a almofada, veja a seção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS no manual que foi fornecido com a almofada. Contate imediatamente o seu cuidador clínico, distribuidor ou a ROHO, Inc. se o problema persistir.
- Verifique o enchimento com frequência, pelo menos uma vez ao dia, usando o Smart Check ou uma verificação manual.
- Realize configurações Smart Setup ou Optional Setup novamente se as seguintes alterações ocorrerem: 1) uma pessoa diferente estiver usando o Smart Check; 2) uma cadeira diferente ou almofada diferente estiver sendo usada; ou 3) a pessoa passar por alterações fisiológicas (por exemplo, perda ou ganho de peso). Antes de realizar uma nova Configuração, você precisa 'limpar' sua configuração Smart Check; ver INSTRUÇÕES DE RESTAURAÇÃO (HARD RESET).
- MANTENHA AS BATERIAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E QUAISQUER PESSOAS QUE TENHAM UMA TENDÊNCIA DE LEVAR OBJETOS NÃO COMESTÍVEIS À BOCA. Engolir ou inalar pode levar a lesões graves ou morte. Busque assistência médica emergencial IMEDIATAMENTE.
- TENHA CUIDADO quando na presença de crianças para evitar riscos de estrangulamento. Separe o Smart Check quando não estiver em uso e guarde-o em um local seguro e acessível.

## **Importantes Informações de Segurança, cont.**

### **Alertas, Cont.**

- A utilização de acessórios (por exemplo, uma bomba ou capa de almofada) diferentes daqueles fornecidos pela ROHO, Inc., podem não ser seguros e podem anular a garantia do produto.
- **NÃO** modifique o Smart Check ou qualquer componente. Fazer isso poderá resultar em danos ao produto e irá anular a garantia.
- **NÃO** use na presença de anestésicos inflamáveis e/ou ambientes ricos em oxigênio. Fazer isso irá aumentar o risco de incêndio ou explosão.
- Se a sua almofada estiver instável durante a (configuração) Smart Setup, realize uma (restauração) Hard Reset e depois, repita a Smart Setup. Se você ainda achar instável, realize uma configuração opcional (Optional Setup) e consulte um provedor de saúde.
- A almofada **DEVE** estar devidamente dimensionada para o usuário. **SE NÃO**, o Smart Check poderá não encontrar os parâmetros de enchimento da pessoa durante o Smart Setup, reduzindo ou eliminando os benefícios da almofada e aumentando os riscos à pele e outros tecidos macios.
- Todos os aspectos do uso do Smart Check descritos neste manual podem ser realizados pela pessoa ou por um cuidador. Se você não conseguir realizar alguma das tarefas descritas neste manual, procure ajuda.
- **RISCO DE QUEIMADURAS:** Se a temperatura ambiente exceder 47°C (117°F), **NÃO** mantenha contato com a superfície do produto por mais de dez (10) minutos.
- O Smart Check **DEVE** ser usado **SOMENTE** com uma capa de almofada ROHO compatível. O uso de uma capa diferente pode interferir com a precisão das funções do Smart Check.
- **NÃO** realize a manutenção do Smart Check quando estiver em uso. Fazer isso pode resultar em funcionamento incorreto.
- Configure sua almofada nas condições ambientais normais. Realize a verificação (Check) quando as condições ambientais, incluindo temperatura e altitude, mudarem significativamente.


### **Precauções**

- Diariamente: Inspeção o desengate rápido do Smart Check, tubos e estojo do dispositivo para desgaste ou quebras e para assegurar o encaixe entre os componentes. **NÃO** continue a usar o Smart Check de alguma parte estiver danificada ou não puder ser conectada firmemente.
- A ROHO, Inc. recomenda que o Smart Check seja cuidadosamente inspecionado periodicamente por um técnico qualificado.
- **NÃO** mergulhe o Smart Check e, líquidos, pois isso irá danificar o aparelho.
- Proteja o Smart Check de choques fortes e bruscos que podem causar danos e/ou quebras.
- **NÃO** exponha o produto ao calor excessivo, chamas ou cinzas quentes.
- **NÃO** use a válvula de enchimento, Desengate rápido ou qualquer outro componente do Smart Check como alça para carregar ou puxar a almofada.
- Exposição prolongada ao ozônio pode degradar alguns materiais usados na fabricação deste produto e afetar a sua performance e anular a garantia do produto.
- Exposição prolongada à luz UV / ou do sol pode causar desbotamento dos rótulos.

## Legendas

Aviso		Limites de Temperatura	
Consulte as instruções para uso.		Limitação de umidade (relativa, não-condensante)	
Local de fabricação		Limitação da pressão atmosférica	
Manter seco.		Risco de choques	
Limpar à mão		Não dispor em lixo comum.	 
Ar seco.		Identificação do usuário	
Não usar alvejante/solvente.		IEC 60601-1: Type BF Applied Part (Parte Aplicada)	
Bateria fraca: luz âmbar			

## Especificações

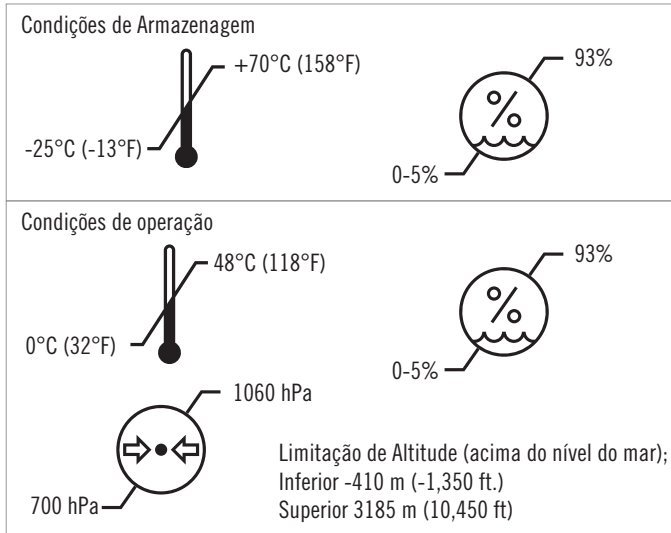


- Smart Check: policarbonato com faceplate de poliéster
- Estojo (Storage Case): poliestireno
- Tubos: poliuretano
- Desengate Rápido: acetato
- Este produto está em conformidade com RoHS2.
- Smart Check é uma BF Applied Part (Parte Aplicada). O Smart Check foi testado e está conforme com IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, e IEC 60601-1-11; certificado para CAN/CSA Standard C22.2 No. 60601-1. Interferência eletromagnética não é causada pelo Smart Check e não interfere com o Smart Check.
- Expectativa de Vida Útil: 5 anos
- Baterias: tempo de operação típica um (1) ano
- O Smart Check é um aparelho com classificação IP54 (protegido de poeira e pingos de água).

## Detalhes das Partes

Conteúdo da Embalagem Smart Check® by ROHO®, instruções Smart Check, cartão de registro, estojo

Registro de Produto: Envie por correio o registro de produto incluído ou registre seu produto em ROHO.com.


 Para obter informações sobre sua almofada, consulte o *Almofada de Compartimento Único ROHO® com Tecnologia Sensor Ready® Manual de Operações* ou *Almofada ROHO® Hybrid Elite® Manual de Operações*.



Manual de Operações



Cartão de Registro do Produto

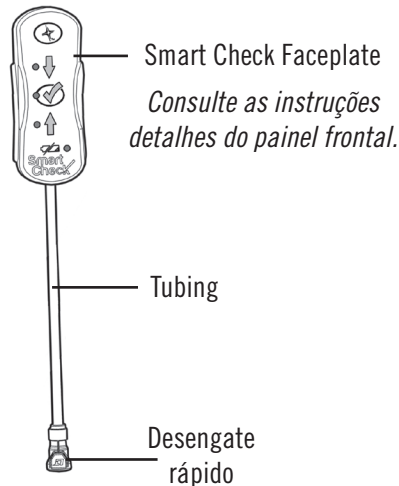

Estojo


## Visão geral

Esta página explica como utilizar o Smart Check para encontrar, salvar e verificar a configuração de enchimento da sua almofada. Leia antes de usar o Smart Check.

### Configuração (Smart Setup) e Verificação (Check):

1. Siga as INSTRUÇÕES PARA SMART SETUP. O Smart Check irá encontrar e salvar a configuração de enchimento da sua almofada para você.
2. Siga INSTRUÇÕES DE VERIFICAÇÃO (CHECK). Quando você pressionar o Check Button, Smart Check irá dizer se você precisa ajustar sua almofada.

Configuração Correta de enchimento da Almofada: **A)** sente na almofada e **B)** “flutue” acima da base da almofada.

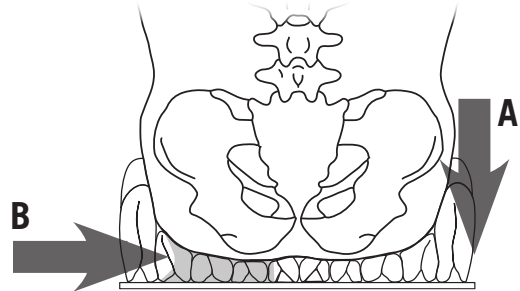

### Configuração Opcional (Optional Setup) é uma alternativa para a configuração (Smart Setup).

Optional Setup pode ser preferida nas seguintes situações:

- Um especialista qualificado em assentos determinou uma imersão alternativa e nível de envelopamento para a pessoa.
- A pessoa deve acomodar as necessidades (tais como postura assimétrica grave) que estão além da imersão e configuração de envelopamento encontrados pelo Smart Check durante o Smart Setup.
- A almofada está sendo usada em uma superfície estofada (como uma poltrona).



#### Avisos:

- Recomendamos que um especialista qualificado em posicionamento seja consultado ao salvar uma configuração preferida de enchimento da almofada com Configuração Opcional.
- Optional Setup não deve ser usado se a pessoa pesar menos de 90 lbs. (40 kg).

### Configuração Opcional (Optional Setup) (e Check)

1. Encontre sua configuração preferida de enchimento da almofada sem usar o Smart Check. (Consulte o *Almofada de Compartimento Único ROHO® com Tecnologia Sensor Ready® Manual de Operações* ou *Almofada ROHO® Hybrid Elite® Manual de Operações*.)
2. Siga as INSTRUÇÕES DE (CONFIGURAÇÃO OPCIONAL (OPTIONAL SETUP), usando Smart Check para salvar sua configuração de enchimento.
3. Siga INSTRUÇÕES DE VERIFICAÇÃO (CHECK). Quando você pressionar o Check Button, o Smart Check irá dizer se você precisa ajustar sua almofada.



### IMPORTANTE!

- Realize Configuração (Smart Setup ou Optional Setup) quando usar o Smart Check pela primeira vez.
- Realize configurações Smart Setup ou Optional Setup novamente se as seguintes alterações ocorrerem: 1) uma pessoa diferente estiver usando o Smart Check; 2) uma cadeira diferente ou almofada diferente estiver sendo usada; ou 3) a pessoa passar por alterações fisiológicas (por exemplo, perda ou ganho de peso). Antes de realizar uma nova Configuração, você precisa “limpar” sua configuração Smart Check; ver INSTRUÇÕES DE RESTAURAÇÃO (HARD RESET).
- Realize uma verificação (Check) frequentemente, pelo menos uma vez ao dia!




## Instruções para Smart Setup

O Smart Check irá encontrar e salvar a configuração de enchimento para você, sobre sua almofada em sua cadeira. **OBSERVAÇÃO:** Os resultados podem variar dependendo do tipo de corpo.





- Realize os seguintes passos nas condições ambientais normais.
- A almofada **DEVE** estar com enchimento a mais para iniciar o Smart Setup. Você pode se sentir temporariamente instável; portanto, prossiga com cuidado.
- A pessoa **DEVE** estar sentada sobre a almofada na cadeira antes de usar o Smart Check.

### Symbols and Lights for Smart Setup

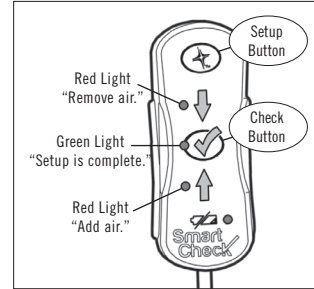


1. Coloque a almofada na cadeira. Coloque o bico da bomba sobre a válvula de enchimento.

*Se uma capa de almofada for utilizada, coloque a capa sobre a almofada antes de encher.*

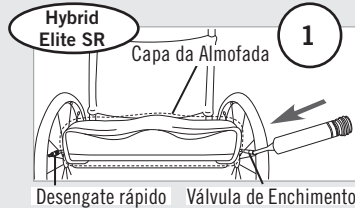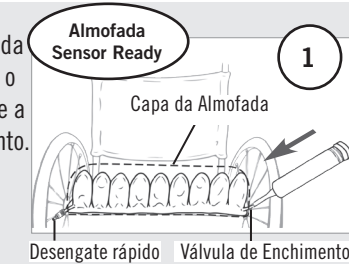



2. Abra a válvula de enchimento. Encha 'a mais' a almofada até haver uma saliência. Feche a válvula de enchimento. Remova a bomba.

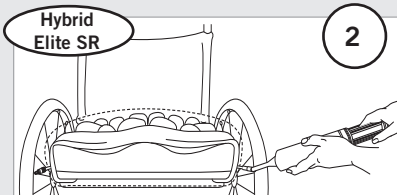


Abrir



Fechar

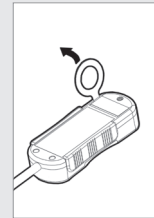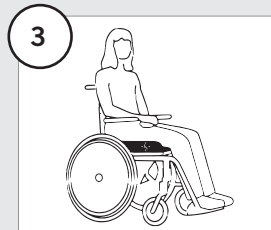


3. Sente-se na cadeira na sua posição usual. Puxe para remover a guia (somente na primeira utilização).

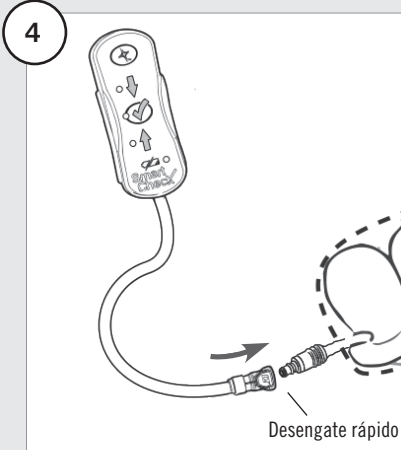

4. Certifique-se de que a válvula de enchimento está fechada. Anexe o Smart Check à almofada. Quando a conexão estiver presa ouvir-se-á um "clique".


## Instruções para Smart Setup, Cont.

5a.

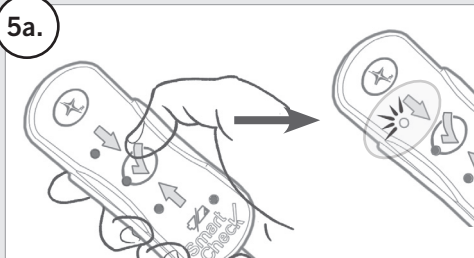


**5a.** Pressione o Check Button ✓. Quando ver a luz vermelha de seta para baixo ↓, prossiga para o passo 5b.



**OBSERVAÇÃO:** : Se você ver a luz de seta para cima ↑ ao pressionar o Check Button: 1) Certifique-se de que o desengate rápido está bem preso, e 2) Abra a válvula de enchimento, adicione mais ar, feche a válvula de enchimento e pressione novamente o Check Button ✓. Repita até ver a luz vermelha de seta para baixo.

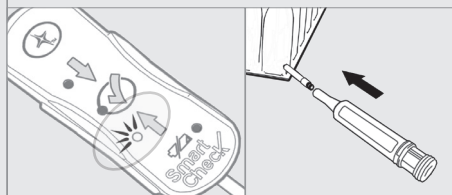

5b.

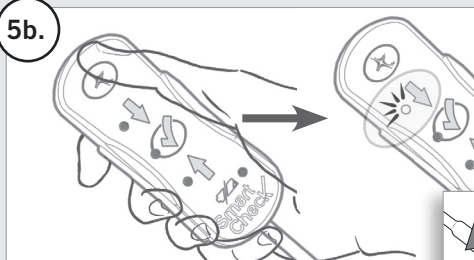

**5b.** Pressione (mas não segure) o Setup Button. A luz vermelha de seta para baixo agora irá **piscar** ↓. Abra a válvula de enchimento, libere o ar (aproximadamente 30 a 60 segundos)\*, e aguarde a luz verde piscando.

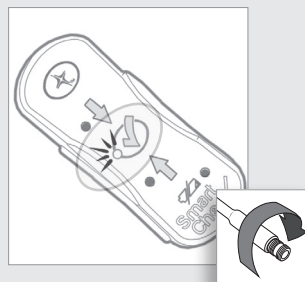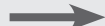

Ao ver a luz verde piscando, feche a válvula de enchimento. A luz verde significa que Setup (configuração) está completa.

Se a luz vermelha ↓ de seta para baixo para de piscar antes de ter aberto a válvula, volte para o 5a.

**\*Para assegurar uma leitura precisa:** Permaneça imóvel e evite restringir o fluxo de ar enquanto libera o ar da almofada.

**Sua almofada agora está configurada.**  
Próximo: VER INSTRUÇÕES DE VERIFICAÇÃO (CHECK).



**Armazene o Smart Check em um local seguro e acessível. Ver instruções DESCONEÇÃO E ARMAZENAMENTO.**

## Instruções de Verificação (Check)

Realize uma verificação (Check) após completar o Setup (Smart Setup ou Optional Setup).

### Como realizar uma verificação (Check):

1. Você deve estar sentado em sua posição normal.
2. Pressione o Check Button.
3. Consulte a tabela abaixo.



- Realize uma verificação (Check) frequentemente, pelo menos uma vez ao dia!
- Se uma capa foi utilizada durante a configuração da almofada, a mesma capa deve ser usada durante o Check.
- Realize um Check quando houver uma mudança significativa de altitude.

### Símbolos e Luzes para a Verificação (Check)

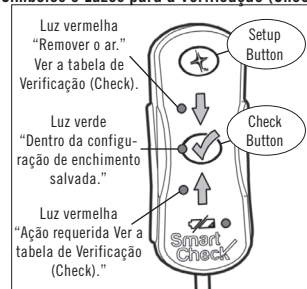


Tabela de Verificação (Check)		
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Após realizar um Check, você pode escolher realizar uma verificação manual (Hand Check) para se familiarizar com seus parâmetros de enchimento. Ver o GUIA DE VERIFICAÇÃO MANUAL (HAND CHECK). <b>OBSERVAÇÃO:</b> Você poderá adicionar ou remover uma pequena quantidade de ar e ainda estar dentro da configuração de enchimento da sua almofada. O Smart Check armazena a configuração de enchimento da sua almofada com algum espaço para ajustes.		
Luz	Status	Ação
	A almofada está dentro da configuração de enchimento salva.	Não é necessária nenhuma outra ação.
Luz	Causas possíveis	Ação
	Seu peso pode estar mal distribuído.	Realize uma troca de peso para circular o ar na almofada e depois pressione o Check Button para obter uma nova leitura.
	O desengate rápido não está bem preso à almofada.	Certifique-se que a conexão está segura e pressione o Check Button para obter uma nova leitura. Ver RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS neste manual.
	A almofada precisa de mais ar.	Abra a válvula e adicione mais ar à almofada (6 a 10 bombeadas). Feche a válvula. Pressione o Check Button para obter uma nova leitura. Repetir conforme necessário.  <b>Se você não conseguir fazer os ajustes sozinho, interrompa o uso até conseguir ajuda.</b>
	A almofada ou o desengate rápido têm um pequeno vazamento.	Ver RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS no <i>Almofada de Compartimento Único ROHO® com Tecnologia Sensor Ready® Manual de Operações</i> , <i>Almofada ROHO® Hybrid Elite® Manual de Operações</i> ou contate o Atendimento ao Cliente.
Luz	Causa	Ação
	A válvula está com excesso de ar.	Abra a válvula e remova o ar da almofada até ver a luz verde. Feche a válvula.  <b>Se você não conseguir realizar essa tarefa, procure ajuda.</b>

## Instruções de configuração opcional (Optional Setup)

Configuração opcional (Optional Setup) é uma alternativa para Smart Setup que registra sua configuração favorita de enchimento da almofada. Ver Visão geral para obter mais informações.



Símbolos e Luzes para o Optional Setup

### Parte Um: Ajuste sua almofada com o Smart Check

1. Realize uma restauração (Hard Reset). Ver INSTRUÇÕES PARA RESTAURAÇÃO (HARD RESET).

**OBSERVAÇÃO:** Para o primeiro uso, remova a presilha da bateria.

2. Encha a almofada e coloque-a na cadeira. Sente na almofada na sua posição usual. Ajuste a almofada seguindo as instruções de Ajuste da Almofada no *Almofada de Compartimento Único ROHO® com Tecnologia Sensor Ready® Manual de Operações* ou *Almofada ROHO® Hybrid Elite® Manual de Operações*.
3. Realize uma verificação manual para confirmar a imersão e envelopamento. Ver o GUIA DE VERIFICAÇÃO MANUAL (HAND CHECK) neste manual.)

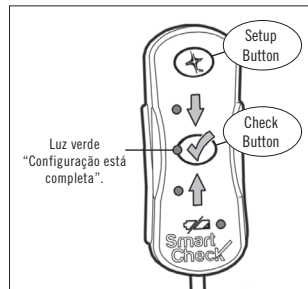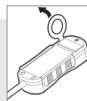

### Parte Dois: Salve sua Configuração com Smart Check




- Recomendamos que um especialista qualificado em posicionamento seja consultado ao salvar uma configuração preferida de enchimento da almofada com Configuração Opcional.
- Realize os seguintes passos nas condições ambientais normais.



4. Certifique-se que o Smart Check está conectado à sua almofada. Quando a conexão estiver presa ouvir-se-á um “clique”.



5. Certifique-se de que a válvula de enchimento está fechada. Pressione o Check Button ✓ para ativar o Smart Check. Você verá um luz vermelha ↑ ou ↓. **NÃO** adicionar ou remover ar.

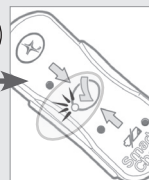

6. Pressione e mantenha pressionado o Setup Button por quatro (4) segundos até ver uma luz verde. A luz verde indica que sua configuração preferida de enchimento da almofada foi salva.. A luz verde **NÃO** indicar uma Configuração de Enchimento Adequada da Almofada. Ver ASPECTOS GERAIS para mais informações.





Armazene o Smart Check em um local seguro e acessível. Ver instruções DESCONEXÃO E ARMAZENAMENTO.

**Sua almofada agora está configurada.**

Próximo: VER INSTRUÇÕES DE VERIFICAÇÃO (CHECK).

## Guia de Verificação Manual (Hand Check)

Use este guia para ajustar sua almofada durante a configuração opcional (Optional Setup). Uma verificação manual também é recomendada após realizar o Smart Setup para ter um ponto de referência se precisar ajustar sua almofada sem o Smart Check (por exemplo, se o aparelho foi colocado errado).

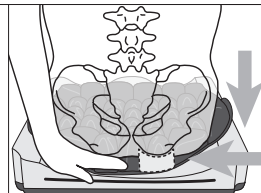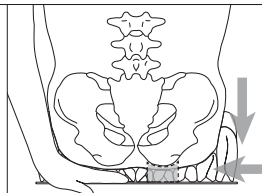

**Antes de realizar um controle manual, consulte INFORMAÇÃO IMPORTANTE DE SEGURANÇA e leia a advertência sobre o uso de uma almofada com pouco ar e/ou uso de almofada com muito ar.**



Assegure que haja, pelo menos, ½ pol. (1,5 cm) de ar apoiando as proeminências ósseas da pessoa.

1. Coloque sua mão entre você e a almofada. Sinta a saliência óssea mais baixa. Você deve conseguir mover um pouco a ponta dos seus dedos.
2. Se achar que a almofada está como muito ou pouco ar, ajuste como necessário e veja INSTRUÇÕES DE VERIFICAÇÃO (CHECK) e VISÃO GERAL.

## Instruções de Restauração (Hard Reset)

Antes de realizar uma nova configuração (Setup), você deve limpar a configuração no Smart Check realizando uma restauração (Hard Reset). **OBSERVAÇÃO:** O Smart Check pode estar conectado ou desconectado durante a restauração (Hard Reset).

1. Certifique-se de não haver luzes acesas ou piscando.
2. Simultaneamente pressione e segure o Check Button E o Setup Button por cinco (5) segundos. Cada uma das luzes irá piscar uma vez, indicando que sua configuração anterior foi removida.
3. Após a Reinicialização Total estar concluída, siga as instruções de configuração como indicado neste manual.




## Desconexão e Armazenamento

**Para Desconectar o Smart Check da Almofada:** Pressione para baixo no fecho cinza, depois separe.

**Para Guardar o Smart Check:** Você pode desconectar e guardar o Smart Check em um local seguro e acessível quando não estiver em uso (por exemplo, o estojo fornecido com o Smart Check).



Confirme que o Smart Check não está pressionado contra seu corpo.

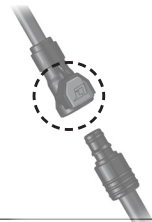

## Resolução de problemas

### Problema

### Ação

Nenhuma luz aparece no Smart Check após pressionar o Check Button.

Certifique-se que a presilha foi removida do compartimento da bateria. Confirme o tipo de bateria e seu posicionamento. Substituir as baterias se necessário. Contate o Atendimento ao Cliente se o problema persistir.

Smart Setup: Após pressionar o Check Button, o Smart Check ainda exibe a luz vermelha “adicionar ar” ↑, mas você confirmou que a almofada está com ar ‘a mais’ e que o desgange rápido está preso com firmeza.

Inspeccione o anel (O-ring) do desgange rápido para desgaste ou danos. Se houver danos, contate o Atendimento ao Cliente.  
Inspeccione a almofada para pequenos vazamentos. Ver RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS no *Almofada de Compartimento Único ROHO® com Tecnologia Sensor Ready® Manual de Operações* ou *Almofada ROHO® Hybrid Elite® Manual de Operações*.

Configuração Opcional (Optional Setup): Você não vê uma luz verde após pressionar e segurar o Setup Button por quatro (4) segundos.

Repita a Parte 2 das INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO OPCIONAL (OPTIONAL SETUP). Se você ainda não vê uma luz verde, note que a Configuração Opcional (Optional Setup) pode não ser compatível com suas necessidades físicas ou preferências. Consulte VISÃO GERAL e INSTRUÇÕES DO SMART SETUP, ou contate seu médico ou Atendimento ao Cliente.

Você precisa de assistência com o uso ou manutenção do Smart Check ou encontrou um problema inesperado.

Contat o Atendimento ao cliente.

## Garantia Limitada

Termo de Garantia Limitada: 24 meses a partir da data em que o produto foi originalmente adquirido. Veja também o suplemento de Garantia Limitada fornecido com o seu produto, ou contate o Atendimento ao Cliente.

## Limpeza e desinfecção



- Limpeza e desinfecção são processos separados. Limpeza deve vir antes da desinfecção.
- Quando utilizado pela mesma pessoa, limpe e desinfete o produto o mais seguido possível. Antes de utilizar para uma pessoa diferente, limpe, desinfete e verifique o produto para um funcionamento adequado.



- Siga as orientações de segurança dos rótulos dos produtos de limpeza e desinfecção.
- O Smart Check não deve ser limpo com acetona, MEK, tolueno ou removedores de adesivos.
- NÃO mergulhe o Smart Check em líquidos.

**Para Limpar:** Limpe o Smart Check com detergente neutro e um pano ou esponja limpo e macio. Secar no Ar.



**Para Desinfetar:** Limpe o Smart Check com uma esponja desinfetante sem alvejante. Secar no Ar.





**Esterilização:** O Smart Check não é embalado em condições estéreis, nem precisa ser esterilizado antes do uso. Altas temperaturas aceleram o envelhecimento e causam danos à montagem do produto.

## Substituição das baterias

A luz de bateria fraca significa que as baterias devem ser substituídas.



- O Smart Check irá lembrar da sua configuração salvada após a troca das baterias.
- Para preservar a vida útil da bateria, o Smart Check entra automaticamente no modo "sleep" quando não estiver em uso.
- Vida útil esperada das baterias: um (1) ano.

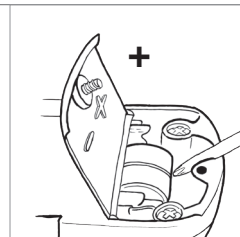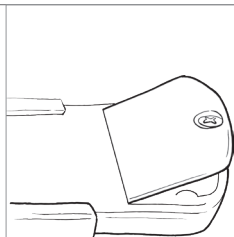

1. Separe o Smart Check da almofada no desengate rápido.
2. Use uma chave de fenda Phillips com um cabo isolado para soltar o parafuso e abrir a porta das baterias.
3. Use a chave de fenda para soltar as baterias.
4. Procure o "+" e coloque duas (2) baterias alcalinas 1.5 volt tipo botão (LR44, A76, AG13 ou equivalentes).
5. Feche a tampa da bateria.
6. Aperte o parafuso. **OBSERVAÇÃO:** Se o parafuso não estiver completamente apertado, as baterias podem estar expostas à umidade, resultando em danos ao produto.



**MANTENHA AS BATERIAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E QUAISQUER PESSOAS QUE TENHAM UMA TENDÊNCIA DE LEVAR OBJETOS NÃO COMESTÍVEIS À BOCA.** Engolir ou inalar pode levar a lesões graves ou morte. Busque assistência médica emergencial **IMEDIATAMENTE**.



## Descarte

Descarte o produto e/ou componentes de acordo com as regulamentações aplicáveis em sua jurisdição, (incluindo descarte de lixo eletrônico). **NÃO INCINERAR.**





# permobil

ROHO SEATING + POSITIONING

**Mailing/Shipping Address:**

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

**Administrative Offices:**

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA

U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449

Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

[permobilus.com](http://permobilus.com)



**Intertek**



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany



**Intertek**

The products featured in this document were  
manufactured under a Quality Management System  
that is certified to ISO 13485:2016.